

GP-16 AD-8127 用プリンタ台 取扱説明書

本プリンタ台は、A&D製の天びんGX-L/GF-Lシリーズ、GPシリーズにプリンタAD-8127を装着搭載する時に使用する専用プリンタ台です。

適応機種

GX-L/GF-L シリーズ、GP シリーズ

プリンタおよび専用台の取付け方

手順1 表示器ケース右側裏の2ヶ所のネジを外します。

- 手順2**
- GX-L/GF-L シリーズ
RS-232C インタフェース(D-Sub 9ピン) 端子カバーを外します。
 - GP シリーズ
オプション部のカバー、カバーゴムを外します。

手順3 プリンタ台を付属のネジ(M4 × 15W セムス)で表示器下ケースに固定します。



手順4 プリンタ台にプリンタ(AD-8127)を前側から載せ、フックを広げながら挿入します。

- 手順5**
- GX-L/GF-L シリーズ
RS-232C ケーブル(AX-KO2741-100)を表示器ユニットのRS-232C コネクタ、プリンタのRS-232C コネクタに取り付けます。
 - GP シリーズ
RS-232C ケーブル(AX-KO2116-090)の25ピン側を表示器ユニットのRS-232C コネクタ、9ピン側をプリンタのRS-232C コネクタに取り付けます。

手順6 ケーブルは、図のように長さを調整して付属のケーブルクランプで表示器アームに取り付けます。

手順7 天びんとプリンタにACアダプタケーブルを取り付け、一緒にケーブルクランプで留めます。

注意 RS-232C インタフェース端子カバーを外したGX-L/GF-Lシリーズやオプション部のカバー、カバーゴムを外したGPシリーズは、プリンタを含め防塵・防滴仕様にはなりません。

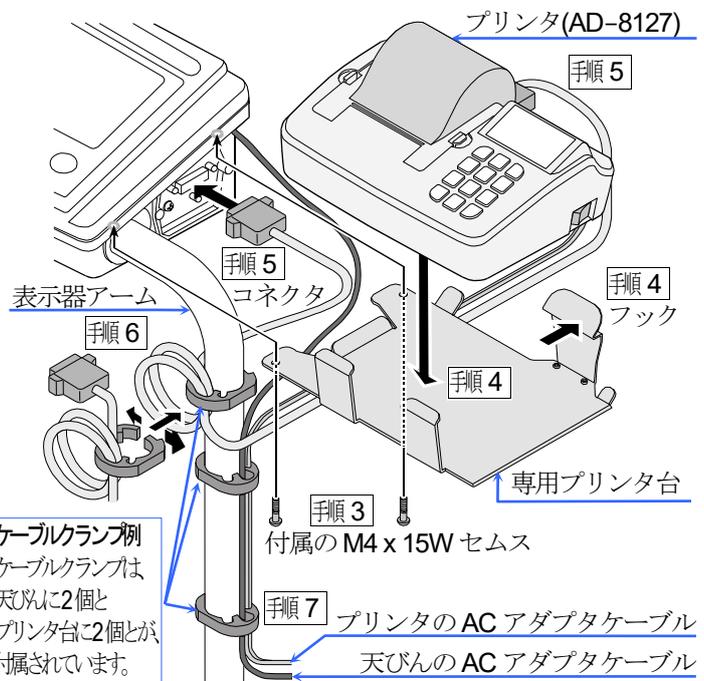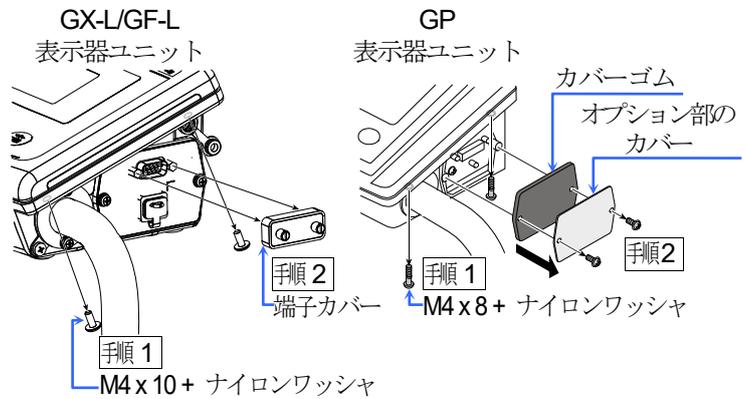

梱包内容

構成部品	数量
GP-16 AD-8127 用プリンタ台	1
ケーブルクランプ	2
M4 × 15W セムス	2
取扱説明書(本書)	1

1WMPD4003552A

A&D 株式会社 **エーアンド・デイ**
 本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

GP-16 The Printer Support for the AD-8127 Instruction Manual

The printer support is used to install the AD-8127 to GX-L/GF-L series and GP series balances made by A&D Company, Limited.

Applicable products: GX-L/GF-L series, GP series

Installing the printer and printer support

Step 1 Remove two screws on right side of the display case.

Step 2 • GX-L/GF-L series

Remove the terminal cover for the RS-232C interface (D-Sub 9 pin).

• GP series

Remove the option cover and the rubber cover.

Step 3 Install the printer support beside the display unit using screws (M4x15W SEMS screws).

Step 4 Place the printer (AD-8127) on the printer support while holding open the hook.

Step 5 • GX-L/GF-L series



Connect the RS-232C cable (AX-KO2741-100). Connect its RS-232C connector to the display unit and to the printer.

• GP series

Connect the RS-232C cable (AX-KO2116-090). Connect its 25 pin connector to the display unit and its 9 pin connector to printer.

Step 6 Adjust the length of the remaining cable. Bundle up cables using cable clamps beside the display arm.

Step 7 Attach AC adaptor cables to the balance and printer, and bundle them using cable clamps.

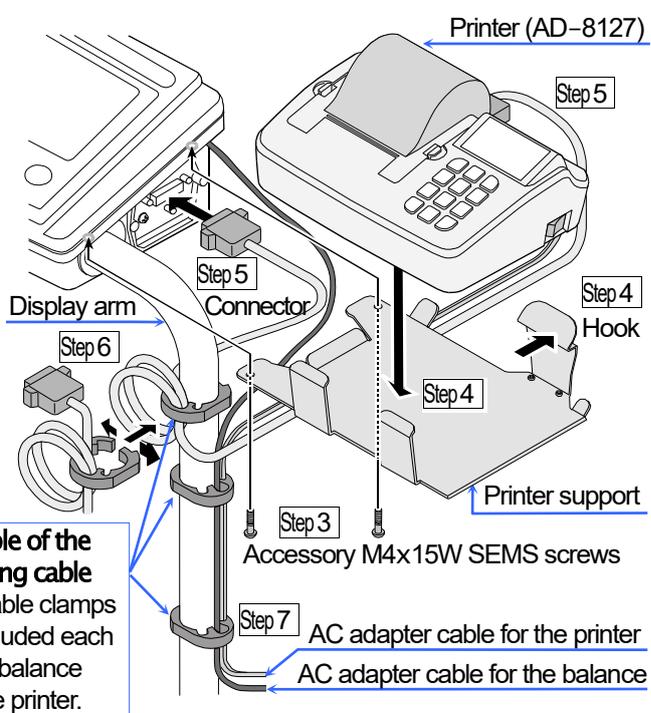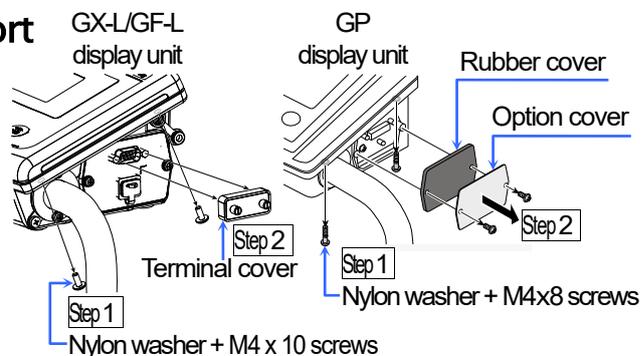

Example of the clamping cable
Two cable clamps are included each for the balance and the printer.

Caution

If the RS-232C interface terminal cover is removed from GX-L/GF-L series, or if the option cover and rubber cover are removed from GP series, the balance and printer will not be waterproof and dustproof.



Packing Contents

Component parts	Quantity
GP-16 Printer support for the AD-8127	1
Cable clamp	2
M4 x 15W SEMS screws	2
Instruction manual (This document)	1

