

■ HV-CWP / HW-CWP シリーズ ロードセルケーブル延長手順


注意

延長ケーブルを使用する場合、はかりの温度特性・ノイズ耐性は悪化する可能性があります。
延長ケーブル接続後は、キャリブレーションを行って下さい。

(HV-CWP/HW-CWP の取扱説明書「11. キャリブレーション」参照)


必要なもの

- ・ AX-KO6430-5M 延長ケーブル (φ6、シールドケーブル 5m)
- ・ AX-TMBOXTS-6 中継ボックス (IP67)
- ・ (AX-043005266) 表示器ホルダ

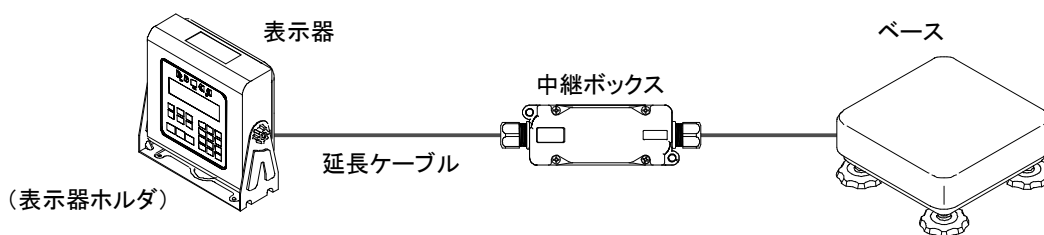


接続手順

- (1) HV-CWP/HW-CWP の取扱説明書「4.2. ポールの取り外し方」に従って、表示器からロードセルケーブルを外します。
- (2) 中継ボックスのフタを開きます。

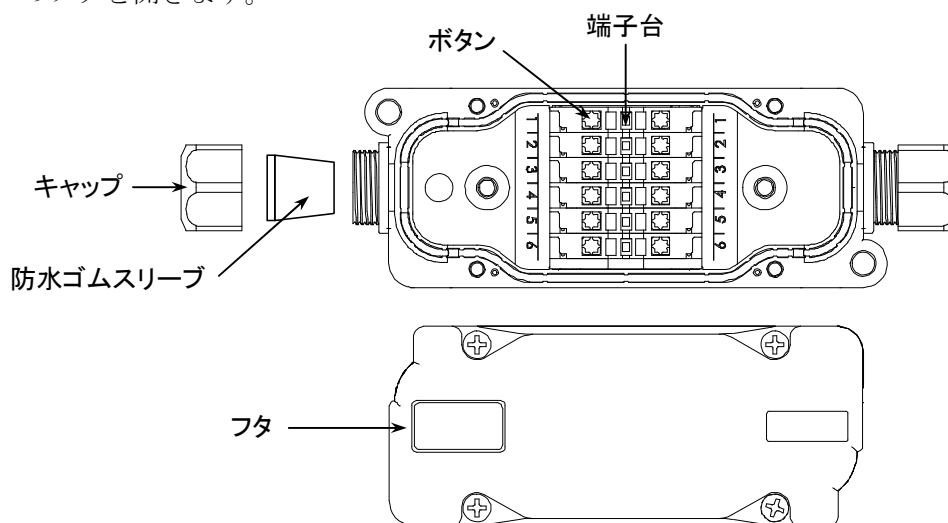


- (3) 中継ボックスのキャップと防水ゴムスリーブ、本体の穴にケーブルを通します。
防水ゴムスリーブはそれぞれ下記を使用して下さい。

ロードセルケーブル：スリーブ A
延長ケーブル：スリーブ B

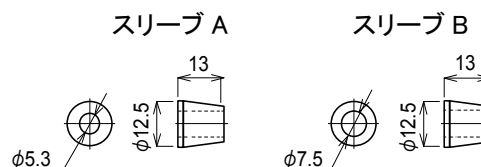

- (4) ケーブルを下記のように接続して下さい。

信号名	表示器側	延長ケーブル	中継ボックス	ベース側
			端子番号	
電源+	EXC+	赤色	1	赤色
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
電源-	EXC-	白色	2	白色
出力+	SIG+	緑色	3	緑色
出力-	SIG-	青色	4	青色
シールド	SHIELD	黄色	5	黄色
-	-	-	6	-

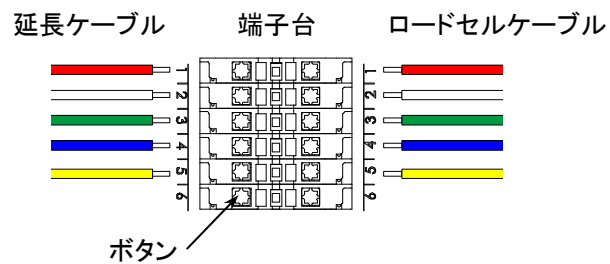

中継ボックスの端子台は、ボタンを押しながらリード線を差し込んで下さい。
しっかりと接続されたことを確認して下さい。

- (5) 表示器のロードセルパネルを閉めます。
- (6) 中継ボックスのキャップとフタをしっかりと閉めます。
- (7) 計量皿に物を載せて、正常に計量できることを確認して下さい。