

# 容器ホルダ (AX-HOLDER-SET) 取扱説明書

## 1. 製品構成


容器ホルダは3つで1セットです。

※容器ホルダ大、中、小個別での販売もしております。


構成部品	数量
容器ホルダ 大 (AX-HOLDER-L)	1
容器ホルダ 中 (AX-HOLDER-M)	1
容器ホルダ 小 (AX-HOLDER-S)	1

## 2. 使用方法

試験管・マイクロチューブ・フラスコ・バイアル瓶等に入れた試薬や、サンプルを計量する時の容器ホルダとして使います。また、天びんの皿上に容器ホルダを置いて、容器に角度を持たせて保持し、量り取り作業をすることもできます。裏返しにして、長い試験管を安定して保持することもできます。

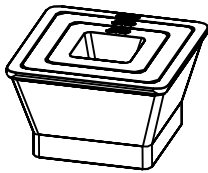


重ねた状態

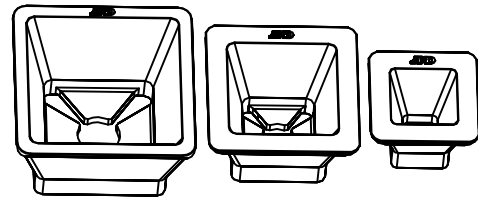


大

中


小

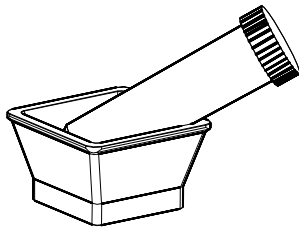

遠沈管を斜めに保持

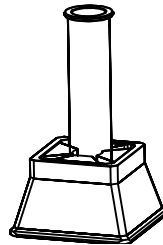

試験管立として使用

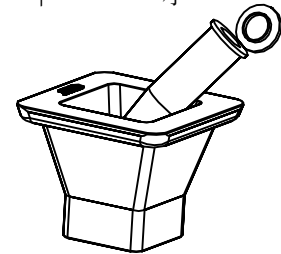

マイクロチューブ用ホルダとして利用

## 3. 仕様

質量 (大、中、小 3 個)	大 : 45.2g, 中 : 30.8g, 小 : 15.7g (組み合わせ 約 91.8g)
外形寸法 (mm)	大 : 67(W) × 67(D) × 40(H), 中 : 56(W) × 56(D) × 36(H), 小 : 40(W) × 40(D) × 32(H)
材質	シリコン (帯電防止処理済)

※容器ホルダ(大)を利用すると、200g ひょう量の分析天びんでは、約 150g までの計量ができます。

**AND** 株式会社 **エーアンドデイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14  
TEL. 03-5391-6126(代) FAX. 03-5391-6129