

## UA-611 仕様

測定方式	オシロメトリック方式
測定範囲	圧力 0~299mmHg 脈拍40~180拍/分
測定精度	圧力 $\pm 3$ mmHg以内 脈拍 読み取り数値の $\pm 5\%$ 以内
測定可能腕周	約22~32cm
外形寸法	幅96×高68×奥行130mm
本体質量	約230g(乾電池除く)
電源	単3形乾電池4個
電池寿命	約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、 室温23°C 180mmHg加圧の場合)
標準付属品	カフ、取扱説明書(保証書付)、添付文書

医療機器認証番号 225AHBZX00020000

JANコード 4981046026185


## エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。全国の主要医療機関で使用されている医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をするトップクラスのメーカーです。

(設立1977年・東証株式第一部上場)



生体情報モニタ

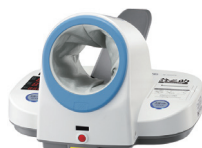

全自動血圧計

修理・商品に関するお問い合わせは  
エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)9:00~12:00/13:00~17:00



## ⚠️ 安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
- 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋 3-23-14 TEL.03-5391-2566 (代)

札幌 011-251-2753 仙台 022-211-8051 名古屋 052-726-8761  
大阪 06-7668-3907 広島 082-233-0611 福岡 092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で

**AND**  
A&D Medical

エー・アンド・デイは  
医療・測定機器の総合メーカーです。

# お手軽に測りたい方に

# スマート・ミニ 血圧計

## シンプルで測りやすい

## スマート・ミニ血圧計 UA-611



乾電池別売

## 調剤薬局でお求めください。

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

# スマート・ミニ血圧計

## UA-611

医療機器認証番号  
225AHBZX00020000



## メディカル品質

病院向け血圧計メーカーが作る、精度・品質。

### シンプル、簡単測定

カフを巻いて、スイッチを押すだけ！

### この大きさが使いやすい

コンパクトサイズ

### やさしい・便利な機能いろいろ

- 最適な圧力まで加圧する「おまかせ加圧」
- 測定値の血圧分類が見える血圧レベル表示
- 正確測定に役立つ不規則脈チェック
- からだにやさしい脱アレルギーカフ
- 最新30回分の測定データを記憶

### 脱アレルギーカフ ～体にやさしい～

金属・天然ゴム アレルギー対策、皮膚炎やジン麻疹などのアレルギー症状の原因となる、金属・天然ゴムを使用していません。

業界初

樹脂リングカフ



## おすすめ機能

### 血圧レベル表示 ～測定値の分類が一目でわかる～

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。


高血圧……………最高140・最低90以上  
正常高値血圧…最高130～139  
……………最低85～89  
正常血圧……………最高130・最低85未満  
(mmHg)

高血圧  
正常高値血圧  
正常血圧



### 不規則脈 (IHB) 検知 ～正確測定に役立つ～

脈が乱れると血圧も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知、脈のゆらぎチェックや測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。

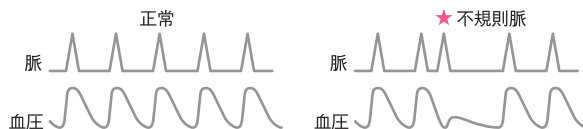

エー・アンド・デイの  
調剤薬局血圧計は  
安心

あんしん  
1

調剤薬局で買うから安心！  
頼りになる薬剤師さんが親切・相談接客

あんしん  
2

引き取りサービスで安心！  
万が一故障の場合、自宅まで血圧計を引き取り