



精度・価格が魅力の ベーシック型、検定付体重計

用途により選べる2タイプ4機種



AD-6207

目 量：100g (99.9kgまで)
200g (100~200kg)

ひょう量：200kg

使用地域指定 不要



AD-6208

目 量：50g (150kgまで)
100g (200kgまで)切替

ひょう量：200kg

使用地域指定 要



用途により、2タイプ4機

200kgまで計量、目量100g 標準型

業務用体重計

AD-6207 AD-6207A(ポール付) ¥55,000 (税込価格¥57,750)
AD-6207B(ポールなし) ¥50,000 (税込価格¥52,500)

目 量(最小表示) 100g (99.9kgまで)、200g (100~200kg)

ひょう量(最大計量) 200kg

使用地域指定 不要

精度等級
4級

取引・証明用
検定付
型式承認取得品



AD-6207B



AD-6207A

A ポール付き

表示部が高位置に有り、見やすい！

■表示部角度切替(5段階)

表示部は、見やすい角度に首振り5段階の調整が可能です。



B ポールなし

持ち運び、収納がしやすい！


■表示部方向切替

健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。



■セパレート使用

表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いての使用ができます。
ケーブル長 2.6m

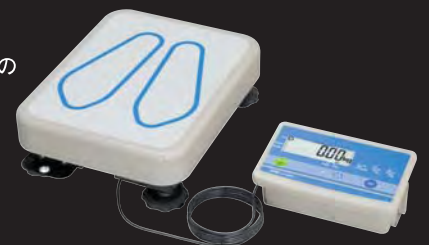

種からお選びください。

★ 検定取得費込み、ACアダプタ付で、この価格

高精度、目量50g/100g 切替タイプ

業務用体重計

AD-6208 AD-6208A(ボール付) ￥60,000(税込価格¥63,000)
AD-6208B(ボールなし) ￥55,000(税込価格¥57,750)

目量(最小表示) 50g(150kgまで)、100g(200kgまで)切替

ひょう量(最大計量) 200kg

使用地域指定要

使用地域(都道府県名)を指定してください。

精度等級
3級

取引・証明用
検定付
型式承認取得品




AD-6208B



AD-6208A

大きい文字サイズ 26mm

デジタル数字が大きく見やすい
文字高 26mmの大型表示。

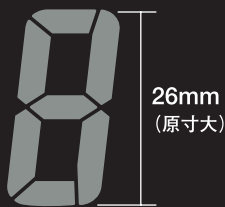

足型シート

乗る位置・方向を示し、素足で乗った
場合の冷たさを和らげます。



コードレス、2電源方式

電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、
またはACアダプタの両用型。

オートパワーオフ

約5分間、無操作の場合にオートパワーオフとなり
乾電池のムダな消費を防ぎます。

外部出力、RS-232C出力(オプション)

オプションのRC-232Cインターフェイス(FG-23)で計量データを
プリンタやコンピュータ等に、送信ができます。

風袋引き機能

着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示します。

ACアダプタ付

使用機会が多い場合には、経済的なACアダプタを
ご使用下さい。本器は、標準でACアダプタが付いています。



表示部保護カバー付

表示部の汚れやキズ、シートの磨耗を防ぎます。

型式承認取得品
カルテや診察表、診断書等に記載する際の証明に使用できる体重計です。

AD-6207

AD-6208

仕様

モデル	AD-6207	AD-6208	
ひょう量 (最大計量)	200kg	レンジ1 150kg	レンジ2 200kg
目量 (最小表示)	100g (99.9kg) 200g (100~200kg)	50g	100g
最小測定量	1kg	1kg	2kg
最大風袋引き量	99.9kg	ひょう量まで	
液晶表示	文字高さ 26mm、7セグメント		
電源	ACアダプタ (TB196) または単二形乾電池4本		
乾電池寿命	アルカリ乾電池使用時 約150時間		
計量台寸法	300×380mm		
質量	AD-6207A: 約12kg AD-6207B: 約10kg	AD-6208A: 約12kg AD-6208B: 約10kg	
標準付属品	ACアダプタ (TB196)、表示部保護カバー		

オプション

RS232Cインターフェイス	FG-23	¥10,000 (税込価格¥10,500)
プリンタ	AD-8121B	¥65,000 (税込価格¥68,250)
ACアダプタ	TB-196	¥ 3,000 (税込価格¥3,150)

使用地域区分

使用地域 (都道府県)	使用地域の表記 重力加速度の範囲
北海道	9.803~9.807m/s ²
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799~9.804m/s ²
福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、 石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796~9.801m/s ²
群馬県、埼玉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮城県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794~9.799m/s ²
鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
9:00~12:00 13:00~17:00


AN 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815


<http://www.aandd.co.jp>

Aタイプ

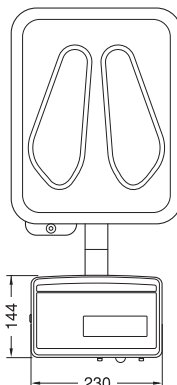


AD-6207A

AD-6208A

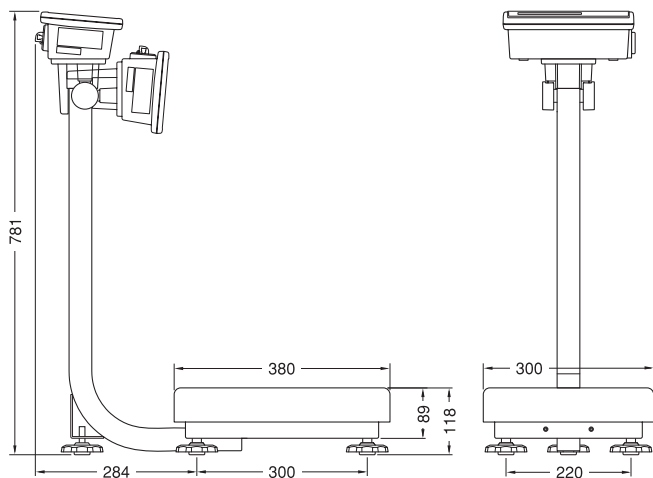


Bタイプ

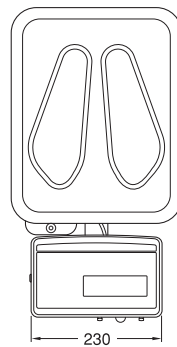

AD-6207B

AD-6208B

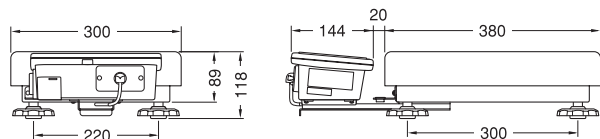

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

* AD6207/08-ADJC-03-PR3-09508