

# 見やすいダブル表示 使いやすい タッチパネル操作

測定データは、シンプルで見やすい大型LED( 蛍光 )表示  
メモリデータ、グラフはカラー液晶( 4.7インチ )で表示  
AC電源、充電池両用型

見やすい使いやすい  
生体情報モニタ

## バイタルボックス

血圧測定 TM-2571  
血圧・SpO<sub>2</sub>測定 TM-2572

医療機器承認番号 21700BZZ00279000



**AND**  
エー・アンド・デイ

# 血圧・脈拍数、SpO<sub>2</sub>をモニタリング

各種設定は、使いやすく確実なタッチパネル操作

## 血圧

患者の血圧に応じた最適な圧力まで自動加圧  
インターバル測定は、内蔵時計に同期したジヤストタイム測定  
測定間隔は、連続から120分まで12段階設定

## SpO<sub>2</sub>(TM-2572のみ)

体動・低灌流状態でも安定したモニタリング  
リアルタイムにプレシスモグラフ表示  
ネルコア製 OXIMAX を搭載

## 表示

LED(黄光)、4.7インチSTNカラー液晶のダブル表示  
インターバル測定が連続の場合のみ、最高血圧をクイック表示  
脈波レベル、脈派グラフ表示  
測定間隔・監視値・他の設定画面、メモリーデータのリスト・トレンド表示

## 設定

各種設定は、カラー液晶パネル上で、  
タッチ操作



## アラーム

最高・最低血圧、脈拍数、SpO<sub>2</sub>(TM-2572のみ)のアラーム上下限の監視値設定が可能

緊急度に応じてアラームランプは  
赤色点滅、黄色点滅、黄色点灯、  
測定値表示の点滅、アラーム音の鳴動  
SpO<sub>2</sub>の監視時にアラームが発生の  
場合、血圧測定を実行



## 新生児対応

血圧測定の設定切替により、測定対象を新生児に変更可能  
多種あるカフから腕周サイズにあったカフを選択、新生児から成人まで測定

## 拡張

通信ユニット(オプション)接続でテレメータ監視のシステムに対応  
拡張ボックス(オプション)で、  
シリアル通信、LAN接続  
などにも対応可能



## 電源

ACアダプタまたは充電電池(オプション)両用型  
充電電池駆動で、搬送時や電源のない場所でも測定可能  
フル充電で、動作時間120分(血圧10分間隔測定)



BP PR

TM-2571

¥420,000(税込価格¥441,000)



BP PR

SpO<sub>2</sub>

TM-2572






¥520,000(税込価格¥546,000)



プリンターユニット・SpO<sub>2</sub>デュラセンサはオプション(別売)

## プリンター


プリンターユニット(オプション)は、感熱式・紙幅58mmで本体に内蔵でき、測定値(脈波グラフ含む)、プレシスモグラフ、アラーム、監視値、トレンド、リストを印字します

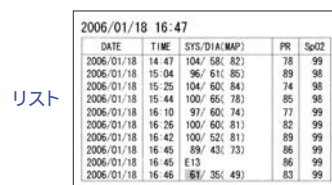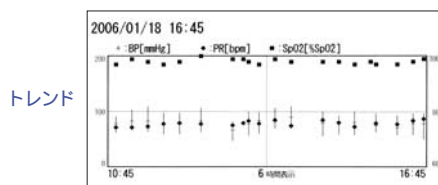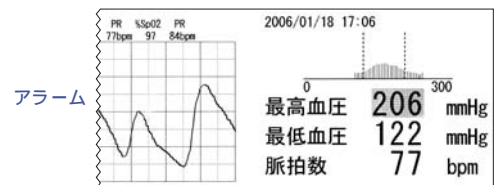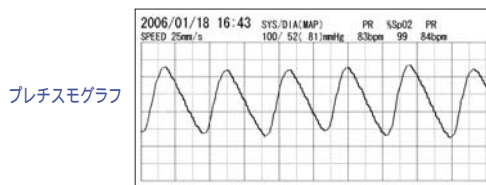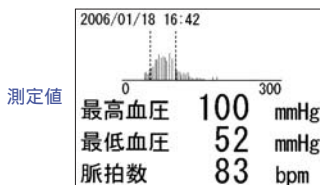

アラーム対象の測定値は、反転文字で印字。

## 基本画面

TM-2572は、プレチスモグラフ、脈波グラフ、監視値表示の3項目の内、2項目までを選び設定すると基本画面で表示します。  
 TM-2571は、監視値・脈波グラフの両面表示もしくは、各々の単独表示のいずれかを選べます。

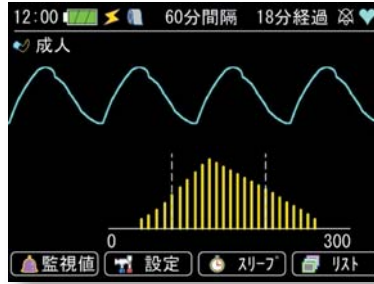

## 測定間隔設定画面

測定間隔スイッチを押すと画面上に測定間隔の設定画面が表示され、設定ができます。



## リスト・トレンド画面

メモリされた測定値のリスト・トレンドを表示します。  
 (メモリーデータは最数300件まで、画面には5件、10件表示が有り、リストをスクロールして画面表示)

12:00 60分間隔 18分経過

成人

時間	SYS/DIA (MAP)	PR	SpO2
12:00	120/ 80 ( 90) A	70	100
12:10	119/ 80 ( 90)	70	100
12:20	E11/ ( )	---	---
12:30	120/ 80 ( 90)	69	100
12:40	120/ 80 ( 90)	70	99

ホーム データ消去 10件 トレンド



## スリープ画面

測定値、波形等を画面表示しません。




## 監視値設定画面

測定項目すべての監視値(上下限)が設定できます。



## 設定画面

各設定画面へのスイッチを配置した画面で、設定したい画面のキーを押します。

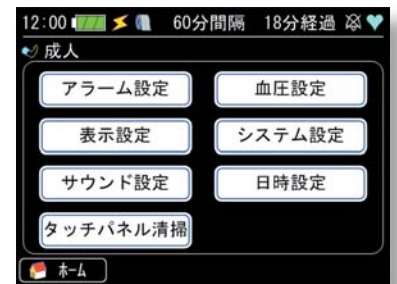

TM-2572の画面

(アラーム、血圧測定、表示、システム、サウンド、日時設定、タッチパネル清掃を選択)

## SpO<sub>2</sub>センサ(デュラセンサ、オキシバンド、オキシセンサOXIMAX ディスポ、デュラワイセンサはネルコア社製)



デュラセンサ成人用  
 AX-SPDS-100A  
 ¥75,000(税込価格¥78,750)



デュラワイセンサ  
 AX-SPD-YS  
 ¥75,000(税込価格¥78,750)



オキシバンド成人・新生児用  
 AX-SPOXI-A/N  
 ¥50,000(税込価格¥52,500)



オキシバンド小児・幼児用  
 AX-SPOXI-P/I  
 ¥50,000(税込価格¥52,500)



オキシセンサOXIMAX成人用(ディスポ)  
 AX-SPMAX-A-S(24個人)  
 ¥158,400(税込価格¥166,320)



オキシセンサOXIMAX小児用(ディスポ)  
 AX-SPMAX-P-S(24個人)  
 ¥158,400(税込価格¥166,320)



オキシセンサOXIMAX幼児用(ディスポ)  
 AX-SPMAX-I-S(24個人)  
 ¥182,000(税込価格¥191,100)



オキシセンサOXIMAX新生児・成人用(ディスポ)  
 AX-SPMAX-N-S(24個人)  
 ¥182,000(税込価格¥191,100)



オキシセンサOXIMAX鼻用(ディスポ)  
 AX-SPMAX-R-S(24個人)  
 ¥182,000(税込価格¥191,100)

付属品	TM-2571	TM-2572
本体		
アダルトカフ		
エアホース(2m)		
エアホース(1.5m)		
SpO2延長ケーブル	○	
SpO2センサパック	○	
電源コード		
取扱説明書		
添付文書・保証書		

## オプション

無線ユニット  
TM2570-20  
¥180,000  
(税込価格¥189,000)

プリンターユニット  
TM2570-07  
¥60,000  
(税込価格¥63,000)

バッテリーユニット  
TM2570-08  
¥20,000  
(税込価格¥21,000)

架台  
TM2560G-03(ガスバネ式)  
¥60,000  
(税込価格¥63,000)

ベッド取付架台  
TM2540-04A  
¥35,000  
(税込価格¥36,750)

フル充電で動作時間約120分  
(血圧10分間隔測定、プリンタ未使用)  
充電時間は約8時間でフル充電  
ニッケル水素電池(NiMH)

仕様	
血圧測定	
血圧測定方式	オシロメトリック方式
圧力検出方法	容量型圧力センサ
圧力測定範囲	0～300mmHg
圧力精度	±3mmHg
測定範囲	血圧:10～280mmHg、脈拍30～200拍/分
血圧インターバル測定	CON(連続) 1、2.5、3、5、10、15、20、30、60、90、120 *CONは連続測定を5分間継続し、その後2.5分間隔 *1分間隔測定は連続測定を12分間継続し、その後2.5分間隔

SpO2	
測定方式	2波長パルスオキシメトリ
SpO2測定範囲	40～100% SpO2
SpO2精度	±3%
脈拍数計測範囲	30～250拍/分
脈拍精度	±5%

一般	
表示方法	LED:7セグメント、LCD:4.7インチSTNカラー液晶
入力部	タッチパネル(アナログ抵抗膜方式) スイッチ:消音ボタン、測定間隔選択ボタン、血圧測定/停止ボタン
監視機能	最高血圧、最低血圧、脈拍数、SpO2(TM-2572のみ) アラーム時:測定値の点滅、アラーム音の鳴動、アラームランプの点滅
メモリデータ数	300データ
メモリ間隔	1、2、2.5、3、5、10、15、30分
表示機能	波形表示:プレシモグラフ、脈波グラフ グラフ・数値表示:監視値、リスト、トレンド
プリント部	サーマル式ラインプリンター 紙幅58mm
電源	AC100V(50/60Hz)またはニッケル水素電池
消費電力	24VA
外形寸法	159(W)×249(H)×181(D)mm
重量	約3.2Kg

## 診療報酬点数

D223 経皮的動脈酸素飽和度測定 1日につき30点

特定保守 管理医療機器

販売名: バイタルボックス TM-257

一般的名称: 多項目モニター 33586000

オプション	品名	型式	標準価格
<b>カフ(エアホースなし)</b>			
幼児用	7～12cm(適応腕周範囲)	TM9114B-1	¥ 9,900(税込価格¥10,395)
小児用	10～17cm(適応腕周範囲)	TM9116B-1	¥ 9,900(税込価格¥10,395)
スモール用	15～22cm(適応腕周範囲)	TM9113B-1	¥ 9,900(税込価格¥10,395)
アダルト用	20～31cm(適応腕周範囲)	TM9112B-1	¥ 8,000(税込価格¥8,400)
ラージ用	28～36cm(適応腕周範囲)	TM9111B-1	¥ 9,900(税込価格¥10,395)
	交換用カフ布(アダルト用)	AX-13A37452-S	¥ 5,000(税込価格¥5,250)
<b>ディスプレイ</b>			
	アダルト用(10枚入) 23～33cm	TM9159A-1	¥ 12,000(税込価格¥12,600)
	新生児用 2cm幅(10枚入) 4～5cm	TM9155	¥ 10,000(税込価格¥10,500)
	新生児用 3cm幅(10枚入) 5～7.5cm	TM9156	¥ 10,000(税込価格¥10,500)
	新生児用 4cm幅(10枚入) 7.5～10.5cm	TM9157	¥ 10,000(税込価格¥10,500)
	新生児用 5cm幅(10枚入) 8.5～13cm	TM9158	¥ 10,000(税込価格¥10,500)
<b>エアホース</b>			
	標準用1.5m	TM9131BL-150	¥ 4,000(税込価格¥4,200)
	標準用2.0m	TM9131BL-200	¥ 4,000(税込価格¥4,200)
	新生児用2.0m	TM9131UN-200	¥ 5,000(税込価格¥5,250)
	新生児用3.5m	TM9131UN-350	¥ 5,000(税込価格¥5,250)
<b>SpO2センサ</b>			
	デュラセンサ	AX-SPDS-100A	¥ 75,000(税込価格¥78,750)
	オキシバンド 成人・新生児用	AX-SPOXI-A/N	¥ 50,000(税込価格¥52,500)
	オキシバンド 小児・幼児用	AX-SPOXI-P/I	¥ 50,000(税込価格¥52,500)
	オキシセンサ OXIMAX ディスゴ 成人用(24個入)	AX-SPMAX-A-S	¥158,400(税込価格¥166,320)
	オキシセンサ OXIMAX ディスゴ 小児用(24個入)	AX-SPMAX-P-S	¥158,400(税込価格¥166,320)
	オキシセンサ OXIMAX ディスゴ 幼児用(24個入)	AX-SPMAX-I-S	¥182,000(税込価格¥191,100)
	オキシセンサ OXIMAX ディスゴ 新生児・成人用(24個入)	AX-SPMAX-N-S	¥182,000(税込価格¥191,100)
	オキシセンサ OXIMAX ディスゴ 鼻用(24個入)	AX-SPMAX-R-S	¥182,000(税込価格¥191,100)
	デュラワイゼンサ	AX-SPD-YS	¥ 75,000(税込価格¥78,750)
	SpO2延長コード(コード長3.3m)	AX-SPDOC-10	¥ 20,000(税込価格¥21,000)
<b>プリンター用紙</b>			
	プリンター用紙(5巻)	AX-PP147-S	¥ 5,000(税込価格¥5,250)

**AND** 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6121(直) FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683  
大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201  
広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
福岡営業所 TEL.092-441-6711(代) FAX.092-441-2815

製造販売業者: 株式会社エーアンド・デイ  
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL: 048-593-1434

製造業者: 研精工業株式会社 つくば工場

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは  
エー・アンド・デイ ME機器相談センター

フリーダイヤル **0120-707-188**

受付時間: 月～金曜日 9:00～12:00 13:00～17:00