

看護業務に最適!

携帯に便利な
**手のひら
サイズ**



上腕式で超軽量

血圧計本体 約**73g**

腕帯・乾電池込みで 約**260g**

経済的な超低消費電力

単3形アルカリ乾電池1本で約6,000回測定

血圧値の信頼性を高める

不規則脈 (IHB) 検知 "♡"

安心のラテックスフリーカフ



 Swan mini

エー・アンド・デイ
デジタル血圧計 **UA-704A**

¥12,000(税込価格¥12,600)




看護業務に最適

血圧値の信頼性を高める 不規則脈 (IHB) 検知

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎを監視しています。脈間隔は、血圧とのかかわりが強く、脈の揺らぎによっては血圧も変動、本来の血圧がつかめない場合があります。脈の揺らぎは、ストレス・運動不足・疲労などの生理的な要因で起こるものから、心臓病や自律神経、甲状腺の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。ほとんどの方は、毎日数回は発生しています。

※ 測定中の脈間隔の平均から±25%以上差のある脈をIHBと判定します。

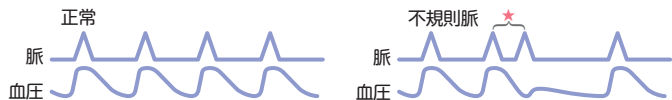

安心のラテックスフリーカフ

- ラテックスアレルギーに対応の肌に優しい素材を使用
- 血圧モニタにも使用の高耐久性カフ

ブラッダーサイズ：12×24cm
適応腕まわり：20～33cm



オプション



MEラテックスフリーカフ
TM-CF301A
標準価格¥8,000(税込価格¥8,400)
JANコード 4981046712668



ゴム球ユニット
UA-BULBASSY-JC2
標準価格¥800(税込価格¥840)
JANコード 4981046712606

UA-704A仕様

測定方式	オシロメトリック方式
表示	液晶デジタル方式
測定範囲	圧力 0～280mmHg 脈拍 40～200拍/分
精度	圧力 ±3mmHg 脈拍数 読取り数値の±5%
加圧方式	ゴム球による手動加圧方式
減圧	定降圧自動排気弁方式
排気	排気押しボタンによる手動急速排気方式
電源	単3形乾電池 1本
電池寿命	アルカリ乾電池使用時 約6,000回
本体寸法	100(W)×31(H)×51(D)mm
本体質量	約73g(電池除く)
付属品	アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、取扱説明書、添付文書
認証番号	219AHBZX00017000
商品コード	UA-704A-JC2
JANコード	4981046700900

管理医療機器

販売名：エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-704
一般的名称：手動式電子血圧計

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※ 外觀及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*UA704A-ADJC-01-PR1-09c12