

脱・水銀

環境にやさしい新・血圧計

水銀を使用していない

電子式だから・・・

水銀づまりがなく

長期間、精度が保て

メンテナンスが不用！



スワンハート血圧計

電子血圧計 UM-101

AND
A&D Medical

水銀を使用していない電子式だから

 **スワンハート** 血圧計
エーアンド・デイ 電子血圧計 UM-101

管理医療機器

標準型

¥18,000 (税込価格 ¥18,900)

医療機器承認番号 21700BZY00459000

本体カラー



ホワイト

ピンク



使いやすい

表示部傾き切替

使いやすい、見やすい角度に切替られます。
水平から垂直まで5段階切替。

垂直に
立てなくても
測れます。



落下や転倒の気使いをせずに
測定ができます。

持ちやすい 手さげ把手

本体裏面に把手部が有り
確実ににぎれ、らくに持ち
運べます。



見やすい

大型デジタル表示

大型のバー表示だから見た目
で圧力を確認できます。

水銀式と同じ
大きさ、表示

デジタル数字表示

小窓には、測定中の圧力値を
数字表示します。




便利な

ホールド機能

残しておきたい数値を
(HOLD)スイッチを押すことで
ポイント表示します。(最高5点まで)

メモしたい
ポイントを
残せます。

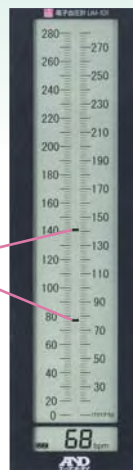

自動脈拍数表示

血圧測定時に脈拍数を
自動的に測定、測定後
表示します。



- ① 水銀ぶまりの心配なし・・・水銀がスムーズに動かない水銀ぶまりによる、血圧値誤差の心配がありません。
- ② 取り扱いが簡単・・・液洩れの心配なし。電源を入れ、すぐに測定。
- ③ メンテナンスが不用(長期間精度保持)・・・定期的なフィルター交換、洗浄等のメンテナンスの手間がありません。
- ④ 落下、転倒しづらい形、仕様・・・転倒を抑える本体重量バランス、手の係る部分はすべらないラバーを使用。
- ⑤ 環境にやさしく廃棄に困らない・・・環境への負荷が抑えられ、廃棄の手間、面倒がありません。


スタンド型

¥29,000(税込価格¥30,450)

医療機器承認番号 21700BZY00459000

移動に便利なハンドル付
安全性に優れた5本脚
ストッパー付キャスター

本体カラー

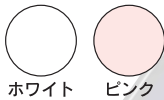

ホワイト ピンク

固定つまみで
表示部の傾き調整

ポール高さ調整
本体高103~144cm

両側にハンドル付

収納部に
カフ、ゴム球が
入れられます

長寿命

単3形アルカリ乾電池2本で
約2,000回測定可能

2,000回

カフ (エアホース付)

汚れが付きにくく洗浄しやすいナイロン製
ブラダ・エアホースはラテックスフリーで
アレルギーを防止。(天然ゴムは使用していません)


カフサイズは、S・M・Lの3種

カフサイズ	適応腕周囲
Sサイズ	16~23cm
Mサイズ	23~33cm
Lサイズ	33~45cm



ライフタイムカウンター

購入後の累計稼動時間を表示します。
電池が“切り”の状態、(HOLD)スイッチを
押し、上位桁と下位桁を交互に表示します。

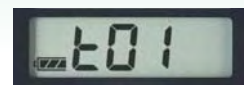

▲▼ 交互表示



この表示は、1,278時間を表しています。

スワンハート血圧計

エーアンドデイ 電子血圧計 UM-101



標準型

¥18,000 (税込価格 ¥18,900)

ホワイト UM-101A-JC1



ピンク UM-101A-JC3



スタンド型

¥29,000 (税込価格 ¥30,450)

ホワイト UM-101B-JC1



ピンク UM-101B-JC3



仕様

	標準型	スタンド型
測定方法	血圧：聴診法	脈拍：オシロメトリック法
測定範囲	圧力：0～280mmHg	脈拍：30～200回/分
測定精度	圧力：±4mmHg	脈拍：読み取り数値5%
加圧方式	ゴム球による手動加圧	
排気方式	手元排気弁による排気	
急速排気	手元排気弁による排気、電磁弁	
電源	単3形アルカリ乾電池 2本	
電池寿命	約2,000回	
使用温湿度	温度：+10℃～+40℃	湿度：85%以下
保存温湿度	温度：-20℃～+60℃	湿度：85%以下
本体サイズ	98(W)×323(D)×66(H) mm	約φ450×高さ1,030～1,440 mm
本体重量	約1,050g (乾電池含まず)	約4.5kg (乾電池含まず)
キャスター	—	φ40mm
標準付属品	カフ、モニター用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書	

オプション

製品名	製品番号	価格	バーコードNo. (JAN)
カフ Mサイズ(エアホース 60cm)	AX-UM-101-01	¥1,500 (税込価格 ¥1,575)	4981046041034
カフ Sサイズ(エアホース 60cm)	AX-UM-101-02	¥1,500 (税込価格 ¥1,575)	4981046041041
カフ Lサイズ(エアホース 60cm)	AX-UM-101-03	¥1,800 (税込価格 ¥1,890)	4981046041058
カフ Mサイズ(エアホース 1m)	AX-UM-101-04	¥1,500 (税込価格 ¥1,575)	4981046041133
カフ Sサイズ(エアホース 1m)	AX-UM-101-05	¥1,500 (税込価格 ¥1,575)	4981046041140
カフ Lサイズ(エアホース 1m)	AX-UM-101-06	¥1,800 (税込価格 ¥1,890)	4981046041157
※カフサイズ別適応腕周囲 M:23～33cm S:16～23cm L:33～45cm			
ゴム球セット(排気弁、戻弁付)	AX-UM-101-10	¥ 800 (税込価格 ¥840)	4981046041065

ME機器に関するお問い合わせは

エーアンドデイ ME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日 9:00～12:00 13:00～17:00

AND 株式会社 エーアンドデイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者：株式会社エーアンドデイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*UM101-ADJC-07-PR5-09116