


使用現場いろいろ  
新・生体情報モニタ

# バイタルセンサG

血圧・SpO<sub>2</sub>・ECG測定

医療機器承認番号 21500BZZ00682000 (標準型)  
医療機器承認番号 21600BZZ00103000 (プリンタ型)  
特定保守 管理医療機器

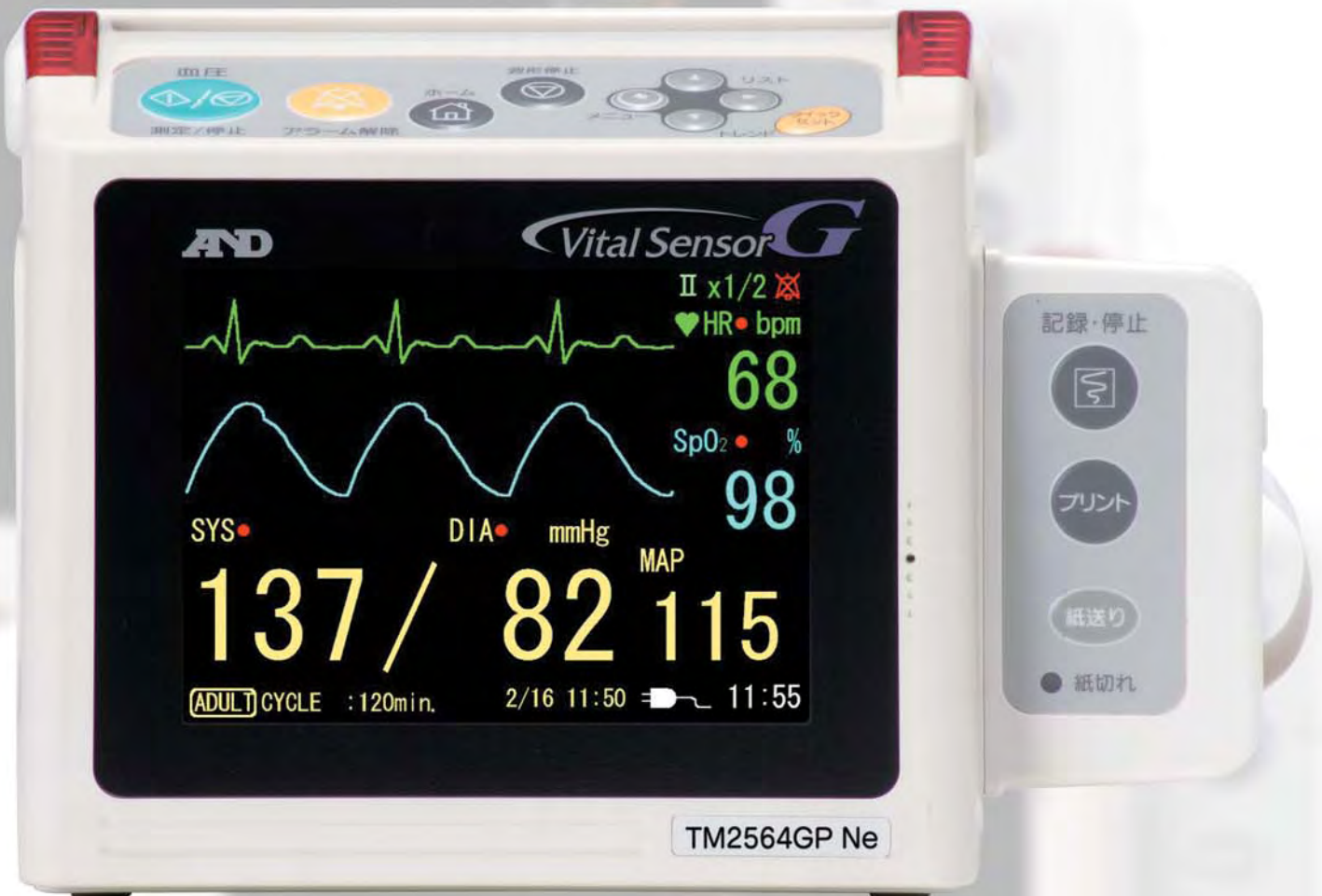

## 小型・軽量サイズに 見やすさ、機能を満載

測定値、波形が認識しやすいTFTカラー表示

ホーム画面4種から用途により最適画面が選べる

ACアダプタ、充電池両用型

**AND**  
A&D Medical

# 小型・軽量で見やすいから使用現場いろいろ

血圧・SpO<sub>2</sub>・ECG・体温などの測定値や波形を見やすいTFTカラー液晶で表示、インターバル測定やアラーム監視、メモリ機能をコンパクトに集約しました。病院内のネットワーク化による病棟管理、検査室、看護支援や外来、透析、歯科診療などで、お使いいただけます。また、拡張機能で広範な通信メディアに対応が可能です。

新生児から成人まで  
測定が可能



- 血圧**  
患者に最適な圧力まで自動加圧  
インターバル測定は、時計に同調したジャストタイム測定  
連続から、120分まで10段階の間隔設定が可能
- SpO<sub>2</sub>**  
プレチスモグラフィ表示  
ネルコア OXIMAX を搭載  
体動・低灌流状態でも安定したモニタリング
- ECG**  
波形2段表示まで可能  
誘導切替機能付
- 表示**  
インターバル測定中の最高血圧をクイック表示  
SpO<sub>2</sub>脈波バーグラフ、血圧脈波グラフを表示
- アラーム**  
測定項目の上下限設定を超えた場合、測定値・アラームランプの点滅  
アラーム音の聴動
- 拡張**  
拡張ボックス(オプション)接続で広範な通信形態に対応
- 電源**  
ACアダプタまたは充電電池(オプション)両用型  
充電電池駆動で、搬送時や電源のない場所でも測定可能  
フル充電で動作時間90分(血圧5分間隔測定)
- 体温**  
便利なワイヤレス体温測定  
体温を15秒毎に連続測定し、微弱無線で送信  
体温の連続監視、記録が可能

## 機種別仕様


機能	機種	TM-2560GNE	TM-2564GNE	TM-2560GPNE	TM-2564GPNE
血圧測定		○	○	○	○
SpO <sub>2</sub> 測定		○	○	○	○
ECG測定		—	○	—	○
監視		○	○	○	○
血圧インターバル測定		○	○	○	○
印字		—	—	○	○
標準価格(税込価格)		¥520,000(¥546,000)	¥620,000(¥651,000)	¥580,000(¥609,000)	¥680,000(¥714,000)
JANコード		4981046700221	4981046700160	4981046700207	4981046700139

※SpO<sub>2</sub>、デュラセンサ、フィンガープローブは別売


## プリンター (TM-2560GPNE/2564GPNEのみ)

紙幅58mmの感熱式プリンター、波形、リスト、グラフ、トレンドを印字します。


プリント印字

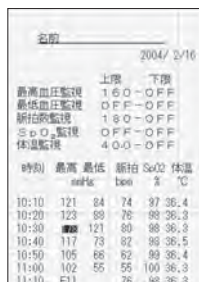


リスト

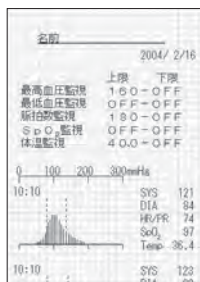

グラフ

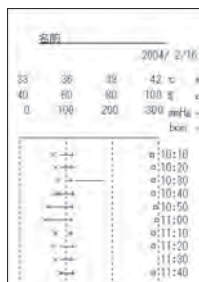

トレンド

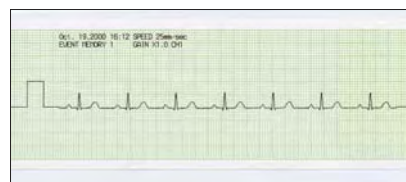

## 拡張

### 拡張ボックス

拡張ボックスの装着で、有線、無線の通信形態に対応ができます。



有線対応  
TM2560G-02  
¥80,000(税込価格¥84,000)  
JANコード 4981046700313

無線対応  
TM2560G-20  
¥50,000(税込価格¥52,500)  
※無線通信には、別途 無線ユニット (TM2140-10) が必要です。  
JANコード 4981046700276

### ワイヤレス体温測定

体温を連続測定、測定データは微弱無線で、バイタルセンサGに送信され、監視・記録ができます。



体温受信ユニット  
TM2560G-10  
¥25,000  
(税込価格¥26,250)  
JANコード 4981046700306



体温プローブ(腋下型)  
TM2560G-11  
¥15,000(税込価格¥15,750)  
JANコード 4981046700290

体温プローブ(表皮型)  
TM2560G-12  
¥15,000(税込価格¥15,750)  
JANコード 4981046700283

## ■ リスト・トレンド画面


日時、最高血圧・最低血圧、心拍数（脈拍数）、SpO<sub>2</sub>、体温（オプション）のデータメモリを表示、メモリ間隔は1～15分間隔の7段階で設定でき、400データまでメモリが可能です。

データ数 20

No.	日時	時間	SYS	DIA	HR/PR	SpO <sub>2</sub>	体温
1	04/02/15	16:00	121	84	74	97	36.4
2	04/02/15	16:15	123	88	76	98	36.3
3	04/02/15	16:30	120	82	80	98	36.3
4	04/02/15	16:45	117	73	82	98	36.5
5	04/02/15	17:00	106	66	62	99	36.4
6	04/02/15	17:15	102	55	55	100	36.3
7	04/02/15	17:30	E11		76	98	36.3
8	04/02/15	17:45	112	84	74	98	36.5
9	04/02/16	9:30	123	88	76		36.3
10	04/02/16	10:00	114	85	85	98	36.3

1/2

リスト画面

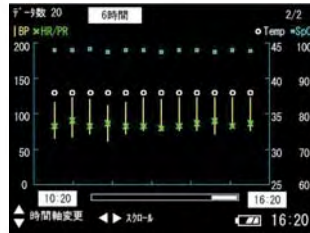

トレンド画面

## ■ クイックセットウィンド

血圧、監視値、ECGなど頻度の高い設定や波形を見ながら設定したい項目が変更できます。



## ■ 各種の設定画面


各種の項目を設定する画面で、監視値、測定間隔、測定対象、お知らせブザー、ECG、波形表示、時計、音量、体温、システムの設定ができます。



## ■ ホーム画面

ホーム画面は、オプションの体温表示(2種)を含め6種から用途により最適画面が選べます。

血圧値強調2トレース

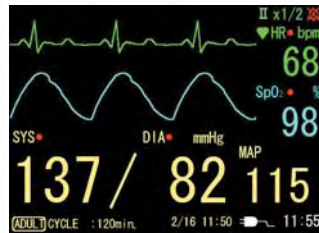

血圧値を強調した表示

波形強調2トレース



波形の表示区間を長くした表示

波形グラフ表示1トレース



脈波グラフを表示

スリープ画面




測定値、波形等を表示しないスリープ画面

体温表示1トレース



心拍数、SpO<sub>2</sub>値を強調した表示

体温表示2トレース

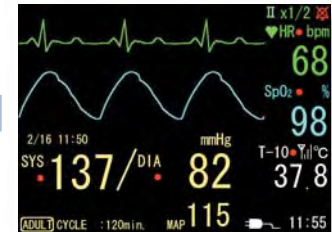

波形、各測定値をバランスよく表示

## ■ SpO<sub>2</sub>センサ (デュラセンサ、オキシセンサⅢはネルコア社製)



デュラセンサ DS-10A  
AX-SPDS-100A  
¥75,000 (税込価格¥78,750)  
JANコード 4981046710619



オキシセンサⅢ成人指先用 D-25  
AX-SPMAX-A-S (24個入)  
¥158,400 (税込価格¥166,320)  
JANコード 4981046711272



オキシセンサⅢ小児指先用 D-20  
AX-SPMAX-P-S (24個入)  
¥158,400 (税込価格¥166,320)  
JANコード 4981046711241



オキシセンサⅢ幼児用 I-20  
AX-SPMAX-I-S (24個入)  
¥182,000 (税込価格¥191,100)  
JANコード 4981046711265



オキシセンサⅢ新生児/成人指先用 N-25  
AX-SPMAX-N-S (24個入)  
¥182,000 (税込価格¥191,100)  
JANコード 4981046711258



オキシセンサⅢ鼻先用 R-15  
AX-SPMAX-R-S (24個入)  
¥182,000 (税込価格¥191,100)  
JANコード 4981046711234

## ■ オプション

### 架台

TM-ST100  
¥60,000 (税込価格¥63,000)  
JANコード 4981046711586



### ボール取付金具

TM2560G-04  
¥18,000 (税込価格¥18,900)  
JANコード 4981046711685



### ボール取付カゴ

TM2550-05  
¥12,000 (税込価格¥12,600)  
JANコード 4981046711692



付属品

	TM-2560GNE	TM-2564GNE	TM-2560GPNE	TM-2564GPNE
本体	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○
アダルトカフ(2mホース付)	○	○	○	○
1.5mホース	○	○	○	○
SpO2延長ケーブル	○	○	○	○
ECG中継ケーブル	—	○	—	○
ECGケーブル	—	○	—	○
ACアダプタ	○	○	○	○
ACケーブル	○	○	○	○
プリンタ用紙 白紙タイプ(5巻)	—	—	○	—
プリンタ用紙 方眼タイプ(2巻)	—	—	—	○



電池パック AX-HHR-21HL24G1  
フル充電で動作時間90分(血圧5分間隔測定)  
JANコード 4981046710701

仕様	バイタルセンサG	バイタルセンサGP (プリンタ付)
<b>血圧測定</b>		
血圧測定方式	オシロメトリック方式	
圧力検出方式	半導体式圧力センサー	
圧力測定範囲	0~300mmHg	
圧力精度	±4mmHg	
血圧測定範囲	血圧:10~280mmHg(目量1mmHg) 脈拍:30~200拍/分	
血圧インターバル測定	COM、2.5、3、5、10、15、20、30、60、90、120分 ※COMは連続測定を5分間継続し、その後5分間隔	
<b>ECG測定</b>		
誘導	3電極法	
周波数特性	時定数:0.5秒選択時 0.3Hz~60Hz 時定数:3.2秒選択時 0.05Hz~200Hz	
ハム除去	50/60Hz	
測定範囲	20~300拍/分	
<b>SpO2</b>		
測定方式	2波長パルスオキシメトリ	
測定範囲	40~100%	
脈拍数計測範囲	30~250拍/分	
<b>一般</b>		
表示方法	バックライト付、TFTカラー液晶ディスプレイ(5インチサイズ)	
電源	ACアダプタ、またはオプション電池パック(ニッケル水素)	
消費電力	60VA	
電源保護形式	電池動作時:内部電源機器 ACアダプタ動作時:クラスI	
本体外形寸法	160(W)×143(H)×138(D)mm	205(W)×143(H)×138(D)mm
質量	約1.2kg(オプション電池含まず)	約1.4kg(オプション電池含まず)
監視機能	最高血圧、最低血圧、心拍数(脈拍数)、SpO2	
メモリデータ数	400データ	
メモリ間隔	1、2、2.5、3、5、10、15分	
表示機能	波形表示:ECG波形、プレシスモグラフ トレース数:最大2トレース	
プリンタ部	サーマル式ラインプリンタ 紙幅58mm	
印字機能	波形印字: ECG波形(16秒間) リスト・グラフ・トレンド印字: 最高血圧、最低血圧、 心拍数(脈拍数)、SpO2	

**診療報酬点数** D220 呼吸心拍監視 1時間につき50点\*  
D223 経度的動脈血酸素飽和度測定 1日つき30点  
D223 終夜経度的動脈血酸素飽和度測定 1連つき100点  
B004-6 歯科総合医療管理料 月140点  
\*心電曲線かつ心拍数を観察した場合

特定保守 管理医療機器  
販売名:バイタルセンサ TM-256  
一般の名称:多項目モニタ 33586002

オプション	品名	型式	標準価格(税込価格)
電池パック		AX-HHR-21HL24G1	¥8,000(¥8,400)
ECG中継ケーブル(ケーブル長 1m)		AX-KO1839	¥18,000(¥18,900)
ECG中継ケーブル(ケーブル長 3m)		AX-KO1839-3000	¥20,000(¥21,000)
ECGケーブル		AX-KO1924	¥15,000(¥15,750)
ECG電極(150枚入)		AX-10502P30-S	¥25,000(¥26,250)
ECG電極 スリーエム 長さ43mm(50枚入)		AX-ES2223	¥6,000(¥6,300)
ECG電極 スリーエム 長さ32mm(50枚入)		AX-ES2225	¥6,000(¥6,300)
ACアダプタ		AX-TB223	¥19,000(¥19,950)
ACアダプタケーブル(TB223用)		AX-KO1108	¥1,000(¥1,050)
<b>カフ(エアホースなし)</b>			
小児用	10~17cm(適応腕周範囲)	TM9116B-1	¥9,900(¥10,395)
スモール用	15~22cm(適応腕周範囲)	TM9113B-1	¥9,900(¥10,395)
アダルト用	20~31cm(適応腕周範囲)	TM9112B-1	¥8,000(¥8,400)
ラージ用	28~36cm(適応腕周範囲)	TM9111B-1	¥9,900(¥10,395)
交換用カフ布(アダルト用)		AX-13A37452-S	¥5,000(¥5,250)
<b>ディスプレイ</b>			
アダルト用(10枚入)23~33cm		TM9159A-1	¥12,000(¥12,600)
新生児用2cm幅(10枚入)4~5cm		TM9155	¥10,000(¥10,500)
新生児用3cm幅(10枚入)5~7.5cm		TM9156	¥10,000(¥10,500)
新生児用4cm幅(10枚入)7.5~10.5cm		TM9157	¥10,000(¥10,500)
新生児用5cm幅(10枚入)8.5~13cm		TM9158	¥10,000(¥10,500)
<b>エアホース</b>			
標準用	1.5m	TM9131BL-150	¥4,000(¥4,200)
標準用	2.0m	TM9131BL-200	¥4,000(¥4,200)
新生児用	2.0m	TM9131UN-200	¥5,000(¥5,250)
新生児用	3.5m	TM9131UN-350	¥5,000(¥5,250)
<b>SpO2センサ</b>			
デュラセンサ DS-100A		AX-SPDS-100A	¥75,000(¥78,750)
オキシセンサⅢ 成人指先用 D-25(24個入)		AX-SPMAX-A-S	¥158,400(¥166,320)
オキシセンサⅢ 小児指先用 D-20(24個入)		AX-SPMAX-P-S	¥158,400(¥166,320)
オキシセンサⅢ 幼児用 I-20(24個入)		AX-SPMAX-I-S	¥182,000(¥191,100)
オキシセンサⅢ 新生児/成人指先用 N-25(24個入)		AX-SPMAX-N-S	¥182,000(¥191,100)
オキシセンサⅢ 鼻先用 R-15(24個入)		AX-SPMAX-R-S	¥182,000(¥191,100)
SpO2延長コード(コード長1.2m)		AX-SPEC-4	¥12,000(¥12,600)
SpO2延長コード(コード長2.4m)		AX-SPEC-8	¥15,000(¥15,750)
<b>プリンター用紙</b>			
方眼タイプ(5巻)		AX-PP157-S	¥3,000(¥3,150)
白紙タイプ(5巻)		AX-PP132-S	¥3,000(¥3,150)

ME機器に関するお問い合わせは  
エー・アンド・ティ ME機器相談センター  
**0120-707-188**  
受付時間:月~金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00

**AND** 株式会社 **エー・アンド・ティ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129  
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683  
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815  
製造販売業者:株式会社エー・アンド・ティ  
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434  
製造業者:研精工業株式会社 つくば工場

<http://www.aandd.co.jp>

\*取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。\*外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。  
\*バイタルセンサGPNE-ADJC-09-PR9-09808