

Technology You Can Trust

A&D
A&D Medical

デジタル スケールベッド

WAKシリーズ

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

ベッドにはかりをプラス、寝たままで安全に体重を測定
変化量を確実に監視



透析患者や寝たきり患者の体重の変化量をリアルタイムで測定、
介助者に負担をかけず、確実に体重監視ができる検定付体重計です。

- 体重変化量、現在体重、治療前体重、アラーム設定が一目で確認できる同時表示
- 外部出力端子 (RS-232C) を標準装備
- 手元リモコン操作で背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さ調整※ ※3モーター電動ベッドのみ



デジタル スケールベッド

WAKシリーズ

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

マットレス、折りたたみ式サイドガードは別売

機種別機能一覧表

型名	モータ	ボード種類	G ベッド幅	A 全幅(サイドガード受けが下記の場合)			B ボード幅	C 全高	D 全長	寝台 (ベッド)
				差込式	格納式	折りたたみ式				
				WAK-810-N	3 モータ	樹脂				
WAK-810-K	木製									
WAK-810-K2	樹脂									
WAK-710-N	2 モータ	樹脂	672	794	—	800	828~1101	2222	440	
WAK-710-K		木製								
WAK-710-K2		樹脂								
WAK2-810-N	2 モータ	樹脂	760	894	888	800	853	2222	440	
WAK2-810-K		木製								
WAK2-810-K2		樹脂								
WAK2-710-N	2 モータ	樹脂	672	794	—	800	853	2222	440	
WAK2-710-K		木製								
WAK2-710-K2		樹脂								


※ ボードの種類：
樹脂ボード



木製ボード・高



木製ボード・低

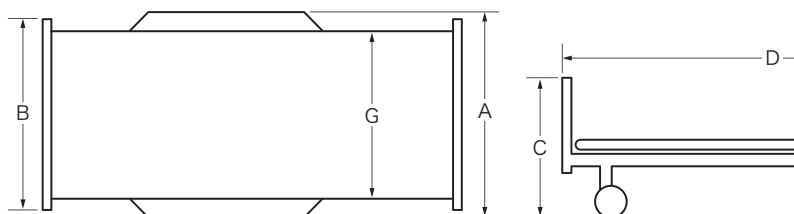

表示部



見やすい表示

治療前体重、現在体重、体重変化量、アラーム設定が一目で確認できます。LEDは識別しやすく2色で色分け表示します。

アラーム機能

体重変化量が設定値を越えた場合、ブザー音と体重変化量の表示点滅でお知らせします。(消音スイッチ付)

一時停止機能


ベッド上の毛布や衣類等を載せたり降ろしたりする際、“一時停止”スイッチを押すことで変化量を自動的に調整し、測定に影響を与えません。

出力端子 (RS-232C) を標準装備

測定データの集計、管理等のシステム化に有効なRS-232C準拠出力を持っています。

4つの重量センサで正確測定

ベッドの四隅に重量センサを使用することで、乗る位置にかかわらず、バラツキがなく、正確測定を実現しています。

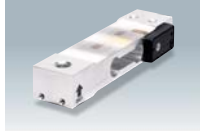

オプション

キャスター集中ロック機能付

(3モーター電動ベッドのみ)

キャスターは、ワンタッチレバーにより、4輪をワンタッチでロックすることができます。




ベッド機構部

3モーター電動ベッド WAKシリーズ


2モーター電動ベッド WAK2シリーズ

手元のリモコン操作で、背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さの調節が可能です。


背上げ

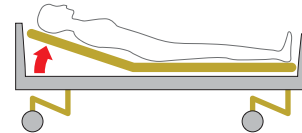


脚上げ

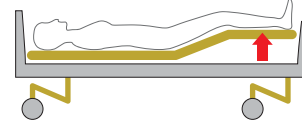

膝上げ

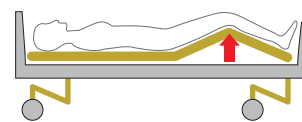

ベッド上下 (3モーター電動ベッドのみ)

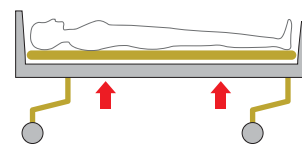

リナック社製モーター

日常生活防水機能を備えた低振動・低騒音のアクチュエーターです。




手元リモコン

わかりやすい表示のスイッチ。

長さ単位: mm / 質量: kg

E	F	H	I	質量	標準価格(税込価格)	商品コード	JANコード
脚部高さ (部~床面)	足元側高さ (ボード~床面)	背上げ角度	脚上げ角度				
710	828~1101	0°~78°	0°~45°	149.1	¥1,550,000(¥1,627,500)	UFT-WAK-810-N	4981046701075
	812~1085			148.6	¥1,450,000(¥1,522,500)	UFT-WAK-810-K	4981046701112
	612~885			151.1	¥1,500,000(¥1,575,000)	UFT-WAK-810-K2	4981046701167
	828~1101			150.6	¥1,600,000(¥1,680,000)	UFT-WAK-710-N	4981046701174
	812~1085			128.9	¥1,500,000(¥1,575,000)	UFT-WAK-710-K	4981046701181
	612~885			128.4	¥1,550,000(¥1,627,500)	UFT-WAK-710-K2	4981046701198
470	853	0°~78°	0°~45°	128.9	¥1,450,000(¥1,522,500)	UFT-WAK2-810-N	4981046701204
	837			128.4	¥1,350,000(¥1,417,500)	UFT-WAK2-810-K	4981046701211
	637			130.9	¥1,400,000(¥1,470,000)	UFT-WAK2-810-K2	4981046701228
	853			130.4	¥1,500,000(¥1,575,000)	UFT-WAK2-710-N	4981046701235
	837			130.4	¥1,400,000(¥1,470,000)	UFT-WAK2-710-K	4981046701242
	637			130.4	¥1,450,000(¥1,522,500)	UFT-WAK2-710-K2	4981046701259

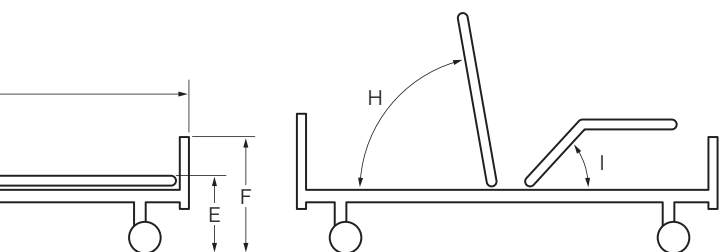

デジタル スケールベッド WAKシリーズ・主な仕様


測定範囲	体重変化量	-9.99 ~ +9.99kg(最小表示10g)
	透析前体重	2.0 ~ +150.0kg(最小表示100g)
	現在体重	2.0 ~ +150.0kg(最小表示100g)
アラーム	設定範囲	OFF及び0.01 ~ 9.99kg(最小表示10g)
	出力	LED表示点滅及びブザー音
電源		AC100V、消費電力100W(最大)

オプション

キャスター集中ロック
(工場オプション) TCR-010
¥100,000(税込価格¥105,000)
商品コード UFT-TCR-010
JANコード 4981046713108



格納式サイドガードホルダー 5×2
(工場オプション) SGF-050
¥30,000(税込価格¥31,500)
商品コード UFT-SGF-050
JANコード 4981046713115

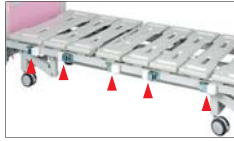

マットレス
UTM-80190
¥48,000(税込価格¥50,400)
商品コード UFT-UTM-80190
JANコード 4981046712804




低反発マットレス
UTM-80190T
¥75,000(税込価格¥78,750)
商品コード UFT-UTM-80190T
JANコード 4981046713290



防水マットレス
UTM-80190B
¥70,000(税込価格¥73,500)
商品コード UFT-UTM-80190B
JANコード 4981046713283



防水低反発マットレス
UTM-80190BT
¥95,000(税込価格¥99,750)
商品コード UFT-UTM-80190BT
JANコード 4981046713306

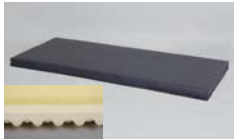

サイドガードAタイプ 1本
SG-010
¥12,000(税込価格¥12,600)
商品コード UFT-SG-010
JANコード 4981046712286



サイドガードBタイプ(ロング) 1本
SGL-924
¥14,000(税込価格¥14,700)
商品コード UFT-SGL-924
JANコード 4981046713139



サイドガードBタイプ(ショート) 1本
SGL-786
¥12,000(税込価格¥12,600)
商品コード UFT-SGL-786
JANコード 4981046712316



サイドガードCタイプ(ロング) 1本
SGH-924
¥15,000(税込価格¥15,750)
商品コード UFT-SGH-924
JANコード 4981046713146



サイドガードCタイプ(ショート) 1本
SGH-786
¥13,000(税込価格¥13,650)
商品コード UFT-SGH-786
JANコード 4981046713153



折りたたみ式サイドガード 2台1組
SGM-232J
¥90,000(税込価格¥94,500)
商品コード UFT-SGM-232J
JANコード 4981046712811



油圧式オーバーテーブル
PB2-445120
¥90,000(税込価格¥94,500)
商品コード UFT-PB2-445120
JANコード 4981046713313



手動式サイドテーブル
PA-3080
¥35,000(税込価格¥36,750)
商品コード UFT-PA-3080
JANコード 4981046713320



油圧式サイドテーブル
PB-4090
¥60,000(税込価格¥63,000)
商品コード UFT-PB-4090
JANコード 4981046713337



固定式記録台(ベッド装着用)
MKS-3080
¥40,000(税込価格¥42,000)
商品コード UFT-MKS-3080
JANコード 4981046713191



血圧計取付金具(Aタイプ)
ADA-010
¥10,000(税込価格¥10,500)
商品コード UFT-ADA-010
JANコード 4981046713344



透析ベッド用シーツ
C-1130-L
¥8,800(税込価格¥9,240)
商品コード UFT-C-1130-L
JANコード 4981046713351



ステッキホルダー
SH-003138
¥2,000(税込価格¥2,100)
商品コード UFT-SH-003138
JANコード 4981046713375



使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803~9.807m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799~9.804m/s ²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796~9.801m/s ²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794~9.799m/s ²
⑤	鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造元
株式会社 タチエスパーツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-3-1

販売元
株式会社 エーアンド・デイ
本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■ 大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00