

検定付

デジタル スケールベッド

WAK-800-N/WAK-800-N-R

ベッドにはかりをプラス、寝たままで安全に体重を測定
変化量を確実に監視



AND
エーアンド・デイ

透析患者や寝たきり患者の体重の変化量をリアルタイムで測定、介助者に負担をかけず確実に体重監視ができる検定付体重計です。

- 体重変化量、現在体重、治療前体重、アラーム設定が一目で確認できる同時表示
- 外部出力端子 (RS-232C) を標準装備
- 手元リモコン操作で背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さ調整
- WAK-800-N-Rはキャスターの集中ロック機能付

デジタル スケールベッド

WAK-800-N ¥1,500,000 (税込価格¥1,575,000)

WAK-800-N-R ¥1,600,000 (税込価格¥1,680,000)

検定付







マットレス、折りたたみ式サイドガードは別売

ベッド機構部

3モーター電動ベッド

手元のリモコン操作で、背上げ・脚上げ・膝上げ、ベッド本体高さの調節が可能です。

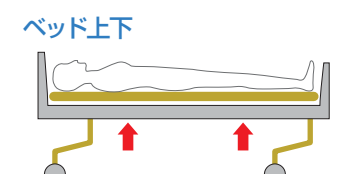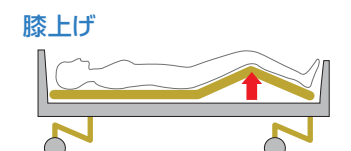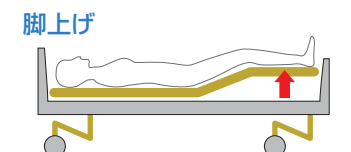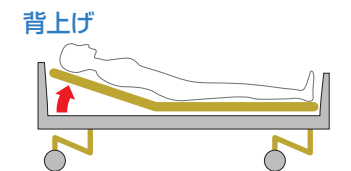

アスモ社製モーター
日常生活防水機能を備えた低振動・低騒音のアクチュエーターです。



手元リモコン
わかりやすい表示のスイッチ。

表示部



見やすい表示

治療前体重、現在体重、体重変化量、アラーム設定が一目で確認できます。LEDは識別しやすく2色で色分け表示します。

アラーム機能

体重変化量が設定値を越えた場合、ブザー音と体重変化量の表示点滅でお知らせします。(消音スイッチ付)

一時停止機能

ベッド上の毛布や衣類等を載せたり降ろしたりする際、“一時停止”スイッチを押すことで変化量を自動的に調整し、測定に影響を与えません。

データバックアップ機能

停電時や誤って電源プラグを抜いてしまった場合でも、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されます。電源復帰後、継続して測定を再開できます。

出力端子 (RS-232C) を標準装備

測定データの集計、管理等のシステム化に有効なRS-232C準拠出力を持っています。

4つの重量センサで正確測定

ベッドの四隅に重量センサを使用することで、乗る位置にかかわらず、バラツキがなく、正確測定を実現しています。





キャスター集中ロック機能付

キャスターは、ワンタッチレバーにより、4輪をワンタッチでロックすることができます。



デジタル スケールベッド WAK-800-N/WAK-800-N-R

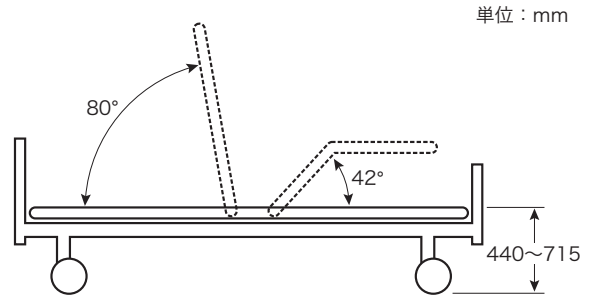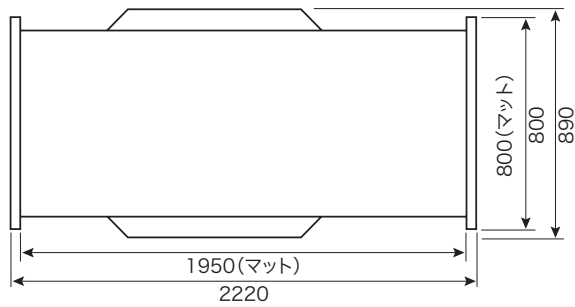

デジタル スケールベッド WAK-800-N/WAK-800-N-R・主な仕様

測定範囲	現在体重値・治療前体重値：-20.0~+151.0kg(最小表示100g) 体重変化量：-9.9~+9.9kg(最小表示100g)
精度	現在体重値・治療前体重値：±100g 体重変化量：±100g
アラーム測定範囲	OFF、±0.1~±9.9kg
アラーム	LED表示点滅およびブザー音
電源	AC100V、消費電力100W(最大)
寸法	890(W)×2,220(L)×550~810(H)mm
質量	110kg(本体のみ)

オプション

マットレス
UTM-80193
¥45,000 (税込価格¥47,250)



防水マットレス
UTM-80193B
¥70,000 (税込価格¥73,500)

サイドガードAタイプ
SG-010
¥12,000 (税込価格¥12,600)



サイドガードBタイプ ショート
SGL-786
¥12,000 (税込価格¥12,600)




サイドガードBタイプ(介護バー)
SGL-030
¥35,000 (税込価格¥36,750)



折りたたみ式サイドガード
SGM-210
¥58,000 (税込価格¥60,900)



折りたたみ式サイドガード
SGM-232
¥46,000 (税込価格¥48,300)

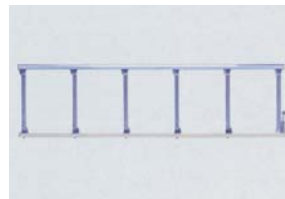

手動式オーバーテーブル
PA2-3690
¥70,000 (税込価格¥73,500)



製造元
株式会社 タチエスパーツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町1-3-1

販売元

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
- 大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター



フリーダイヤル **0120-707-188**

受付時間：月～金曜日 9:00～12:00 13:00～17:00

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。