

A&Dは、新発売の電動マイクロピペット「MPBシリーズ」特別価格キャンペーンと電動マイクロピペット用ガラスチップのプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

株式会社エー・アンド・デイ（本社：東京都豊島区、代表取締役執行役員社長：森島 泰信）は、2018年12月6日に新発売した8chマルチチャンネル電動マイクロピペット「MPBシリーズ」の特別価格キャンペーンと、既発売の電動マイクロピペット「MPAシリーズ」用のガラスチップのプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

【1. MPBシリーズの特別価格キャンペーンの概要】

- 特別価格〔標準価格から29%OFF〕
標準価格120,000円（税抜）のところを、特別価格85,200円（税抜）で販売いたします。
- キャンペーン期間
2018年12月6日（木）～2019年3月20日（水）
- MPBシリーズの主な特長
 - ◆ 高精度な分注が可能
 - ・ 操作するスタッフ個人による分注量のばらつきを減少させることができます。
 - ◆ 多彩な分注モードと便利な機能
 - ・ 連続分注モード（MDモード）
マイクロプレート等への分注作業に適した動作。1回吸引して複数回に分けて吐出。
 - ・ 混合モード（MIXモード）
種類の異なる液体を均一に混合する際に便利。吸引・吐出を自動で繰り返し実施。
 - ・ リバース動作搭載
チップ内に残りやすい液体の分注に最適。
 - ・ プレディスペンス機能
バックラッシュによる誤差をキャンセル〔特許出願中〕。
 - ◆ 操作時の「疲れにくさ」を徹底的に追求
 - ・ 連続作業時の疲労感を低減するように、本体のグリップ部を握りやすい形状にしました。
 - ・ 親指ではなく、人差し指で吸引・吐出操作をすることで疲労を緩和します。

仕様		MPB-200-8			MPB-1200-8		
容量範囲(最小可変容量)		3.0~200μ L(0.1μ L)			15~1200μ L(1μ L)		
性能	容量	10μ L	100μ L	200μ L	100μ L	600μ L	1200μ L
	正確さ(±)	5.0%	2.4%	1.2%	5.0%	2.0%	1.0%
	再現性(CV値)	2.0%	0.6%	0.3%	1.2%	0.6%	0.3%
最大分注回数(連続分注)		3μ L×66回			15μ L×80回		
プログラムメモリ		9種類設定可能					
吸引・吐出スピード		5段階調整(出荷時設定は3)					
最大分注回数(フル充電時)		約800回 ※注					
オートクレープ処理		不可					
全長(本体)		約290mm					
本体質量(電池含む)		約290g			約280g		
標準価格(税抜)		¥120,000					

※注: 標準モード、吸引・吐出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合



200 μ L
MPB-200-8



1200 μ L
MPB-1200-8

■ 8chマルチチャンネル電動マイクロピペット「MPBシリーズ」

<https://www.aandd.co.jp/adhome/products/analytical/mpb.html>

【2. MPAシリーズ用ガラスチップ プレゼントキャンペーンの概要】

● プレゼント内容

「MPAシリーズ+ガラスチップ」をセットでご購入いただいた場合に、ガラスチップをさらにもう1台プレゼントいたします。

電動ピペットMPAシリーズ




MPA-200

MPA-1200

MPA-10000

ガラスチップAX-GLシリーズ

MPA-200/ MPA-1200 用
AX-GL-200/1200

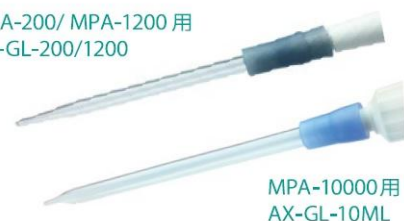

MPA-10000 用
AX-GL-10ML

【梱包内容】ガラスチップ10本 / 適合アダプタ2個

型式	MPA200GS	MPA1200GS	MPA10000GS
セット内容	MPA200+AX-GL-200/1200	MPA1200+AX-GL-200/1200	MPA10000+AX-GL-10ML
最大容量	200 μ L	1200 μ L	10mL
セット価格(税抜)	¥41,500	¥41,500	¥42,000

● キャンペーン期間

2018年12月6日（木）～2019年3月20日（水）

● 応募方法

「MPAシリーズ+ガラスチップ」ご購入後に、
A & Dのホームページ⇒サポート⇒ユーザ登録⇒電動マイクロピペットのユーザ登録で
ユーザ登録とともに、ご意見・ご感想の欄に下記の必要事項を入力していただきます。

https://www.aandd-ps.com/inquiry/sup-pipette_model

<必要事項>

① 「ガラスチッププレゼント応募」

② 購入された代理店名

③ お送り先

■ 電動マイクロピペット「MPAシリーズ」

<http://www.aandd.co.jp/adhome/products/analytical/mpa.html>

◆ 電動マイクロピペット本体 仕様

型式	MPA-200		MPA-1200		MPA-10000			
容量範囲	10~200 μ L		100~1200 μ L		0.1~10.0mL			
性能	容量	10 μ L	200 μ L	100 μ L	1200 μ L	1.0mL	5.0mL	10.0mL
	正確さ	\pm 2.5%	\pm 0.6%	\pm 2.5%	\pm 0.5%	\pm 2.5%	\pm 1.0%	\pm 0.5%
	再現性 (CV)	1.0%	0.15%	0.6%	0.15%	0.6%	0.15%	0.15%
最小可変容量	1 μ L				0.1mL			
プログラムメモリ	9種類							
分注スピード	5段階調整							
最大分注回数(フル充電にて)	約1,800回(標準モード、吸引・吐出スピード最速設定にて)							
全長	約280mm							
本体質量(バッテリーを含む)	約160g		約170g		約180g			
標準価格(税抜)	¥38,000							

◆ ガラスチップ 仕様

型式	AX-GL-200/1200		AX-GL-10ML	
適合ピペット	MPA-200 / MPA-1200		MPA-10000	
外形寸法	ガラスチップ	全長112mm / 胴外径 Φ 7mm		全長168mm / 胴外径 Φ 13mm
	接続アダプタ	全長30mm		全長36mm
材質	ガラスチップ	ホウケイ酸ガラス-1 (JIS R 3503 JR-1)		
	接続アダプタ	シリコンゴム(グレー)		シリコンゴム(ブルー)
セット内容	200 μ L / 1200 μ L共通			10mL用
	ガラスチップ10本 / 接続アダプタ2個		ガラスチップ10本 / 接続アダプタ2個	
標準価格(税抜)	¥3,500			¥4,000

会社概要

会社名 : 株式会社エー・アンド・デイ
 本店所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
 代表者 : 代表取締役執行役員社長 森島 泰信
 設立 : 1977年5月
 資本金 : 6,388百万円
 市場情報 : 東京1部 7745
 事業内容 : 電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、その他電子応用機器の研究開発・製造・販売

画像URL

https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2018/1207_mpa_mpb/mpb-200-8.jpg
https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2018/1207_mpa_mpb/ax-gl.jpg

<本件に関するお問い合わせ先>

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

TEL : 03-5391-6126 計測・計量事業推進部 西塚 昌弘、山崎 哲夫

(取材・問い合わせ専用です。広告営業はお控えください)

<https://www.aandd.co.jp>