

計量結果の保管に便利



ラベルプリンタ AD-8128A



計量結果をラベルシールに印字

台紙が自動的にはがれる「剥離ユニット」標準付属

印字パターンのテンプレート(8パターン)インストール済 ※

※ プリンタをPCに接続し、専用ソフトから設定(CD-ROM付属)

¥150,000 (税抜)



印字方式	感熱式
電源	AC100V(ACアダプタ付属)
剥離ユニット	標準付属
通信インターフェース	RS-232C
標準ラベル紙	AX-PP182-4060-S(3巻セット / 別売) / 40mm×60mm(印字行数により縦向き・横向きが変更)
UFC機能	対応
印字可能項目	はかりからの出力内容を印字(ダンププリント) 例: WT,+00001.23 g
付属ソフト	Printer Setting Tool (印字設定)※1 / P-touch Editor(レイアウト設定)※2 / P-touch Transfer Manager(レイアウト転送) ※2
付属品	CD-ROM / AC アダプタ / 電源コード / USB ケーブル / シリアルケーブル変換アダプタ 取扱説明書 / クイックリファレンスガイド / 安全にお使いいただくために(冊子)
標準価格(税抜)	¥150,000
JANコード	4981046160285
注文コード	AD8128A

◆ 個数計FC-iのバーコード印字はできません


- ※1 各種設定を変更する場合、専用ソフトをインストールしてあるPCに接続する必要があります。印字フォーマットが8種類インストールされています。1段(計量値のみ)、2段(IDと計量値)、4段(ID、単重、計量値、個数)など。出荷時設定では、1段(計量値のみ)の出力となっており、これを違うフォーマットに変更する場合、PCと接続してソフト上で変更します。
- ※2 AD-8128Aとしての標準的な使用(計量結果を標準テンプレートに印字)では、これらのソフトを使用しません。印字するフォーマットを自作する等の場合にこれらのソフトを使用します。

印字例


電子天びん(GX-A)

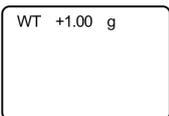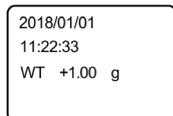



デジタル台はかり(HW-C)

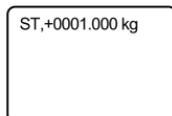

個数計(HC-i)

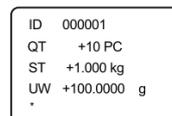

個数計(FC-i)

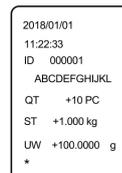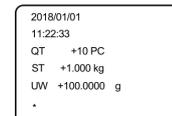

別売品

接続ケーブル(D-Sub9P用 2m)	AX-K02466-200	¥5,000
接続ケーブル(D-Sub25P用 2m)	AX-K01710-200	¥9,000
接続ケーブル(Din用 2m)	AX-K01786-200	¥9,000
接続ケーブル(パラ線用 3m)	AX-K03285-320	¥13,000
プリンタ用紙(40×60mm 3巻セット)	AX-PP182-4060-S ※	¥13,000

※ラベルシール数1126枚(1巻)



AX-PP182-4060-S

Discover Precision



本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

⚠ 安全上のご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2019年3月現在のものです。
*AD8128A ADJT-00-AD2-193000