



※A&D WeiV®はA&D Weigh Viewの略号で、電波の“波”の意味も含んでいます。

A&D WeiV®(エー・アンド・デイウェイブ)

A&D製の計量機器(天びん / はかり)とスマートフォン・タブレットとの無線接続(Bluetooth®通信)を確立し計量データの受信、コマンド送信を可能にするアプリです

スマートフォンやタブレットに簡単に接続が可能
防塵・防水の天びんはかりの対応モデルを追加中

- ・ 無償アプリ App Store / Google Playからダウンロード
- ・ 計量結果の表示(A&D標準フォーマット)計量データの受信
- ・ 天びん / はかりへのコマンド送信(双方向通信)
- ・ 設定時間ごとにコマンド送信するリピート機能(インターバル機能)
- ・ 計量データへの日付 / 時刻 / 番号の追加可能
- ・ 受信したデータをテキストデータとしてメールなどでシェアが可能



Bluetooth対応A&D天びん / はかり

Bluetooth通信機能を搭載しているモデル

- ・ 電子天びん BA-Tシリーズ※1、防塵・防水はかり SH-AWP-BT / SJ-AWP-BTシリーズ

Bluetooth通信インタフェースオプション(〇〇-27JA)の装着によって通信可能なモデル※2


- ・ 電子天びん：GX-A ※3 / GF-Aシリーズ、FZ-i / FX-iシリーズ、EJ / EJ-Bシリーズ
- ・ 分析天びん：HR-AZ / HR-Aシリーズ、
- ・ 防塵・防水電子天びん：GX-AWP / GF-AWPシリーズ、FZ-iWP / FX-iWPシリーズ、GX-M / GF-Mシリーズ
- ・ デジタル台はかり HW-C / HV-Cシリーズ、HW-CWP / HV-CWPシリーズ、SC / SEシリーズ、FG-CWPシリーズ

※1 電子天びん BAシリーズはBluetooth通信機能は搭載していません

※2 オプション〇〇-27JAは、検定付きモデルには使用できません

※3 GX-AEは使用できません


- ・ BluetoothコンバーターAD-8529PC-WIは、A&D WeiVには使用できません

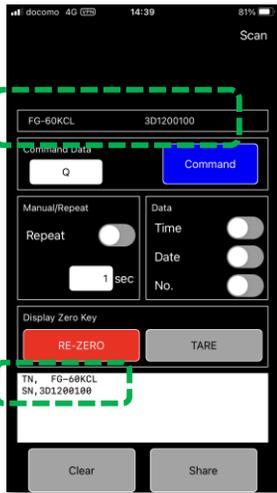


接続完了



計量値表示

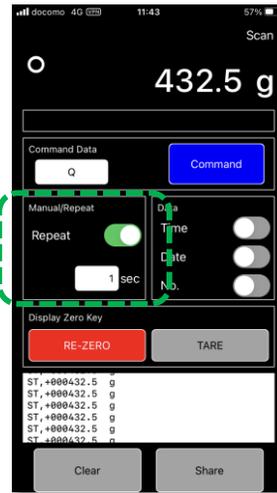

リピートOn
(1秒ごとにデータ取得)

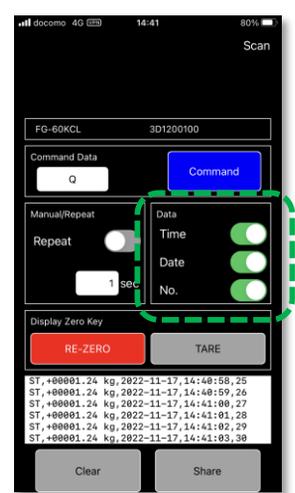

時刻・日付・ナンバを表示

■仕様

- ・通信：Bluetooth 5.0
- ・対応OS：Android 9.0/iOS 14.0以降
- ・対応機器：Bluetooth通信対応天びん／はかり
Bluetooth出力用オプション(OP-27シリーズ等)

※BluetoothコンバータAD-8529PCとは接続できません

計量結果の表示は、A&D標準フォーマットのみ対応しています

■その他

- ・料金:無料配信
- ・アプリストア
App Store / Google Play Store
- ・個人情報に関する取り扱い
アプリを通じてユーザーの個人情報の収集、
保存は行いません



A&D WeiV®

QRコードをスキャンしてアプリダウンロード できます
またはストア内で「A&D WeiV」で検索



Discover Precision

A&D 株式会社 エーアンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所	TEL.011-251-2753 (代)	FAX.011-251-2759
■仙台営業所	TEL.022-211-8051 (代)	FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所	TEL.028-610-0377 (代)	FAX.028-633-2166
■東京北営業所	TEL.048-592-3111 (代)	FAX.048-592-3117
■東京南営業所	TEL.045-476-5231 (代)	FAX.045-476-5232
■静岡営業所	TEL.054-286-2880 (代)	FAX.054-286-2955
■名古屋営業所	TEL.052-726-8760 (代)	FAX.052-726-8769
■大阪営業所	TEL.06-7668-3900 (代)	FAX.06-7668-3901
■広島営業所	TEL.082-233-0611 (代)	FAX.082-233-7058
■福岡営業所	TEL.092-441-6715 (代)	FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2023年12月 現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *A&D WeiV-ADJT-00-AD3-23c000