


大型計量皿タイプのGX-LPSシリーズ3モデル追加 全 20モデル

NEW



大型計量皿の GX-LPS
(計量皿寸法500×500 mm)

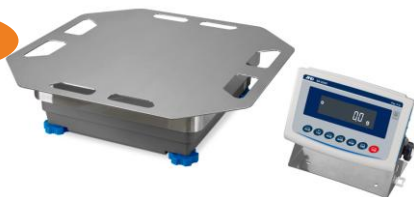

スイングアーム型
(一体型)
GX-L / GF-L



レイアウト自由な
表示部 分離型
GX-LS

大型計量物対応！防塵・防水IP65

A&DのロングセラーであるGPシリーズの後継機です
粉塵や水の侵入を防ぐ堅牢な「防塵・防水等級IP65」
液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下で精密な
計量が可能

- 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に
ECL：電子制御荷重(自己点検)機能
(Electronically Controlled Load)【特許取得済】
エー・アンド・デイ独自の天びん内部機構により、外部
分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出、わずか90秒
で確認完了
- ポンプ流量など液体の計量に
FRD：流量測定機能(Flow Rate Display)【特許取得済】
荷重の変化を「流量」として計算
天びん単体で高精度の流量測定が可能

- 応答速度 約1.5秒 計量センサーシステムSHS搭載
- 標準インタフェース RS-232C(D-Sub9P) / USB Type mini B
- スマートフォンとBluetooth接続が可能(オプション GXL-27JA)
- 自動環境設定、自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- g、kg、個数、%、カラット、もんめ計量モード
- データメモリ：計量値、感度調整履歴、単位質量、コンパレータ設定値(上下限值)、プリセット風袋値
- パスワード機能(3段：管理者、使用者、ゲスト)
- オートパワーオン・オフ / 動物計量(ホールド機能) / 床下ひょう量専用金具(別売)
- コンパレータ機能で(少ない/適量/多い)を視覚的に判断が可能(ブザーを鳴らすことも可能 ◆1)



スイングアーム型は自由自在なディスプレイ ポジションが可能

一般的な固定式ポールスタンドとは異なり、約100度の角度調整が
可能なスイングアーム式のディスプレイスタンドを採用

衝撃検知機能(ISD)【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告
表示とブザーでお知らせ ◆1



◆1 ブザー音量 約40 dB 本体正面 1m時

■仕様

GX-L：分銅内蔵タイプ / GF-L：ベアシックタイプ、GX-LD：スマートレンジ、GX-LS：表示部分離型、GX-LPS：大型計量皿、表示部分離型

GX-L シリーズ	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L
			GX-32001LS	GX-32001LDS		GX-62001LS	GX-62000LS	GX-102000LS
GX-LPSシリーズ			GX-32001LPS			GX-62001LPS		GX-102000LPS
GF-L シリーズ	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L				GF-62000L	
ひょう量	12 kg	22 kg	32 kg		42 kg	62 kg		102 kg
最小表示	0.1 g		0.1 g(0~6.2 kg) 1 g(6.2~32 kg)		0.5 g	0.1 g	1 g	

■共通仕様

型名	GX-L	GX-LPS	GF-L
内蔵分銅	あり		なし
自動感度調整	あり		なし
単位表示	g / kg / pcs(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重		
安定所要時間	約 1.5秒 (FAST 設定時の代表値)		
時計機能	あり		
インタフェース	標準装備：RS-232C(D-Sub9P) / USB(Type-MiniB) オプション：LAN / Bluetooth		
計量皿寸法	ひょう量 62 kgまでのモデル：344(W) × 384(D) mm / ひょう量 102kgのモデル：346(W) × 386(D) mm ※ GX-LPS: 500(W) × 500(D) mm		
防塵・防水等級	IP65		

■価格 商品コード JANコード

型名	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LS	GX-32001LD	GX-32001LDS	GX-42001L
標準価格(税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥350,000	¥210,000	¥230,000	¥280,000
商品コード	GX12001L	GX22001L	GX32001L	GX32001LS	GX32001LD	GX32001LDS	GX42001L
JANコード	4981046224031	4981046224048	4981046224055	4981046224154	4981046224062	4981046224161	4981046224079

型名	GX-62001L	GX-62001LS	GX-62000L	GX-62000LS	GX-102000L	GX-102000LS
標準価格(税抜)	¥450,000	¥470,000	¥320,000	¥340,000	¥400,000	¥420,000
商品コード	GX62001L	GX62001LS	GX62000L	GX62000LS	GX102000L	GX102000LS
JANコード	4981046224086	4981046224178	4981046224093	4981046224185	4981046224109	4981046224192

型名	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	GF-62000L
標準価格(税抜)	¥190,000	¥220,000	¥300,000	¥270,000
商品コード	GF12001L	GF22001L	GF32001L	GF62000L
JANコード	4981046224116	4981046224123	4981046224130	4981046224147

型名	GX-32001LPS	GX-62001LPS	GX-102000LPS
標準価格(税抜)	¥450,000	¥570,000	¥520,000
商品コード	GX32001LPS	GX62001LPS	GX102000LPS
JANコード	4981046401845	4981046456661	4981046591171

■オプション

型名	品名	標準価格(税抜)	型名	品名	標準価格(税抜)
GXL-04 ※1 ※2 ※3	コンパレータ出力(リレー(3段/5段)・ブザー) / 接点入力 / RS-232C	¥25,000	GP-16	AD-8127用プリンタ台	¥20,000
GXL-06 ※1 ※2	アナログ出力：0~1 Vまたは0.2 V~1 V / RS-232C	¥30,000	GP-20	床下ひょう量金具 ひょう量42 kg以下モデル用	¥15,000
GXL-07	延長ケーブル GX-LS用、5 m	¥25,000	GP-21	床下ひょう量金具 ひょう量62 kg以上モデル用	¥35,000
GXL-08 ※1 ※2	イーサネットインタフェース (TCP/IP)	¥30,000	AX-GXL-31	表示部保護カバー：5枚入り	¥3,400
GXL-27JA ※1	Bluetooth® インタフェース	¥9,000	AX-TB248	ACアダプタ(付属)	¥3,500
GP-12	動物計量皿	¥98,000	AX-KO2737-500	防水ケーブル：D-Sub9P(メス)~D-Sub9P(メス) / 5 m	¥20,000
			AX-KO7695-500 ★	防水ケーブル：D-Sub9P(メス)~D-Sub9P(オス) / 5 m	¥20,000

※1 同時に使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します

※2 GXL-04 / GXL-06 / GXL-08装着時は非防水仕様になります。

※3 ブザー音量 約56dB 本体正面 1m時

★ データロガー AD-1688 / USBコンバータ AD-8527等に使用するケーブルです

AND 株式会社 **エーアンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6128 (直) FAX.03-5391-6129

札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759

仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052

宇都宮営業所 TEL.028-610-0377 (代) FAX.028-633-2166

東京北営業所 TEL.048-592-3111 (代) FAX.048-592-3117

東京南営業所 TEL.045-476-5231 (代) FAX.045-476-5232

静岡営業所 TEL.054-286-2880 (代) FAX.054-286-2955

名古屋営業所 TEL.052-726-8760 (代) FAX.052-726-8769

大阪営業所 TEL.06-7668-3900 (代) FAX.06-7668-3901

広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058

福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口

通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は

0120-342-043

受付時間：月曜日~金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00~12:00 / 13:00~17:00)



安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2025年10月 のものです。

※本カタログは事業者向けです。

※GX-L/GF-L/GX-LPS-ADJT-00-AD1-25a000