

GX

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001g~

校正用分銅内蔵型 汎用天びん

校正用分銅でいつでも高精度計量

ひょう量210g~8100g、最小表示0.001g~0.1g



標準付属品の小型風防装着
(GX-200、300、400、600、800、1000のみ)★特許取得済

別売品のガラス風防装着
(GX-10)



校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

計量センサーシステムSHS搭載

応答速度 約1秒〈Super Hybrid Sensor〉

RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×ス)

標準装備

データ直送ソフト WinCT

使用可能

クイックUSB ★特許申請中

GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

自動環境設定 ★特許取得済・自己点検機能


使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示

g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位。取引・証明用には、もんめモードはありません。

- データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最新50個、単位質量：最大20個
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GX-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量 (※取引・証明用には機能がありません。)

*取引・証明用(検定付)もごさいます。
検定済品GX-RはP.63をご覧ください。

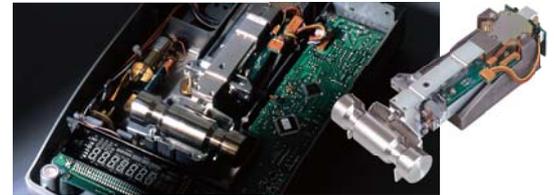

計量センサーシステムSHS ★特許取得済



モデル	GX-200	GX-300	GX-400	GX-600	GX-800	GX-1000	GX-2000	GX-3000	GX-4000	GX-6100	GX-6000	GX-8000
ひょう量	210g	310g	410g	610g	810g	1100g	2100g	3100g	4100g	6100g	6100g	8100g
最小表示	0.001g						0.01g			0.1g		
個数モード	計数可能最小単重						0.001g			0.1g		
	サンプル数						10、25、50または100個					
パーセントモード	100%登録最小質量						0.100g			1.00g		
	パーセント最小表示						0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	128×128mm						165×165mm					
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥108,000	¥118,000
JANコード	4981046624107	4981046600811	4981046624206	4981046624305	4981046602518	4981046602525	4981046624404	4981046600835	4981046624503	4981046624602	4981046624701	4981046624800
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000											

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

★別売品につきましては、GF(次ページ)をご覧ください。