

無風イオナイザー AD-1683A

AND
A&D Weighing



AD-1683A
¥75,000 (標準価格:税抜)

タッチレス (IRセンサ内蔵) で、オン/オフ

- ・両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電ができます
- ・オン/オフが簡単だから、ストレスなく除電ができます

LEDと音が動作をお知らせ、除電ミスを防止


- ・IONは目に見えませんが、LEDと音で確認ができます
- ・IONランプは除電中に点灯します

場所を取らない洗練されたデザイン


- ・幅 68mm とコンパクト
- ・分析天びんのとりに置いてても違和感のないデザイン



使用例

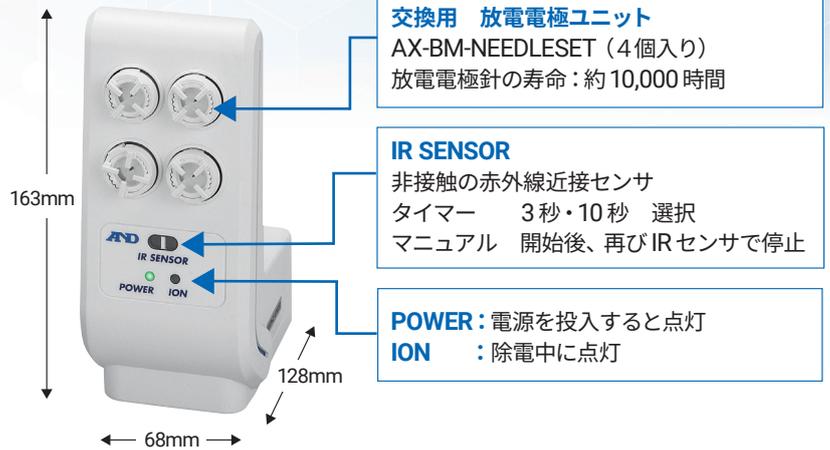

型名	AD-1683A
標準価格 (税抜)	¥75,000
JAN コード	4981046198684
イオン発生方式	直流コロナ放電
除電推奨距離	放電電極針より 7cm 以内
周囲温度・湿度	5°C ~ 40°C、85%RH (結露なきこと)
放電電極針	タングステン (寿命はおよそ 10000時間)
外形寸法	68(W) × 128(D) × 163(H)mm
本体質量	約 370g

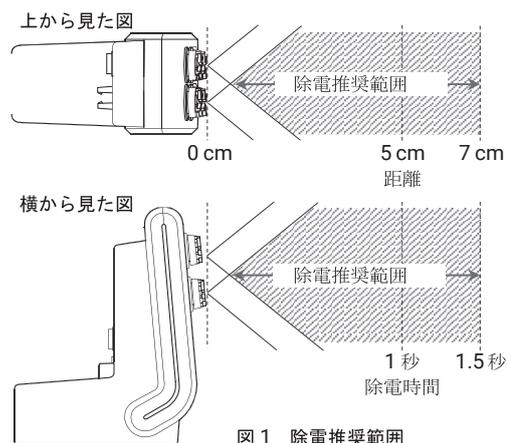

Discover Precision

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

- 本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129
- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 - 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 - 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
 - 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
 - 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
 - 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
 - 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
 - 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
 - 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 - 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は 2021年11月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*AD1683A-ADJT-01-S11-21b05PP