

ホームヘルスケア製品ガイド

「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー 滝川クリステル



通信機能付き健康機器

Bluetooth® 通信機能付き

上腕式ホースレス睡眠血圧計

UA-1300BLE

A&D Connect ヘルスケア対応




- Bluetooth®通信機能付き
- 睡眠中の血圧を測定
アプリで測定時間を設定すれば、
寝ている間に血圧を自動で測定できます
- 日中の血圧も測定可能
- スマートフォンからの測定開始
- 動作音も小さく、薄型形状で
睡眠を邪魔しにくい仕様



型名	UA-1300BLE
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1300BLE
認証番号	306AHBZX00038000
一般的名称	自動電子血圧計 体動センサ
JMDNコード	16173000
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046102667
商品コード	UA-1300LA-JC11
外形寸法	34 (W) × 138 (H) × 17 (D) mm
本体質量	約185 g (電池含まず)
通信方式	Bluetooth® Ver.5.1 LE
電源	リチウムイオン電池 (DC 3.7 V、325 mAh)
電池寿命	充電可能回数: 500回 (室温23 °C) 新品の状態からフル充電時: 連続約100回使用可能 (室温23 °C、170 mmHg加圧、腕周囲27 cm)
希望小売価格	オープン価格



※睡眠中・起床後の血圧測定は専用アプリ
「A&D Connect ヘルスケア」が必要です。

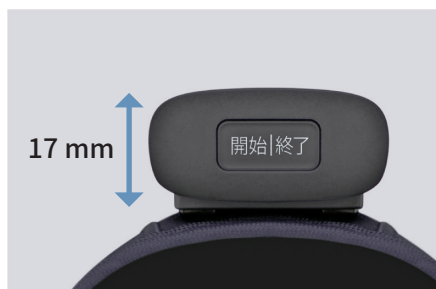

装着したまま上着を羽織れるほどの
薄型設計



小さくまとまるコンパクト設計で
持ち運びや収納もラク



Bluetooth通信機能付きのため
測定データの記録管理が簡単

製品紹介動画

詳細情報は以下のQRコードからチェック



ホースレス血圧計
UA-1300BLE 製品紹介



ホースレス血圧計
UA-1300BLE
A&D Connect ヘルスケア
アプリの使い方



その他製品は各ページよりご覧ください。

上腕式血圧計	活動量計	体重計	体組成計
			
UA-652BLE Plus p.5へ	UW-303BLE/331BLE p.11へ	UC-352BLE p.12へ	UC-515 / UC-516 / UC-421BLE p.14へ

睡眠血圧測定の設定

睡眠中の血圧の測定時間は、固定設定と自由設定2つの合計3パターンから選べます。

固定設定 自由設定1 自由設定2

測定時刻設定

1回目 02:00

2回目 03:00

3回目 04:00

測定時刻設定(就床から)

2 時間後

起床予定時刻 07:00

起床時測定

測定スケジュール

就床 2:00 3:00 4:00 7:00 起床

2 時間後 10 分後

固定設定

就床から2時間後・2時・3時・4時

固定設定 自由設定1 自由設定2

測定時刻設定(就床から)

1回目 2 時間後

2回目 3 時間後

3回目 4 時間後

4回目 5 時間後

+ 追加する

起床予定時刻 07:00

測定スケジュール

就床 7:00 起床

2 3 4 時間後 10 分後

自由設定1

就床から○時間後・○時間後・○時間後・・・に設定(1時間刻みで設定可能)

固定設定 自由設定1 自由設定2

測定時刻設定

1回目 02:15

2回目 03:30

3回目 04:45

+ 追加する

起床予定時刻 07:00

起床時測定

測定スケジュール

就床 2:15 3:30 4:45 7:00 起床

10 分後

自由設定2

○時・○時・○時・・・に設定(15分刻みで設定可能)

測定データの表示

カレンダー表示やリスト表示に加え、睡眠中の血圧に絞ったグラフ表示も確認できます。





北太 北本 太郎

血圧

測定日時	最高血圧 / 最低血圧	脈拍数	IHB
2025/09/22 14:45	105 / 74	65	
2025/09/22 11:24	114 / 79	63	
2025/09/22 06:01	93 / 69	64	
2025/09/22 05:46	101 / 67	38	
2025/09/22 04:46	100 / 68	46	
2025/09/22 03:46	91 / 54	45	
2025/09/22 02:49	109 / 75	65	
2025/09/22 00:43	108 / 76	58	
2025/09/14 15:39	95 / 59	82	
2025/09/14 06:22	89 / 69	101	
2025/09/14 04:38	104 / 72	91	
2025/09/14 03:38	103 / 76	92	

カレンダー 履歴 分析 設定

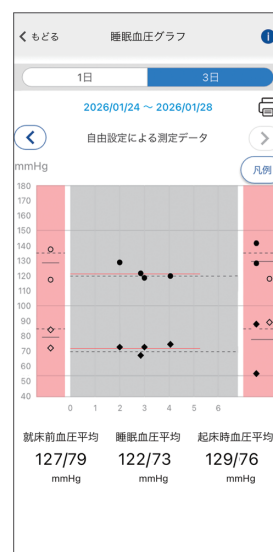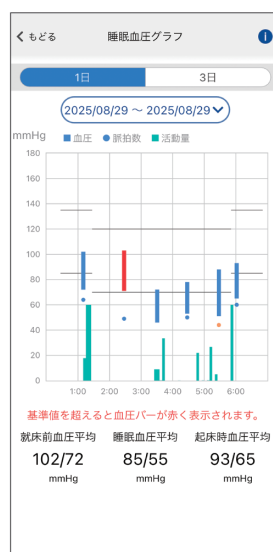


夜間(睡眠)高血圧とは？

睡眠中の血圧の平均値が 120 / 70mmHg以上の場合、「夜間(睡眠)高血圧」と呼ばれます。血圧は睡眠時は昼間に比べて 10 %~20 %ほど下がるのが一般的ですが、夜間(睡眠)高血圧の場合は睡眠中に血圧が下がらない、もしくは昼間より高くなるとされています。* また、自覚しづらく、第三者も気づきにくい高血圧とされています。

夜間(睡眠)高血圧の詳細はこちら



血圧値

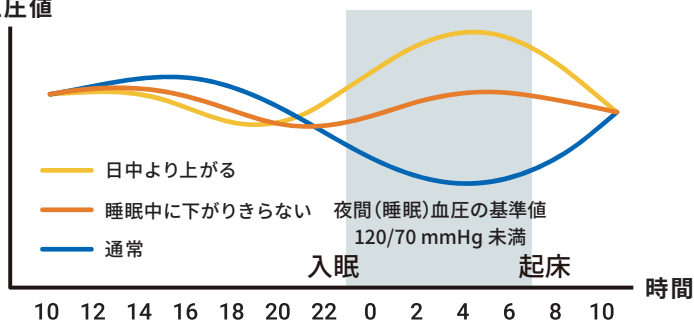

*日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン 2025

※疾患の一般的説明であり、本製品が治療・予防・診断を行うものではありません。

通信機能付き健康機器

NFC通信機能付き

上腕式ホースレス血圧計

UA-1100NFC



A&D Connect ヘルスケア対応

- NFC通信機能付き
- スマホで本体にタッチするだけでアプリへデータを転送
- ペアリング不要なので、1台の製品を家族などの複数人で共有することも可能
- 上腕式なのに持ち運び、収納に便利
- ゴムバンドでよりコンパクトにまとまる
- 様々な日常シーンに馴染む3つのカラーバリエーション
(ホワイト／グレー／パープル)



型名	UA-1100NFC ホワイト	UA-1100NFC グレー	UA-1100NFC パープル
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1100NFC		
認証番号	305AHBZX00023000		
一般的名称	自動電子血圧計		
JMDNコード	16173000		
医療機器分類	管理医療機器		
JANコード	4981046221306	4981046221313	4981046221320
商品コード	UA-1100NA-JC11	UA-1100NA-JCB1	UA-1100NA-JCC1
本体サイズ	36 (W) × 144 (H) × 31 (D) mm		
本体質量	約240 g (乾電池含まず)		
通信方式	NFC Type V		
電源	単4形アルカリ乾電池3個 (DC4.5 V)		
電池寿命	約400回 (アルカリ乾電池使用時) (室温23℃、170 mmHg加圧の場合)		
希望小売価格	オープン価格		



NFC対応スマホで本体にタッチするだけで
アプリへデータを転送

製品紹介動画

詳細情報は以下のQRコードからチェック



**ホースレス血圧計
UA-1100NFC製品紹介**
本紙でご紹介できなかった
特長をご案内しています



**ホースレス血圧計
UA-1100NFCの使用方法**
UA-1100NFCの使い方、
正しく測るためのポイントを
ご案内しています



Bluetooth® 通信機能付き

上腕式ホースレス血圧計


UA-1200BLE



- Bluetooth®通信機能付き
- 上腕式なのに持ち運び可能なデザイン
- 煩わしいホースがなくなりました
- スマートフォンから測定開始
- 測定中の動作をスマートフォンで確認
- マルチペアリング(5ユーザー、1ゲスト)



型名	UA-1200BLE
販売名	エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1200BLE
認証番号	301AHBZX00009000
一般的名称	自動電子血圧計
JMDNコード	16173000
医療機器分類	管理医療機器
JANコード	4981046163316
商品コード	UA-1101LA-JC51
外形寸法	幅44×奥行き26×高さ126 (mm)
本体質量	約220 g (電池含む)
通信方式	Bluetooth® Ver.4.1 LE
電源	リチウムイオン電池 (DC3.7 V)
電池寿命	約100回 (満充電時、室温23℃、170 mmHg加圧の場合)
希望小売価格	オープン価格

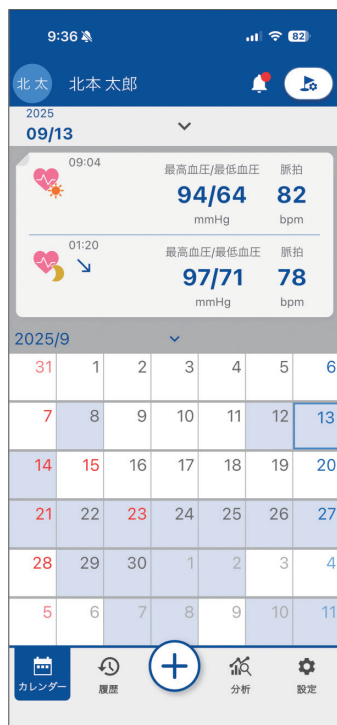


健康管理アプリ A&D Connect ヘルスケア

Bluetooth®通信、NFC通信、QRコード読み取り等で簡単にバイタルサインを受信することができます。手入力も可能です。




バイタルサインをスマートフォンでデータ管理！メールやSNS等でデータを共有したり、Appleヘルスケアなどの健康管理サービスと連携させることも可能です。

カレンダー表示、グラフ表示、履歴表示、機器の設定、メールやSNSでのデータ共有

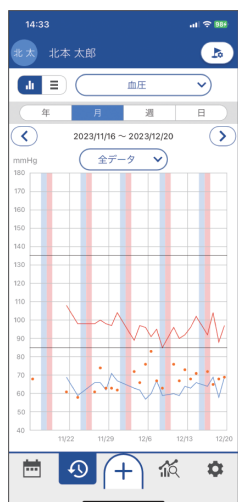

測定日時	最高血圧	最低血圧	脈拍数	IHB
2024/01/24 09:39	93	62	69	
2024/01/23 09:42	132	78	69	
2024/01/23 09:41	89	57	74	
2024/01/22 17:40	99	66	68	
2024/01/19 16:43	97	70	73	
2024/01/19 16:43	97	70	73	
2024/01/19 18:46	92	58	72	
2024/01/18 17:39	116	71	70	
2024/01/18 17:39	99	66	71	
2024/01/18 17:39	116	71	70	
2024/01/18 17:24	116	71	70	
2024/01/18 17:13	104	63	68	
2024/01/18 13:47	100	64	82	
2024/01/18 13:24	101	66	88	

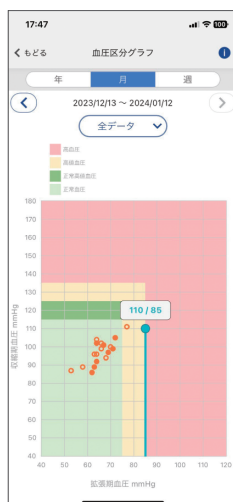

レポートの表示、印刷も可能です。

アプリの使い方動画



詳細情報は以下のQRコードからチェック



A&D Connect ヘルスケアアプリの使用方法
A&D Connect ヘルスケアアプリの使い方をご案内しています



上腕式血圧計

管理医療機器



スマートフォンで血圧管理

UA-652BLE Plus

医療機器認証番号:308AHBZX00021000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-652BLE Plus

オープン価格

- Bluetooth通信機能付きアプリと血圧計を連携させることで、簡単にスマートフォンで血圧データ管理ができます。

- 内部メモリ30セット



音声サポート機能付き

巻きやすくて痛くないカフ

UA-1030T Plus

医療機器認証番号:224AHBZX00019000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1030T

オープン価格

- 測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく挨拶や血圧のワンポイント情報もお話します。

- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。

正確な測定をサポート

家族みんなで記録できる血圧計

UA-1005Plus

医療機器認証番号:229AHBZX00026000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-1005

オープン価格

- 家族4人でも良し、2人で朝・晩の2回を記録など、家族それぞれのデータ管理がスムーズに。

- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。

不規則脈波(IHB)表示

血圧区分表示(アプリ)

内部30メモリ

カレンダー&時計表示(アプリ)

脱アレルギーカフ

痛くないカフ

音声ガイド

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波(IHB)表示

血圧区分表示

90メモリ

カレンダー&時計表示

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

血圧区分表示

60×4メモリ

カレンダー&時計表示

カフホルダー

脱アレルギーカフ

型名	UA-652BLE Plus	UA-1030T Plus	UA-1005Plus
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046739702	4981046305730	4981046305686
本体サイズ	幅96×奥行き130×高さ68(mm)	幅140×奥行き105×高さ60(mm)	幅142×奥行き117×高さ60(mm)
本体質量	約250g(電池含まず)	約300g(電池含まず)	約245g(電池含まず)
カフゆる巻きエラー表示	—	○	○
不規則脈波(IHB)表示	○	○	○(%IHB)
体動検出表示	—	○	○
血圧区分表示	○(アプリ)	○	○
平均値表示	○(アプリ)	○	○
メモリ数	30	90	60×4
使用人数	1人仕様	1人仕様	4人仕様
測定可能腕周	22cm～32cm	17cm～32cm	22cm～32cm
電源	単3形乾電池4個(DC6V)または専用ACアダプタ(AC100V)		
電池寿命(アルカリ乾電池)	約700回	約700回	約700回
カレンダー&時計表示	○(アプリ)	○	○
ACアダプタ	別売	別売	○
収納ケース	○	○	—
その他特長	Bluetooth通信機能付き	音声	カフホルダー
通信方式	Bluetooth® Ver.5.1 BLP	—	—
付属品	取扱説明書、添付文書、 単3形アルカリ乾電池4個(お試用)、 収納ケース	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、 単3形アルカリ乾電池4個(お試用)、 収納ケース	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、 カフホルダー、専用ACアダプタ
カフ	ソフトカフ(脱アレルギーカフ)	痛くないカフ	ソフトカフ(脱アレルギーカフ)
保証期間	1年	10年	10年



カフすっきり収納 ACアダプタ付き血圧計

UA-654Plus

医療機器認証番号:229AHBZX00029000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-654

オープン価格

- シンプルなワンボタン操作。
- カフを本体の後ろにすっきり収納できます。
- コンセントから電源が取れるので、エコで経済的です。

不規則脈波 (IHB) 表示

血圧区分表示

60メモリ

カフホルダー

脱アレルギーカフ

初めての方でも分かり易い シンプルなエントリーモデル

UA-651Plus

医療機器認証番号:302AHBZX00028000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-651Plus

オープン価格

- 機能がシンプルで使いやすい。
- カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。
- ソフトタイプのカフが腕にフィット片手でしっかり巻けます。

不規則脈波 (IHB) 表示

血圧区分表示

60メモリ

脱アレルギーカフ

4ヶ国語※取扱説明書

※日本語・英語・中国語・韓国語

超小型で携帯に便利

UA-704Plus

医療機器認証番号:219AHBZX00017000

販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-704

オープン価格

- ゴム球による手動加圧です。
- 旅行や携帯に便利な手のひらサイズです。
- 単3形アルカリ乾電池1本で約6,000回測定
- 脈のゆらぎをチェックする不規則脈波 (IHB) 表示

超小型・超軽量

手動加圧

超省電力

不規則脈波 (IHB) 表示

型名	UA-654Plus	UA-651Plus	UA-704Plus
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046305679	4981046305716	4981046199087
本体サイズ	幅106×奥行143×高さ67 (mm)	幅96×奥行130×高さ68 (mm)	幅100×奥行51×高さ31 (mm)
本体質量	約240 g (電池含まず)	約240 g (電池含まず)	約73 g (電池含まず)
カフゆる巻きエラー表示	—	—	—
不規則脈波 (IHB) 表示	○	○	○
体動検出表示	—	—	—
血圧区分表示	○	○	—
平均値表示	○	○	—
メモリ数	60	60	—
使用人数	1人仕様	1人仕様	1人仕様
測定可能腕周	22 cm～32 cm	22 cm～32 cm	22 cm～32 cm
電源	単3形乾電池4個 (DC6 V) または専用ACアダプタ (AC100 V)		単3形乾電池1個 (DC1.5 V)
電池寿命 (アルカリ乾電池)	約700回	約700回	約6,000回
カレンダー&時計表示	—	—	—
ACアダプタ	○	別売	—
収納ケース	—	—	○ 収納袋
その他特長	カフホルダー	—	—
付属品	取扱説明書、添付文書、血圧管理手帳、カフホルダー、専用ACアダプタ	4ヶ国語取扱説明書、添付文書、単3形マンガン乾電池4個 (お試し用)、血圧管理手帳	取扱説明書、添付文書、クイックガイド、単3形アルカリ乾電池1個 (お試し用)、収納袋、血圧管理手帳
カフ	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)	ソフトカフ (脱アレルギーカフ)
保証期間	10年	10年	1年

手首式血圧計

管理医療機器



UB-533PGMR

医療機器認証番号:229AHBZX00020000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533
オープン価格

- 正確な測定に重要な正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。
- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。



UB-533MR

医療機器認証番号:229AHBZX00020000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-533
オープン価格

- カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。
- 2人分または朝・夜の測定データを其々最新60回分が保存できます。ご夫婦でお使い頂けます。



手首高さガイド

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

60×2メモリ

血圧区分表示

カレンダー&時計表示

自動昇圧測定方式

カフゆる巻きエラー表示

体動検出表示

不規則脈波頻度(%IHB)表示

血圧区分表示

60×2メモリ

カレンダー&時計表示

自動昇圧測定方式



UB-525MR

医療機器認証番号:229AHBZX00021000
販売名:エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UB-525
オープン価格

- シンプルで使いやすいワンプッシュ操作 持ち運びがしやすく何処でも手軽に測れます。
- 手首にはめて片手で簡単に巻ける 装着がしやすいクリップタイプです。



不規則脈波(IHB)表示

血圧区分表示

60メモリ

自動昇圧測定方式



型名	UB-533PGMR	UB-533MR	UB-525MR
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4981046151474	4981046151481	4981046151498
本体サイズ	幅56×奥行21.5×高さ88(mm)	幅56×奥行21.5×高さ88(mm)	幅56×奥行21.5×高さ88(mm)
本体質量	約95g(電池含まず)	約95g(電池含まず)	約90g(電池含まず)
カフゆる巻きエラー表示	○	○	—
不規則脈波(IHB)表示	○(%IHB)	○(%IHB)	○
体動検出表示	○	○	—
血圧区分表示	○	○	○
平均値表示	○	○	○
メモリ数	60×2	60×2	60
使用人数	2人仕様	2人仕様	1人仕様
測定可能手首周	13.5cm～21.5cm		
電源	単4形乾電池2個(DC3V)		
電池寿命(アルカリ乾電池)	約200回	約250回	約250回
カレンダー&時計表示	○	○	—
収納ケース	○	○	—
その他特長	手首高さガイド	—	—
付属品	取扱説明書、添付文書、収納ケース、 単4形アルカリ乾電池2個(お試し用)		取扱説明書、添付文書、 単4形アルカリ乾電池2個(お試し用)
カフ	クリップカフ	クリップカフ	クリップカフ
保証期間	10年	10年	10年

体重計

UC-503

- 乗るだけで電源が入り測定開始
- オートパワーオフ機能
- 薄型で収納しやすい
- 100g単位 (75 kgまで)



アイボリー



パールブルー

型名	UC-503IV	UC-503BU
販売名	エー・アンド・デイ体重計 UC-503	
JANコード	4981046479691	4981046558457
商品コード	UC-503A-JC4U	UC-503A-JC2U
外形寸法	幅280×奥行280×高さ23 (mm)	
本体質量	約1.3 kg (電池含まず)	
希望小売価格	オープン価格	



UC-352BLE



- Bluetooth通信機能付き
- 乗るだけで電源が入り測定開始
- 薄型シンプルスタイル 100 g単位
- 内部メモリ 90セット



型名	UC-352BLE
販売名	体重計 UC-352BLE
JANコード	4981046143370
商品コード	UC-352BLC-JC
外形寸法	幅300×奥行300×高さ31 (mm)
本体質量	約2.1 kg (電池含む)
希望小売価格	オープン価格

在庫限り


ガラストップのシンプルデザイン 薄! 厚さ24ミリ

100g表示体重計 UC-332

- 大きな文字表示
- 乗るだけですぐに測定開始
- オートパワーオフ機能

100 g表示

強化ガラス

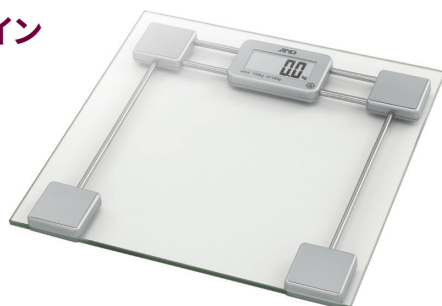

型名	UC-332
販売名	100 g表示・体重計 UC-332
JANコード	4981046612135
商品コード	UC-332-S
外形寸法	幅300×奥行300×高さ24 (mm)
本体質量	約1.5 kg (電池含む)
希望小売価格	¥4,400 (税込)

型名	UC-503IV	UC-503BU	UC-352BLE	UC-332
測定方式	電気抵抗線式			
通信方式	—		Bluetooth® Ver.5.1 LE	—
計量範囲	0.1 kg ~ 150 kg		10 kg ~ 150 kg	5 kg ~ 150 kg
計量範囲/ 最小表示	0.1 kg以上 ~ 75 kg以下 / 100 g 75 kg を超え ~ 150 kg以下 / 200 g		10 kgを超え~100 kg以下 / 100 g 100 kgを超え~150 kg以下 / 200 g	5 kg以上~150 kg以下 / 100 g
計量範囲/ 計量制度	0.1 kg以上 ~ 75 kg以下 / ±200 g 75 kg を超え ~ 150 kg以下 / ±600 g		10 kgを超え ~ 75 kg以下 / ±200 g 75 kgを超え ~ 150 kg以下 / ±300 g 100 kgを超え ~ 150 kg以下 / ±600 g	5 kg以上 ~ 75 kg未満 / ±200 g 75 kg以上 ~ 150 kg以下 / ±200 g
電源	単4形乾電池2個 (DC3 V)		単4形乾電池4個 (DC6 V)	CR2032 リチウムコイン電池1個 (DC3 V)
電池寿命	約6ヶ月 (マンガン電池使用時1日3回測定)		約1年 (アルカリ乾電池使用時1日2回測定)	約2,000回
メモリ数	—		90回分	—
BMI	—			
その他	薄型		—	強化ガラス、薄型
付属品	取扱説明書、単4形マンガン乾電池 (お試用)		単4形乾電池4個 (お試用)、 取扱説明書、スタートアップガイド	CR2032 リチウムコイン電池1個 (お試用)、 取扱説明書

体組成計



UC-515



- Bluetooth・Wi-fi通信機能付き
- 24項目を表示可能
- 乗るだけで電源が入り測定開始
- オートパワーオフ機能
- LED表示で数値が分かりやすい
- 電極が見えないおしゃれなデザイン

※ UC-515のご使用にはスマートフォンが必要です。
※ ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。



チャコールグレー



パールホワイト



ワインレッド



UC-516



- Bluetooth・Wi-fi通信機能付き
- 24項目を表示可能
- 乗るだけで電源が入り測定開始
- オートパワーオフ機能
- カラーディスプレイで数値が分かりやすい
- 電極が見えないおしゃれなデザイン
- 充電式だから、電池交換不要

※ UC-516のご使用にはスマートフォンが必要です。
※ ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。



ダークグレー

充電式で
いつでも測れる



型名	UC-515WH	UC-515GR	UC-515WR	UC-516GR
販売名	エー・アンド・デイ体組成計 UC-515			エー・アンド・デイ体組成計 UC-516
JANコード	4981046528559	4981046263023	4981046753975	4981046677417
商品コード	UC-515LA-JC1U	UC-515LA-JC2U	UC-515LA-JC3U	UC-516LA-JC1U
外形寸法	幅280×奥行280×高さ25 (mm)			幅300×奥行300×高さ30 (mm)
本体質量	約1.2 kg (電池含まず)			約1.5 kg (電池含まず)
アプリ表示項目 (24指標)	体重、標準体重、BMI、体脂肪率、体脂肪量、皮下脂肪率、内臓脂肪レベル、肥満度、除脂肪体重、水分率、タンパク質率、筋肉量、筋肉率、骨格筋量、骨格筋率、骨量、基礎代謝量、心拍数、体年齢、体型、体脂肪増減目安、筋肉増減目安、体重増減目安、スコア			
希望小売価格	オープン価格			
通信方式	Bluetooth® Ver.5.0 LE、Wi-Fi			Bluetooth® Ver.5.1 LE、Wi-Fi
計量範囲	0.1 kg ～ 150 kg			
計量範囲/ 最小表示	0.1 kg以上 ～ 75 kg以下 / 100 g 75 kg を超え ～ 150 kg以下 / 200 g			
計量範囲/ 計量制度	0.1 kg以上 ～ 75 kg以下 / ±200 g 75 kg を超え ～ 150 kg以下 / ±600 g			
電源	単4形乾電池3個			リチウムイオン電池 (DC3.7 V、800 mAh)
電池寿命	約6ヵ月 (アルカリ乾電池使用時1日2回測定)			約6ヶ月持続 (1日2回、1回30s使う場合)
メモリ数	合計100回分			
BMI	○			
その他	薄型、LED表示			薄型、カラーディスプレイ
付属品	取扱説明書、単4形乾電池3個 (お試用)			取扱説明書、充電用USBケーブル


最多*24項目が表示可能 *当社比

体重	筋肉量	水分率	骨量	筋肉増減目安	内臓脂肪レベル	体脂肪率	筋肉率
基礎代謝量	タンパク質率	標準体重	肥満度	体脂肪量	骨格筋量	除脂肪体重	体重増減目安
体年齢	心拍数	BMI	骨格筋率	皮下脂肪率	体脂肪増減目安	体型	スコア

※体重以外の体組成項目は、からだの電気抵抗値をもとに計算した推定値です。

測定データの表示

カレンダー表示、リスト表示、グラフ表示にて結果を確認できます。

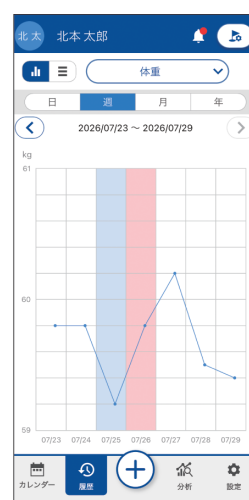

Bluetooth®
UC-421BLE



ホワイト



ブラック

- Bluetooth通信機能付き
- 最先端のスタイリッシュなデザイン
- 体重は50 g単位
- マルチペ어링(5ユーザー、1ゲスト)
- 5色に光るLEDが登録者それぞれを認識(青、緑、黄、橙、紫)

※ UC-421BLEのご使用にはスマートフォンが必要です。

※ ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

型名	UC-421BLE ホワイト	UC-421BLE ブラック
販売名	体組成計 UC-421BLE	
JANコード	4981046159227	4981046164719
商品コード	UC-421LA-JC11	UC-421LA-JC21
外形寸法	幅330×奥行330×高さ40 (mm)	
本体質量	約2.3 kg (電池含む)	
アプリ表示項目 (10指標)	体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、水分率、基礎代謝量、推定骨量、体型判定、体内年齢	
希望小売価格	オープン価格	
通信方式	Bluetooth® Ver.4.2 LE	
計量範囲	10 kg ~ 150 kg	
計量範囲/最小表示	10 kg以上 ~ 100 kg未満 / 50g 100 kg以上 ~ 150 kg以下 / 100 g	
計量範囲/計量制度	10 kgを超え ~ 75 kg以下 / ±100 g 75 kgを超え ~ 100 kg未満 / ±150 g 100 kg以上 ~ 150 kg以下 / ±300 g	
電源	単3形乾電池4個 (DC 6 V)	
電池寿命	約5か月 (アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)	
メモリ数	30回分 (5人合計150回分)	
BMI	○	
付属品	スタートアップガイド、取扱説明書、単3形乾電池4個 (お試用)、補助脚4個	

超音波温熱吸入器

管理医療機器

水道水・生理食塩水専用

*薬液はご使用になれません。

超音波温熱吸入器 **口鼻両用**

ホットシャワー5^{...}

UN-135

医療機器認証番号 225AHBZX00022000

¥22,000(税込)

A&Dは超音波温熱式!

約43℃に温めたミストが、
のど・鼻を加温・加湿します。

- 吸入スタートが早い(約15秒)
- 生理食塩水が使えるスムーズに吸入
(刺激が少なくムセません)
- 吸入中の動作音が静か

口・鼻両用

クイックスタート


生食水使用可



口用ノズル



鼻用ノズル

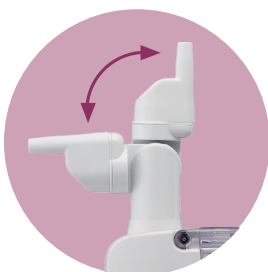

角度切替え...角度が調整できて、
大人も子供も使いやすい



ピンク

ブルー

ポータブル吸入器

管理医療機器

ポータブル吸入器 **口鼻両用**

ポケットシャワー

UN-302

医療機器認証番号 303AHBZX00025000

オープン価格

- 携帯に便利なポケットサイズ
- 給水ユニットは丸洗い可能

* UN-302は温熱機能がありません。

口・鼻両用

生食水使用可

ポータブル



のど・鼻の不快感を感じやすい季節に



型名	UN-135
販売名	超音波温熱吸入器 UN-135
希望小売価格	¥22,000 (税込)
JANコード	ピンク：4981046311380 ブルー：4981046311359
商品コード	ピンク：UN-135A-JC1 ブルー：UN-135A-JC
電源	AC100 V
消費電力	65 W
霧化量	強：約1.8 mL/分 普通：約1.2 mL/分
霧化粒径	約5 マイクロメートル
タイマー	1回 約5分間
外形寸法	幅111×奥行き188×高さ286 (mm)
本体質量	約1,100 g
付属品	吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、 口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、 本体保護カバー、取扱説明書、添付文書、クイックガイド

オプション

品名	型名	標準価格(税込)	JANコード
吸入マスク	AXP-UN13X209	¥660	4981046 000680
吸入液カップ	AXP-UN13X202	¥660	4981046 000598
口ノズル	AXP-UN13X215	¥440	4981046 000741
鼻ノズル	AXP-UN13X214	¥440	4981046 000734
計量スプーン(3個)	AXP-UN13X203	¥330	4981046 000604
マスクカバー	AXP-UN13X210	¥440	4981046 000697

型名	UN-302
販売名	ポータブル型超音波吸入器 UN-302
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4981046197182
電源	単3形アルカリ乾電池2個 (DC3 V)、 または専用ACアダプタ (AC100 V)
消費電力	約0.72 W
霧化量	0.4～1.0 mL/分
霧化粒径	5～11 マイクロメートル
外形寸法	幅44.8×奥行き41.7×高さ94 (mm)
本体質量	60 g (電池含まず)
付属品	給水ユニット、保護キャップ、吸入マスク、マウスピース、 計量スプーン、収納袋、取扱説明書、添付文書 (※生産時期により付属品が異なる場合があります。旧仕様では マスクアダプターが付属し、マウスピースは含まれていません。)

オプション

品名	型名	標準価格(税込)	JANコード
ACアダプタ	AX-TB299	¥2,200	4981046199247
計量スプーン、大人用マスク、 保護キャップ、収納袋のセット	UN-302-01	¥1,078	4981046199223
給水ユニット(保護キャップ付き)	UN-302-02	¥2,530	4981046199230
マウスピース	UN-302-03	¥550	4981046220279

共通の特長

超音波だから、
生理食塩水が使えて、
むせずにスムーズな吸入。

A&Dの人にやさしいテクノロジーが
あなたの快適な毎日をサポートします。

吸入効果を上げるには、温度と粒子径が重要です。


UN-135 約5 マイクロメートル
UN-302 約9 マイクロメートル

粒子径と到達部位

のどの奥にしっかり届く粒子径5～10マイクロメートル

ミストに触れたときに、顔や手に水滴を感じたら、10マイクロメートルよりも大きい粒子径。大きい粒子は使用時に顔が濡れてしまったり、のどの奥の必要部位にまんべんなく到達しません。

粒子の大きさにより到達部位は左右され、小さいほど深部の末梢気道まで到達、沈着します。
約5～10マイクロメートルの粒子が、うがいでは届かない、のど・鼻の奥までしっかり届きます。

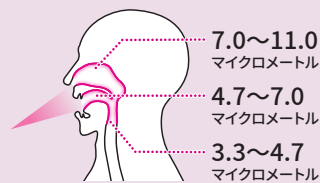

吸入粒子径による到達部位
出典：馬場駿吉「エアロゾル吸入療法」1989

生理食塩水の作り方

生理食塩水の作り方はカンタン。
適量の水に付属の計量スプーンスリキリ1杯の食塩を入れるだけ。

UN-135



UN-302



生理食塩水を使うと、むせずにスムーズに吸入できます。
水道水ではむせてしまう方でも、体液と同じ濃度の生理食塩水ならスムーズに吸入ができます。やさしさと使いやすさを考えたA&Dのテクノロジーです。

1マイクロメートル (μm) = 1/1,000 mm

体温計

管理医療機器

ご注意

おでこの表面温度から舌下温に換算し表示します。
舌下温は、ワキの下の体温に比べ0.3～0.5℃高くなります。



肌に触れずに1秒で測れる
おでこで測る非接触体温計

でこピツと

皮膚赤外線体温計 UT-701

医療機器認証番号 226AFBZX00169000

オープン価格

- 肌に触れずに、すばやく測れる
- 非接触のため、衛生的に使用できます
- じっとできないお子様の体温測定に便利
- 寝ている人を起こさずに検温できます
- 短時間に多人数の測定が可能
- 3つの温度が測れます(体温計、温度計、室温表示)



イエロー

ピンク

非接触式

肌に触れず
衛生的

はやい・簡単

約1秒

測定

ピツ



製品紹介動画

製品情報は以下のQRコードからチェック



非接触体温計でこピツとの正しい使用方法

でこピツと UT-701 の使い方、
正しく測るためのポイントをご案内しています



非接触体温計でこピツとのご紹介使用方法

本誌でご紹介できなかった特長をご案内しています

型名	UT-701
販売名	皮膚赤外線体温計 UT-701
希望小売価格	オープン価格
JANコード /商品コード	イエロー : 4981046201292 / UTR-701A-JC1 ピンク : 4981046201308 / UTR-701A-JC2
検温方式	赤外線式
測定部位	皮膚(額中央部)
表示範囲	体温: +34.0℃～+42.2℃ 温度: -22.0℃～+80.0℃
温度精度	体温計モード: ±0.2℃(+36.0℃～+39.0℃) それ以外は±0.3℃ 温度計モード: ±0.3℃(+22.0℃～+42.2℃) -22.0℃～+21.9℃、 +42.3℃～+80.0℃の間は±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値
機能	体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、 ブザー音ON/OFF切替、25メモリ
電源	CR2032 リチウムボタン電池1個(DC3 V)
電池寿命	2,000回
使用温湿度	+10℃～+40℃ 15%RH～90%RH
保存温湿度	-20℃～+50℃ 95%RH以下
外形寸法	幅46×奥行き40×高さ81(mm)
本体質量	約60g(電池含む)
付属品	保護用キャップ、CR2032 リチウムボタン電池1個(お試し用)、 取扱説明書(保証書付)、添付文書

パルスオキシメータ

管理医療機器 特定保守管理医療機器

パルスオキシメータ

UP-200

医療機器認証番号:304AHBZX00004000

オープン価格

- 測定状態が良好かの判断に役立つPI値表示機能
- オートパワーオフ機能
- 表示切替機能(ディスプレイ4方向に自動切換え)
- ケース・ストラップ付き
- 簡単・シンプル操作 指を入れて電源を入れるだけ



製品紹介動画

詳細情報は以下のQRコードからチェック




パルスオキシメータ
UP-200 (Pulse Pro) 紹介動画
測定時の注意事項などをご案内



どんな角度でも見やすく自動回転



正確な測定のためのポイント

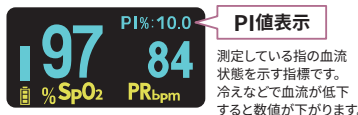

PI値表示
測定している指の血流状態を示す指標です。冷えなどで血流が低下すると数値が下がります。

PI値表示があることで
測定状態が良好かの判断に役立ちます。



持ち運びにも便利

型名	UP-200
販売名	パルスオキシメータ UP-200
希望小売価格	オープン価格
JANコード	4981046050425
本体サイズ	幅32×奥行58×高さ35 (mm)
本体質量	約50 g (電池含む)
表示	LCDディスプレイ
表示内容	酸素飽和度 (SpO ₂)、脈波数 (PR)、 脈拍強度 (棒グラフ)、脈波形、PI値、電池残量
方式	2波長吸光度法
測定範囲	酸素飽和度0 %～100 % (但し表示は99 %まで)、 脈波数30 拍/分～250 拍/分
測定精度	酸素飽和度±2 % (70 %～100 %)、 脈波数±2 拍または±2 %の大きい方
電源	単4形アルカリ乾電池2個 (DC3 V)
使用温湿度範囲	+10 °C～+40 °C、≤75 %RH
保管温湿度範囲	-40 °C～+60 °C、≤95 %RH
付属品	単4形アルカリ乾電池2個 (お試用)、ケース、 ストラップ (50 cm)、取扱説明書

- 在宅でパルスオキシメータを利用する際の注意点 (医療用途での自己利用はできません) ①医師、医療従事者及びその指示を受け使用法の説明を受けた者が使用すること。②医師の指導なく、パルスオキシメータの数値によって疾患の自己判断を行わないこと。③低酸素血症の兆候による受診判断等に関しては、医師よりその機器を使った受診判断指導を受けた上での使用が必要です。
- ④医師への適切な情報提供のため、表示された数値だけでなく、測定時の状況、体調その他自覚症状、脈拍数や脈波レベル等の同時に取得されている数値やエラー表示等併せて伝える必要があります。
- 使用及び取扱い上の注意事項 ①マニキュア、付け爪、ジェルネイル等をつけている場合は、外して測ること。②取扱説明書を読んで正しく装着し、正しい位置で測定すること。③測定するときは体や機器を動かしたりしないこと。④脈動が弱くなっているとき、血圧が低いときには不正確になることがあります。⑤一酸化炭素中毒や喫煙直後には不正確になるおそれがあります。⑥周囲の光 (照明灯、蛍光灯、強い直射日光等) の影響を受ける環境にある場合は、不正確になるおそれがあります。
- 安全性に関する記載 ①長時間の装着は低温やけどや皮膚炎等の恐れがあるため、連続装着は避けること。②有害事象例: 低温やけど、痛み、アレルギー反応、皮膚炎、かぶれ、血行障害。

活動量計



Bluetooth®

リストバンド型 ライフレコーダー2

UW-303BLE オープン価格

歩数

消費カロリー

睡眠時間

リストバンド型 ライフレコーダー3

UW-331BLE オープン価格

歩数

消費カロリー

睡眠時間

脈拍数

安静時脈拍数

IHB回数



型名	UW-303BLE	UW-331BLE
品名	リストバンド型 ライフレコーダー2	リストバンド型 ライフレコーダー3
JANコード	4981046306843	4981046578707
商品コード	UW-303LA-JC1EL	UW-331LA-JC1EL
外形寸法	幅16.2×奥行227×高さ11.3 (mm)	
本体質量	約16 g	
通信方式	Bluetooth® Ver.4.2 LE	
電源	リチウムイオン電池 (DC3.8 V)	
準電池持続時間	約10日	約5日
希望小売価格	オープン価格	



病院向けから家庭向けまでを
手掛ける血圧計メーカーです

株式会社エー・アンド・デイは、1977年創業以来、血圧計開発を
続けてきました。家庭向け血圧計は、病院向け製品の開発での
経験を生かした測定技術を搭載しています。



家庭向け血圧計



全自動血圧計



24時間携帯型自動血圧計

お客様相談センター

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

0120-342-043

月～金曜日(弊社休業日を除く)9:00～12:00/13:00～17:00



お問い合わせ
フォーム

⚠ 安全に関するご注意

測定結果をもとに自己判断で治療しないでください。

薬物の服用および治療については医師の指示に従ってください。

自己判断は病気の悪化につながる場合があります。

- お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
- 安全にお使いいただくため、ご使用時には取扱説明書を必ずお読みください。

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Incの登録商標です。

Nマークは、NFC Forum, Inc. の米国その他の国における商標または登録商標です。



エコプロダクツ認定ラベル

環境配慮性に優れた製品を自社認定する「A&Dホロンエコプロダクツ認定制度」を導入し、
認定基準を満たした製品に「エコプロダクツ認定ラベル」を付与しています。



AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋 3-23-14

<https://www.aandd.co.jp>