

調剤薬局 限定販売

快適・カンタン  
**血圧計**

やさしさ、たくさん

快適・カンタン血圧計シリーズ



調剤薬局でお求めください。

# ご家庭での血圧測定のすすめ

血圧は、食事や運動、ストレス、気温の変化など様々な要因で変動しています。

日頃から血圧を測定し記録することで、血圧の変化や平均値でおおよその平常値を知ることができ、病気の早期発見や合併症を抑える生活改善に役立ちます。また、治療を考える上で重要な資料にもなります。血圧の薬を飲まれている方は薬の効果を確認できます。

朝方に特に高くなる早朝高血圧は、脳卒中や心筋梗塞の発症が、血圧の正常な人に比べ高くなります。そこで、医師は起床時の血圧を重要視しています。起床時と就寝前の血圧測定を毎日続けることをおすすめします。

## 家庭血圧の目安

|              |               |
|--------------|---------------|
| 高血圧：最高 135以上 | 正常血圧：最高 125未満 |
| 最低 85以上      | 最低 80未満       |
| (mmHg)       | (mmHg)        |

日本高血圧学会「家庭血圧測定条件設定の指針」より




# 上腕式血圧計 UA-1000シリーズ

やさしさ、使いやすさを  
コンパクトサイズに仕上げた血圧計

快適・カンタン  
血圧計

× 正確測定

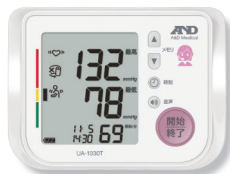

- 大型表示をコンパクトサイズに
- クリップ型、先進の『痛くないカフ』  
(UA-1030T/1020B)
- 音声で、いろいろお知らせ『おしゃべり血圧計』  
(UA-1030T)
- 信頼の測定チェック機能(不規則脈・ゆる巻き・体動検出)



## メディカル品質

病院向け血圧計メーカーが作る、精度・品質。

エー・アンド・デイの  
血圧計

3つの安心



あんしん  
1

### 調剤薬局で買うから安心!

頼りになる薬剤師さんが親切・相談接客

あんしん  
2

### 3年保証付きで安心!

調剤薬局限定販売血圧計は3年保証付き

あんしん  
3

### 引き取りサービスで安心!

万が一故障の場合、自宅まで血圧計を引き取り

音声で  
いろいろ  
お知らせ

# UA-1030T

測定は、表示と音声でお知らせ、  
目と耳で確認できて安心



音声お知らせ



ACアダプタ付

医療機器認証番号 224AHBZX00019000  
管理医療機器



大型表示



痛くないカフ

おまかせ  
スピード測定

血圧レベル  
表示

体動検出  
表示

不規則脈(IHB)  
を検知

カフゆる巻き  
チェック

90データ  
メモリ

## おすすめ機能

### おしゃべり血圧計 ～音声お知らせ～

測定値や、血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報をお話します。測定値を目と耳で確認ができて安心です。

おはようございます。

お疲れ様でした。



いろいろ  
お知らせします。

体調は  
いかがですか。

減塩、適度な運動  
を心掛けましょう。

・音声「切」と音量  
6段階設定

・音声内容「語り」と  
「標準」様式切替

### 痛くないカフ ～先進の“3Dカフ”～

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことなく、痛くなりません。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。

カフ内布に  
シワがよらない



痛くないカフ



従来のカフ



カフ  
ゆる巻き  
マーク

カフがゆるく巻かれて  
いると点灯します。

最新型



## 付属品

専用ACアダプタ(TB-233)/お試用乾電池(単3形4本)/収納ケース/  
血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書





# UA-1020B

片手で簡単に巻けるクリップ型カフ  
経済的なACアダプタ付



医療機器認証番号 224AHBZX00018000  
管理医療機器

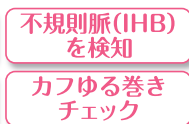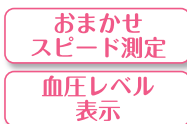

## おすすめ機能

### 痛くないカフ ～先進の“3Dカフ”～

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くなりません。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。

カフ内布に  
シワがよらない



痛くないカフ



従来のカフ



カフ  
ゆる巻き  
マーク

カフがゆるく巻かれて  
いると点灯します。

最新型



### 血圧レベル表示 ～測定値の分類が一目でわかる～

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。



### 経済的なACアダプタ付

コンセントから電源がとれて経済的  
小型・軽量(約62g)、コード長さ160cm



## 付属品

専用ACアダプタ(TB-233)/お試用乾電池(単3形4本)/収納ケース/  
血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書



# UA-1020G

腕にフィット、しっかり巻ける、からだにやさしい“脱アレルギーカフ”



医療機器認証番号 224AHBZX00018000  
管理医療機器



おまかせ  
スピード測定

血圧レベル  
表示

体動検出  
表示

不規則脈(IHB)  
を検知

カフゆる巻き  
チェック

90データ  
メモリ

## おすすめ機能

### 血圧レベル表示 ～測定値の分類が一目でわかる～

測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140以上・最低90以上  
正常高値血圧……最高130～139  
……………最低85～89  
正常血圧……………最高130未満・最低85未満  
(mmHg)

高血圧  
正常高値血圧  
正常血圧



### 脱アレルギーカフ ～体にやさしい～

金属・天然ゴム アレルギー対策、皮膚炎やジン麻疹などのアレルギー症状の原因となる、金属・天然ゴムを使用していません。

業界初 樹脂リングカフ



カフ  
ゆる巻き  
マーク

カフがゆるく巻かれていますと点灯します。

## 付属品

お試し用乾電池(単3形4本)/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書




# UB-510 手首式

シンプルで使いやすい手首式  
巻きやすいワンタッチカフ



医療機器認証番号 21700BZY00458000  
管理医療機器

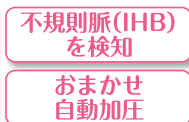


※糖尿病、肝臓病、腎臓病、動脈硬化など末梢循環器障害のある方は、上腕と手首での測定値に差が出ることがあります。

## おすすめ機能

### 血圧レベル表示 ～測定値の分類が一目でわかる～


測定した値がWHOの血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上にバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140・最低90以上  
正常高値血圧……最高130～139  
                          最低85～89  
正常血圧……………最高130・最低85未満  
                          (mmHg)

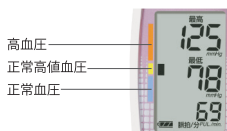

### 不規則脈(IHB)検知 ～正確測定に役立つ～

脈が乱れると血圧も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知、脈のゆらぎチェックや測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。

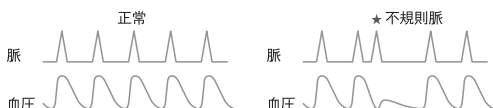

## 付属品


お試し用乾電池(単4形2本)/収納ケース/血圧管理手帳/取扱説明書/添付文書

# おすすめ機能

## 早くて快適な おまかせスピード測定

お使いになる方に最適な加圧・排気を自動調整して測定時間を短縮します。当社従来品の約半分の時間で測定できます。

カフの締め付け時間が短いので、腕の負担を軽減でき快適です。

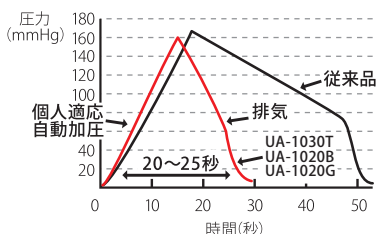


※UA-1030T、UA-1020B、  
UA-1020Gに内蔵

## 測定値の分類が一目でわかる 血圧レベル表示


測定値がWHO(世界保健機関)の血圧分類でどの領域にあるかを6段階に分けて、液晶上のバーで点滅表示します。

高血圧……………最高140以上・最低90以上  
正常高値血圧…最高130~139  
……………最低85~89  
正常血圧……………最高130未満・最低85未満  
(mmHg)

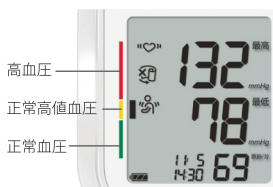

## 正確測定のための 不規則脈(IHB)検知

脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。

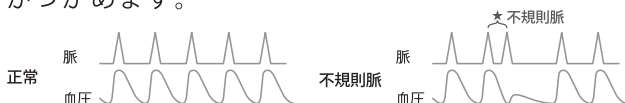



# 家庭血圧の正しい測り方

血圧は、一日の中で体の動きや感情の変化、環境などに影響され常に変動しています。また、腕帯の巻き方や姿勢、測定中の体動などで血圧値は変動します。血圧を測定する際は、測定条件を一定に、血圧計の正しい使い方を心掛けてください。

## 血圧を測る前に



※朝食・薬を飲む前

起床後1時間以内、排尿を済ませ  
座位で1～2分安静に




就床前、排尿を済ませ  
座位で1～2分安静に

食事、飲酒、喫煙、入浴等の直後は血圧は変動しています

## 家庭血圧 測定ポイント

- 朝・夜それぞれ少なくとも1回
- 長期間、継続する
- 測定値は、すべて記録する

※測定は、条件を一定にする

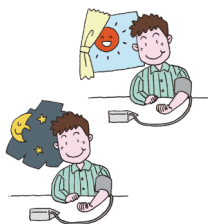

## 環境にやさしいRoHS指令対応

欧州連合による危険物質に関する制限(RoHS指令)に順守し、特定有害物質の指定値を超えない製造を行っています。



# 血圧計仕様

音声でいろいろお知らせ

| 型式名            | UA-1030T                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品外観           |                       |
| 価格             | オープン価格                                                                                                 |
| ワンプッシュ操作       | ○                                                                                                      |
| 血圧・脈拍同時表示      | ○                                                                                                      |
| 血圧レベル表示        | ○                                                                                                      |
| カフゆる巻きチェック     | ○                                                                                                      |
| 体動検出表示         | ○                                                                                                      |
| 不規則脈 (IHB) 検知  | ○                                                                                                      |
| おまかせ測定         | ○                                                                                                      |
| 平均値表示          | ○                                                                                                      |
| メモリ数 (最新)      | 90                                                                                                     |
| その他            | 音声お知らせ                                                                                                 |
| 腕帯タイプ          | クリップ                                                                                                   |
| 適応腕・手首周囲長 (cm) | 17～32cm                                                                                                |
| 電源             | 単3形乾電池4本<br>またはACアダプタ                                                                                  |
| 電池寿命 (アルカリ乾電池) | 約700回                                                                                                  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) | 140×105×60mm                                                                                           |
| 本体質量 (乾電池を除く)  | 約300g                                                                                                  |
| 付属品            | 専用ACアダプタ (TB-233) /<br>お試用単3形乾電池4本 /<br>収納ケース / 血圧管理手帳 /<br>取扱説明書 / 添付文書                               |
| JANコード         | <br>4 981046 021302 |

## 痛くないカフ～先進の“3Dカフ”～

締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚をはさむことがなく、痛くなりません。立体成形、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。

カフ内布にシワが  
よらない



痛くないカフ 従来のカフ

最新型



カフゆる巻きマーク  
カフがゆるく巻かれていると点灯します。

## 脱アレルギーカフ～体にやさしい～

金属・天然ゴムアレルギー対策、皮膚炎やジン麻疹などのアレルギー症状の原因となる、金属・天然ゴムを使用していません。

業界初 樹脂リングカフ



カフ  
ゆる巻き  
マーク

カフがゆるく巻かれて  
いると点灯します。

新型カフ&ACアダプタ付

見やすい大型表示

外出先でも測りたい

| UA-1020B                                                                                              | UA-1020G                                                                                               | UB-510                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                       |                       |
| オープン価格                                                                                                | オープン価格                                                                                                 | オープン価格                                                                                                 |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | —                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | —                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| ○                                                                                                     | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| 90                                                                                                    | 90                                                                                                     | 30                                                                                                     |
| 痛くないカフ                                                                                                | 脱アレルギーカフ                                                                                               | 小型軽量                                                                                                   |
| クリップ                                                                                                  | ソフト                                                                                                    | クリップ                                                                                                   |
| 17~32cm                                                                                               | 22~32cm                                                                                                | 13.5~21.5cm                                                                                            |
| 単3形乾電池4本<br>またはACアダプタ                                                                                 | 単3形乾電池4本<br>またはACアダプタ                                                                                  | 単4形乾電池2本                                                                                               |
| 約1,000回                                                                                               | 約1,000回                                                                                                | 約400回                                                                                                  |
| 140×105×60mm                                                                                          | 140×105×60mm                                                                                           | 62×70×56mm                                                                                             |
| 約285g                                                                                                 | 約285g                                                                                                  | 約83g                                                                                                   |
| 専用ACアダプタ (TB-233) /<br>お試用単3形乾電池4本 /<br>収納ケース/血圧管理手帳 /<br>取扱説明書/添付文書                                  | お試用単3形乾電池4本 /<br>血圧管理手帳/取扱説明書<br>/添付文書                                                                 | お試用単4形乾電池2本 /<br>収納ケース/血圧管理手帳<br>/取扱説明書/添付文書                                                           |
| <br>4 981046 021227 | <br>4 981046 021203 | <br>4 981046 025126 |

## 付属品

### 便利な…血圧管理手帳

測定データがきれいにまとめられます。グラフ表と、朝・夜分け表の2種類を掲載の血圧管理手帳です。



### 経済的な…ACアダプタ

(UA-1030T/UA-1020B:標準付属)

(UA-1020G:別売)

コンセントから電源がとれて経済的。  
小型・軽量(約62g)のACアダプタです。



ACアダプタ(別売)

AX-TB233 標準価格¥1,500(税抜)

(コード長さ 160cm)

JANコード:4981046000116



家庭と病院をつなぐ

## エー・アンド・デイは・・・

医療、測定機器の総合メーカーです。全国の主要医療機関で使用されている医科向け血圧計で培われた技術開発をもとに多くの家庭向け血圧計を製造、販売しています。家庭向け血圧計を世界各国に輸出、販売をするトップクラスのメーカーです。

(設立1977年・東証株式第一部上場)



生体情報モニタ



全自動血圧計

修理・商品に関するお問い合わせは  
エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00/13:00～17:00



### 安全上のご注意

- 測定結果をもとに、自己判断で治療しないでください。
- 腕部に重度の血行障害のある方は、必ず医師と相談の上、影響のないことを確認してからお使いください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋 3-23-14 TEL.03-5391-2566 (代)

札幌 011-251-2753 仙台 022-211-8051 名古屋 052-726-8761  
大阪 06-7668-3907 広島 082-233-0611 福岡 092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

血圧計のご購入は、かかりつけ調剤薬局で