

A&D

エーアンド・デイ
ベーシック・血圧計
UA-631D

押しやすい大型スイッチ、30データメモリ
血圧レベル・平均値表示
シンプルで使いやすい上腕式血圧計
モニター電池、収納ケース、血圧管理手帳付





血圧測定的重要性！

《家庭で血圧を測るメリットは》

わが国の高血圧者は、4,000万人と推定されています。高血圧は症状が出ないため放置する人が多く、糖尿病や肥満、高脂血症などと合併して心臓病や脳卒中になり、どうきや息切れなどの症状がでるようになってから気づくため、病状がかなり進行してしまっている状況です。

年一回の健診では、緊張から高めにすることが多く、一回の測定だけで判断はできません。

また、血圧は起床後、徐々に上昇して夕方にピークになりますが、早朝に特に高くなる「早朝高血圧」は、脳卒中や心筋梗塞へのリスクが高まるため、朝・晩、家庭での血圧チェックが重要です。病院では、分かりにくい白衣性や仮面高血圧、早朝高血圧の発見に役立ちます。そこで、

家庭での血圧チェックを普段からこまめに行ない、病気の早期発見や合併症の発症を抑える生活習慣の改善や治療を行うことをおすすめします。

早朝高血圧を見つけるために
家庭血圧を測りましょう。





ベーシック・血圧計 UA-631D

医療用具許可番号 11BY0051

オープン価格

- モニター電池、収納ケース、血圧管理手帳付

血圧レベル表示

測定値が高血圧か正常かの血圧分類がひと目でわかる! (WHO血圧分類、6段階分け)




30データメモリ・平均値表示

測定データを最新30回分まで記憶と平均値を表示

血圧分類が一目でわかる 血圧レベル表示

測定した値が、WHO(世界保健機構)の血圧分類でどの領域にあるかを、6段階分けて液晶上にバーが点滅、位置表示します。

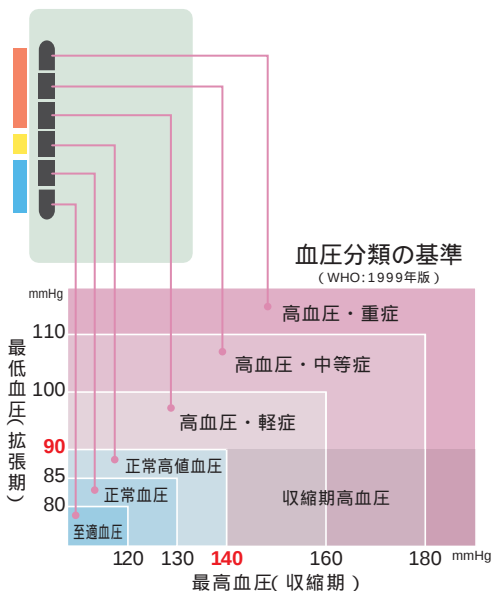


血圧
レベル表示



血圧分類の表示は、
最高血圧・最低血圧の測定値に対応した
各分類で高い方の分類表示が点滅します。


血圧・脈拍同時表示

最高・最低血圧値と脈拍数を同時に表示、
一目で確認、読み取れます。

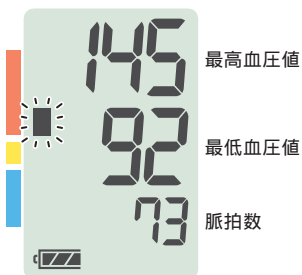

測定中の動きがわかる 圧力・バー表示

加圧開始と同時に圧力・バーが下から順に点灯を始め、
全点灯すると加圧は終了、減圧するにしたがいバーの
点灯数が減ってゆき測定終了後、血圧レベル・測定結果
表示に切り替わります。

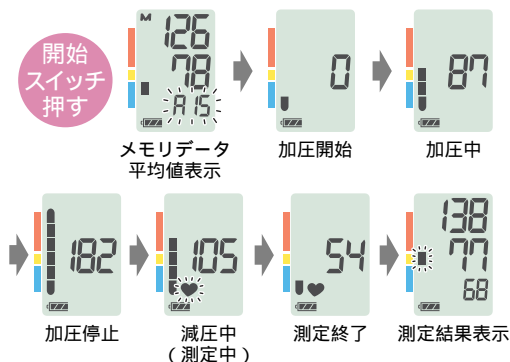

使いやすい工夫、いろいろ

操作は簡単 ワンプッシュ

カフを巻いて、スタート
スイッチを押すだけで、
測定からメモリまで自動


押しやすい

大型スイッチ



メモリデータ、平均値表示

測定データを最新30回分まで記憶
平均値と各メモリデータを表示

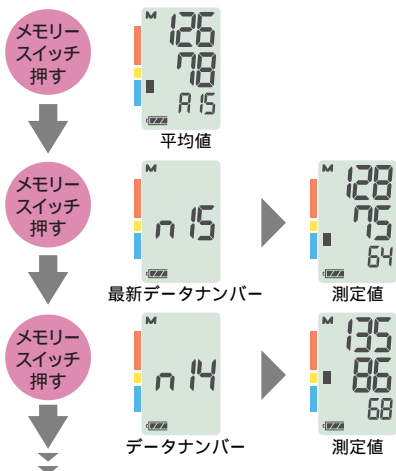

持ち運びに便利な

収納ケース付


毎日の血圧データが残せる

血圧管理手帳付



あなたの血圧は？

世界保健機構 (WHO) \ 国際高血圧学会 (ISH) では
1999年より、下図のように血圧分類を制定しています。

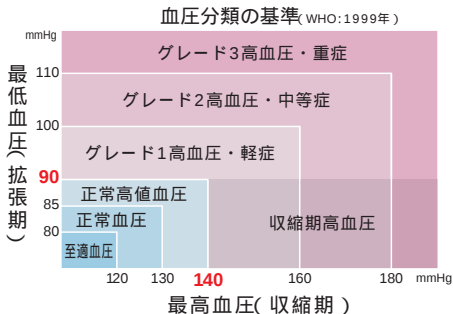


病院で140/90mmHg以上
家庭で135/85mmHg以上
このような方は高血圧です。

日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2004年度版

血圧は常に変動しています！

血圧は常に変動しており、1日のうちでも時間帯や季節、精神状態、身体状況により30～50mmHg変動することがあります。1回の測定値に一喜一憂せず、ご自分の平常値と変動傾向を知ることが大切です。

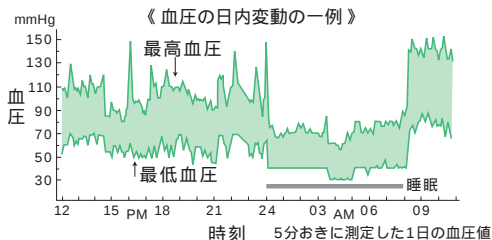

血圧、血圧計に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイ 健康機器相談センター

関東地区



フリーダイヤル

0120-514-016

関西地区



フリーダイヤル

0120-887-592

受付時間:月～金曜日 午前9:00～午後12:00 午後1:00～午後4:00

UA-631D 仕様

測定方式	オシロメトリック方式
表示	液晶デジタル方式
測定範囲	圧力0～280mmHg 脈拍40～200拍/分
精度	圧力±4mmHg 脈拍±5%
加圧方式	ポンプによる自動加圧方式
減圧	定降圧自動排気弁方式
排気	電磁弁による自動急速排気方式
電源	単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
電池寿命	約300回 マンガン乾電池使用
本体寸法	幅144×高55×奥行130mm
本体重量	約300g(乾電池のぞく)
付属品	モニター電池(単3形・4本) 血圧管理手帳、 収納ケース、添付文書、ソフトカフ、 取扱説明書

医療用具許可番号 11BY0051

* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

エー・アンド・デイは測定機器の総合メーカーです。
病院向けの医療機器等も多種製造しています。

<http://www.aandd.co.jp>



AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566(代)

札幌011-251-2753 仙台022-211-8051 東京北048-592-3111
名古屋052-701-5681 大阪06-4805-1207 広島082-233-0611
福岡092-441-6715



● お買い上げは信用ある当店へ