

# 吸入療法は


のど・鼻を温め潤すことで  
不快感を改善します。

空気の乾燥や寒気で、のど・鼻の粘膜や繊毛の働きが衰え、ウィルス・細菌・花粉・ホコリなどの外部から侵入物を排泄する能力が落ちます。そこで、吸入療法により、患部を水または生理食塩水で温め(加温)、潤い(加湿)を与えて、のど・鼻の不快感を改善します。


吸入効果を上げるには、  
温度と粒子径が重要です。

最適温度 **43℃**

細胞がやけどせずに効果を最大限、引き出せる温度。  
温熱により、ウィルスの産出量やヒスタミンの遊離が抑えられます。

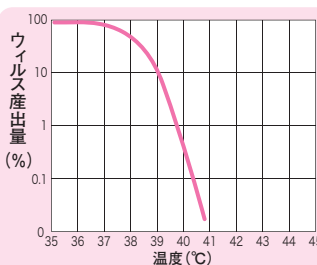

温度によるウィルスの産出量の変化  
Bacteriol. Rev. Lwoff A. 23:109~124(1959)

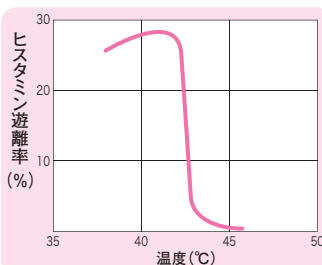


ヒスタミン遊離に及ぼす温熱の影響  
J. Physiol. (London) Mongar J. L. & Schild H. O. 135:320~338(1957)

最適粒子径 **5マイクロメートル**

粒子径の大きさにより、到達部位は左右され、小さいほど深部の末梢まで到達、沈着します。

5マイクロメートルの粒子径は、  
鼻咽腔、下咽頭、喉頭まで  
まんべんなく沈着します。

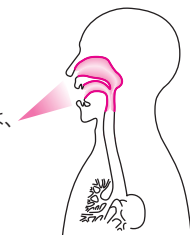

吸入粒子径による到達部位  
出典：馬場 駿吉「エアロゾル吸入療法」1989

薬を使わないので、  
妊婦の方、子供、高齢の方にご使用いただけます。

## 別売品



吸入マスク  
UN-133-01  
標準価格¥600  
(税込価格¥630)  
JANコード 4981046000314



吸入液カップ  
UN-133-02  
標準価格¥600  
(税込価格¥630)  
4981046000321



送風ファン  
UN-133-04  
標準価格¥300  
(税込価格¥315)  
4981046000345



計量スプーン  
UN-133-05  
標準価格¥300  
(税込価格¥315)  
4981046000352



計量カップ  
UN-133-06  
標準価格¥300  
(税込価格¥315)  
JANコード 4981046000369



吸入マスクカバー  
UN-133-07  
標準価格¥300  
(税込価格¥315)  
4981046000376



ヒーターガード  
UN-133-08  
標準価格¥300  
(税込価格¥315)  
4981046000383

## 仕様

電源：AC100V 50/60Hz 外形寸法：幅100×奥行166×高266mm  
消費電力：90W 本体質量：1500g  
霧化量：1.8mL/分 付属品：吸入マスク、吸入マスクカバー、  
霧化粒子径：約5マイクロメートル 計量カップ、計量スプーン、  
タイマー：1回約5分間 本体保護カバー、取扱説明書

\* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

## 吸入器に関するお問い合わせは

(株)エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

## 安全に関するご注意

- 喘息など呼吸器に疾患のある方、治療中の方は必ず医師に相談の上、ご使用ください。
- 薬剤を用いての吸入療法に使用しないでください。

エー・アンド・デイは測定機器の総合メーカーです。  
病院向けの医療機器等も多機種製造しています。

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566(代)  
札幌011-251-2753 仙台022-211-8051 東京北048-592-3111 名古屋052-701-5681  
大阪06-4805-1207 広島082-233-0611 福岡092-441-6715

<http://www.aandd.co.jp>

管理医療機器

製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ  
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243  
TEL.048-593-1434

UN-133P



●ご購入は信用ある当店へ

**AND**  
A&D Medical

エー・アンド・デイは  
医療・測定機器の総合メーカーです。

管理医療機器

超音波温熱吸入器 UN-133P **口鼻両用**

ホットシャワー **PLUS**



約**43℃・5μm**  
ソフトなミストで  
のど・鼻が  
スツキリ!

超音波式だから  
生理食塩水が使えます。  
**生理食塩水で  
スムーズ吸入**

水道水・生理食塩水専用  
\* 薬液はご使用になれません。



超音波温熱方式は  
**エー・アンド・デイ だけ!**  
使いやすさが違います。



## 超音波式だから...

生理食塩水が使える、刺激が少なくスムーズに吸入  
体液と同じ濃度なので、むせたり、ツーンとする刺激が少なく吸入ができます。

生理食塩水.....0.9%の塩水、水と塩で作れます。  
生理食塩水は、付属の計量カップと  
スプーンで簡単に作れます。



## 吸入器は...

1. 子供から大人まで家族で使えます。
2. 使い切りではなく、繰り返し使えます。
3. ランニングコストは微かな電気代だけ  
毎日1回5分使用、1年間で約63円

エコで経済的  
家族で使えます。



約**43℃・5マイクロメートル\***の  
ソフトなミストで、  
のど・鼻を温め、潤しスッキリ!

うがいでは届きにくい、  
のどの奥、鼻の奥に潤いを与えます。

\*1μm(マイクロメートル):1/1000mm



超音波温熱吸入器 UN-133P **口鼻両用**

# ホットシャワー PLUS

医療機器認証番号 222AHBZX00012000  
オープン価格

のど・鼻は、一年中潤いが必要です。

風邪

花粉  
アレルギー

乾燥

声の  
使い過ぎ

タバコの  
吸いすぎ

## 超音波式だから...

**クイックスタート 約15秒**

すばやく吸入が開始できます。

**動作音が静か**

夜でも廻りに気がねなく使用できます。

**お手入れが簡単、清潔**

本体と水タンク部が分かれるセパレート型で  
給排水、お手入れが簡単です。  
清潔に保管できるよう吸入マスクカバー付

**熱いお湯を使っていないので安心**

本体を傾けてもお湯ではなく水が滴ります。



**便利な機能**

- ブザー音でお知らせ
  - ・霧化開始・中間・終了時
  - ・霧化タンク内の水量不足時
  - ・本体と水タンク部 接続不確実の場合
- 持ち運びしやすい...取っ手付
- 動作中をお知らせする、光るスイッチ表示