ホットシャワー5	UN-135 仕様
方式	超音波方式
販売名	超音波温熱吸入器 UN-135
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	65 W
霧化量	[強]約1.8 ml/min、[普通]約1.2 ml/min
粒子径	約5 マイクロメートル
温熱吸入	あり
吸入液	水または生理食塩水
タイマー	1 回約5 分間
外形寸法	幅111×奥行188×高さ286 mm
本体重量	約1,100 g
定価	¥22,000 (税込)
医療機器認証番号	225AHBZX00022000
本体カラー	(ブルー) UN-135-B、(ピンク) UN-135-P
JANコード	(ブルー) 4981046311359、(ピンク) 4981046311380

ポケットシャワー	- UN-302 仕様
方式	超音波方式
販売名	ポータブル型超音波吸入器 UN-302
電源	単3アルカリ電池×2本(別売)、またはACアダプター(別売)
消費電力	約2.5 W
電池寿命	約2 週間 (1 回5 分/1 日3 回使用)
霧化量	0.5 ml/min
粒子径	約9 マイクロメートル
温熱吸入	なし
吸入液	水または生理食塩水
タイマー	1 回約5 分間
外形寸法	幅44.8×奥行41.7×高さ94 mm
本体質量	約60 g (電池含まず)
定価	オープン
医療機器認証番号	303AHBZX00025000
JANコード	4981046197182
別売品	ACアダプター (AX-TB299-JC) ¥2,200 (税込)

吸入マスク、ノズル等の付属品の追加購入やポケットシャワー用の ACアダプターの別売り品については、メーカーホームページを参照





http://link.aandd.jp/HHC-inhaler-option



●薬剤を用いての吸入療法に使用しないでください

# AD 株式 エーアンド・デイ

東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566 https://www.aandd.co.jp

修理・商品に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイお客様相談センター 無料通話 0120-514-016 受付時間:月~金曜日(土日・祝日・弊社休業日を除く)9:00~12:00/13:00~17:00

お買い上げは信用のある当店へ

エー・アンド・デイは 医療・測定機器の




医療機器メーカーの吸入器

# のどのうるおい

風邪・花粉の季節に 生理食塩水ミストの新習慣





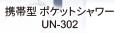



卓上型 ホットシャワー5 UN-135

PHOTO:ウユニ塩湖

南米ボリビアにある塩の大平原。雨季には表面に水が張り、鏡のように景色を映し出す絶景が見られます。









こんな方におすすめ



# 



- 家でしっかり吸入したい方に。
- 暖かくて気持ちがいいミスト。
- ・強・普通の切り替えができて、 1回約5分のたっぷり吸入。

# 新習慣

帰宅後は、手洗い! そしてホットシャワー

### クイックスタート15 秒。

スイッチを入れたら即スタート。あなたの、 のど・鼻を守ります。動作音も静かで テレビを見ながらの使用も可能です。





### 暖かくて気持ちいい

約43 ℃に温めたミストが、 のど・鼻を優しく温め潤します。 熱いお湯を使っていないので やけどの心配がなく安心です。

吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、ロノズル、鼻ノズル、 霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、 クイックガイド、添付文書 温熱吸入療法が、 はな・のどに いいのはどうして?




加湿、加温することにより、のど・鼻の不快感を改善。

# 繊毛の働き

のどや鼻の粘膜にある「繊毛」には、ウイルスなどの異物を キャッチして、体外へ排出する働きがあります。

繊毛の弱点は「寒さ」と「乾燥」です。吸入療法は、 のどや鼻を乾燥から守り 温めることで、繊毛の 働きを活発にします。

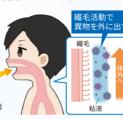

温めながら潤わせることで、のどや鼻の不快感がやわらぎます。 カゼや花粉などで炎症を起こしている「のど」や「鼻」の粘膜に 十分なうるおいを与えることで繊毛の働きが活発化します。

ホットシャワー 5 は、霧化したミストを 約43 °Cに温めます。

## 温度と吸収の効果

# 吸入の最適温度は43℃

細胞がやけどせずに、 効果を最大限に引き出せる 温度として、**43** ℃を 設定しました。

43%



# 共通の特長

超音波だから、 生理食塩水が使えて、 むせずにスムーズな吸入。

A&Dの人にやさしいテクノロジーが あなたの快適な毎日をサポートします。

### 吸入効果を上げるには、温度と粒子径が重要です。

UN-135 約5 マイクロメートル UN-302 約9 マイクロメートル

# 粒子径と到達部位

### のどの奥にしっかり届く粒子径5~10マイクロメートル

ミストに触れたときに、顔や手に水滴を感じたら、10 マイクロメートルよりも大きい粒子径。大きい粒子は使用時に顔が濡れてしまったり、のどの奥の必要部位にまんべんなく到達しません。

粒子の大きさにより到達 部位は左右され、小さい ほど深部の末梢気道まで 到達、沈着します。 約5~10 マイクロメートル の粒子が、うがいでは届 かない、のど・鼻の奥まで しっかり届きます。



# 出典:馬場 駿吉ら「エアロゾル吸入療法」1989

### 生理食塩水の作り方

生理食塩水の作り方はカンタン。 適量の水に付属の計量スプーンスリキリ1杯の食塩を入れるだけ。

UN-135

UN-302



生理食塩水を使うと、むせずにスムーズに吸入できます。 水道水ではむせてしまう方でも、体液と同じ濃度の生理食塩水ならスムーズに 吸入ができます。 やさしさと使いやすさを考えたA&Dのテクノロジーです。

1 マイクロメートル (μm)=1/1,000 mm

# UN-302の特長

# どこでも

※UN-302 は温熱機能がありません。

# 手軽に持ち運べるポケットサイズ。



- ・満員電車や職場など、人混みに入るとき。
- ・集団行動することが多い小中学生や、 体調を崩しやすいご高齢の方。
- ・旅行や出張時のお供に。 乾燥しがちな飛行機の機内など、 移動中ののどのケアに。

# 新習慣

いつでもどこでも ポケットシャワー

# 携帯に便利なポケットサイズ

いつでもどこでも吸入できます。 外出先でもデスクでも、いろいろな シーンで大活躍。





# 丸洗い可能

給水ユニットを取り外して丸洗い。 いつも清潔さを保つができます。

給水ユニット、保護キャップ、吸入マスク、マスクアダプター、計量スプーン、 収納袋、取扱説明書、添付文書

