

病棟・透析

Discover Precision

A&D
A&D Medical

リクライニングスケール

AD-6042

取引・証明用
検定付

精度等級
3級



BMI計算／外部出力
標準装備した表示器



リクライニングスケール


AD-6042 標準価格 ¥725,000 (税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

ベッドサイドまで移動し、寝たままで、座ったままで体重測定ができます。
精度等級も3級にワンランクアップした検定付き体重計です。


車イスからストレッチャーに 用途に適した姿勢に調整ができます。

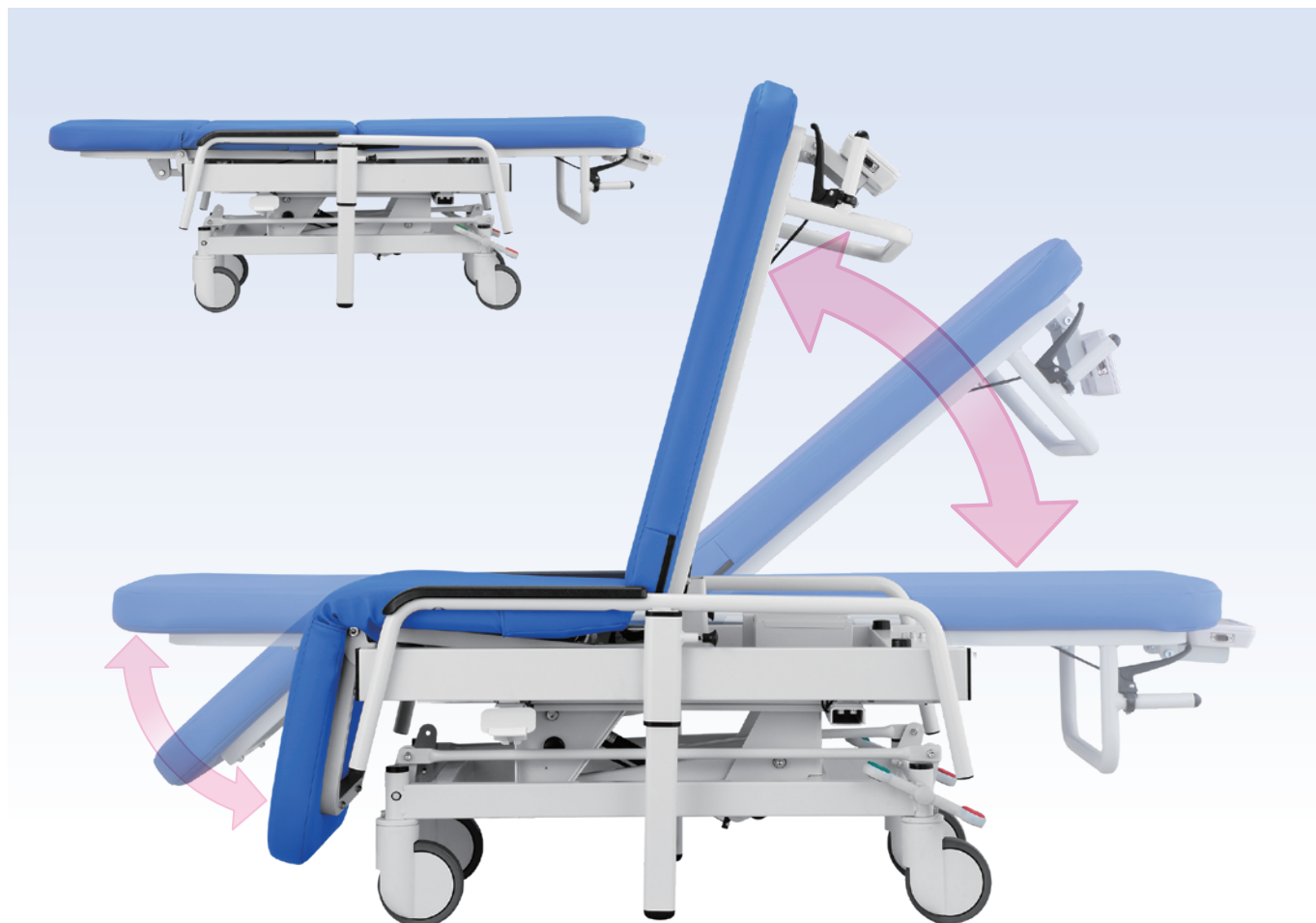

✓ 測定時もしっかりサポート

座面に8度の座角を付けることで、安定して座ることができます。

また、肘かけの高さも2段階に調節可能。高さも前機種より10 cm高くすることで安全面も向上しました。

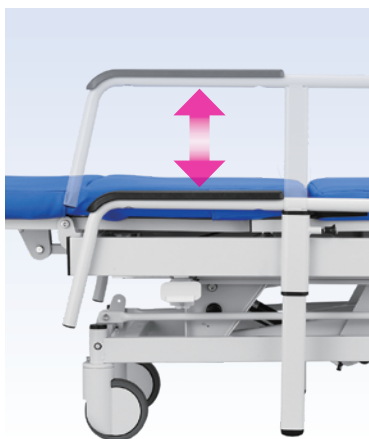

使いやすさもさらに向上

✓ 移動しやすい

手すりの高さ：

ベビーカーなどを参考にハンドルの高さを
どなたでも動かしやすい100 cmに設定




消費電力削減：

42 %の消費電力削減を実現(前機種比較)
移動に便利な電池使用時間が増えました。
さらに充電電池(別売)も装着可能。


足元の空間確保：

ハンドル形状の改善とキャスターロックを外側に配置することで、
移動時に使用者の脚がぶつからないように足元の空間を確保しました。

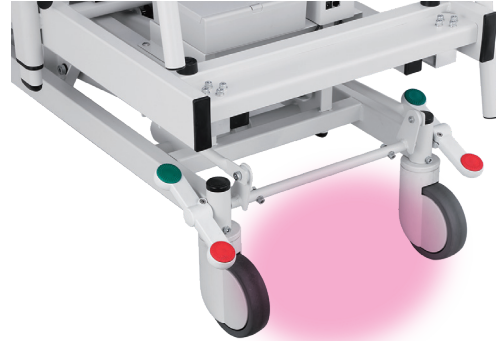

キャスターロック：

ストレッチャー時でも、ロックしやすいように両側面に集中ロックを設置
4輪ロック、フリー、走行制御と3つの機能を設定可能です。

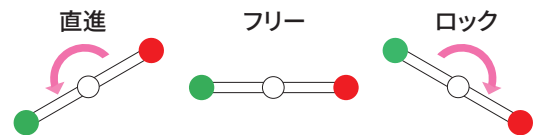

✓ 測定しやすい

表示器角度調節機能：

側面にあった表示器を頭側に設置
測定者の身長によってストレッチャー時に
見やすく角度調整をすることが可能です。




高さ調節：

ベッドや車イスからの移乗の際、ベッドや座面に合わせて高さを調整
することが可能です。


(人が乗っている状態では、高さ調整できません)



外形寸法図 (本体) 単位:mm

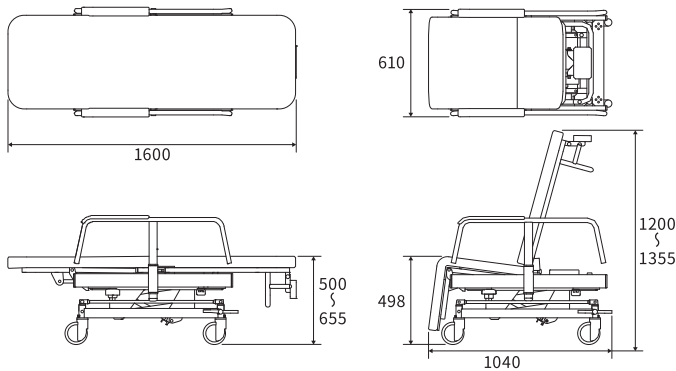

外形寸法図 (椅子形状) 単位:mm

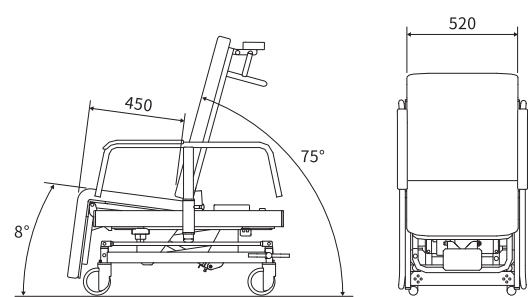

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807 m/s ² ~ 9.803 m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 m/s ² ~ 9.800 m/s ²
3	宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 m/s ² ~ 9.798 m/s ²
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都 (八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 m/s ² ~ 9.796 m/s ²
5	長野県、東京都 (全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県 (薩摩地方に限る)	9.798 m/s ² ~ 9.794 m/s ²
6	鹿児島県 (薩摩地方を除く)	9.794 m/s ² ~ 9.790 m/s ²
7	沖縄県	9.792 m/s ² ~ 9.789 m/s ²

※ 2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

仕様

品名	リクライニングスケール	
型名	AD-6042	
精度等級	3級 (※ご使用地域をご指定ください)	
承認番号	第D1418号	
ひょう量	150 kg	
目量	100 g	
最小測定量	2 kg	
最大減算風袋量	99.9 kg以下	
使用温湿度範囲	温度: +5 °C ~ +35 °C 湿度: 85 %RH以下 (但し結露なきこと)	
表示	7セグメント液晶表示	
表示部主な機能	BMI計算機能、実風袋機能、衣服引き機能 (プリセット風袋機能) オートパワーオフ機能、時計機能表示 (外部出力)	
寸法	全高	ストレッチャ時: 500 mm-655 mm イス時: 1200 mm-1355 mm
	全幅	610 mm
	奥行	ストレッチャ時: 1600 mm イス時: 1040 mm
	座幅	520 mm
	座奥行き	450 mm
	座面角度	8°
リクライニング角度	0° ~ 75°	
材質	フレーム	鋼管フレーム
	表生地	塩化ビニール
外部出力	RS-232C 1ch (D-SUB 9P) ※プリンタ接続時使用	
キャスター	Ø125 mm (トータルロックタイプ)	
本体質量	58 kg	
電源	単2形アルカリ乾電池×6本、ACアダプタ AX-TB294	
付属品	専用ACアダプタ、取扱説明書	
標準価格(税抜)	¥725,000	
商品コード	AD6042	
JANコード	4981046308588	

オプション



ACアダプタ
AX-TB294
¥4,500 (税抜)
JANコード: 4981046305419
※ADプリンタユニット未装着時のACアダプタです。



ADプリンタユニット
AD-PR580
¥55,000 (税抜)
JANコード: 4981046713603
※プリンタの取付には、別途プリンタ取付キット
AD-PR580-009が必要です。

NO IMAGE

プリンタ取付キット
AD-PR580-009
¥20,000 (税抜)
JANコード: 4981046197359



AD-PR580用ACアダプタ ※AD-PR580付属品
AS-BLS-120W
¥15,000 (税抜)
JANコード: 4981046713689



AX-BLS-120W用ACコード ※AD-PR580付属品
AS-ACS-120A
¥2,700 (税抜)
JANコード: 4981046713696



プリンタ用紙 (5巻/箱)
AX-PP147-S
¥5,000 (税抜)
JANコード: 4981046711340

NO IMAGE

プリンタ専用充電電池
AS-BK-2MGC
¥4,000 (税抜)
JANコード: 4981046197670
※6本必要になります

NO IMAGE

充電式電池専用充電器
AS-BQ-CC25
¥8,500 (税抜)
JANコード: 4981046197397

製造販売業者

AND 株式会社 エーアンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
※ 本カタログは事業者向けです。

*AD6042-ADJC-03-PR4-23600