

Discover Precision

AND
A&D Medical

ストレッチャースケール

AD-6051A

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

救急

透析

病棟

NST

老健



ガートル棒、酸素ボンベ金具は、オプションです。
また、酸素ボンベ、減圧弁、輸液バック等はご使用
イメージのために取り付けましたもので、当社では
取扱をしておりません。



表示部(プリンタ内蔵)

寝た状態で安全に搬送、計量

ストレッチャースケール

取引・証明用
検定付

AD-6051A ¥880,000 (税抜)

患者の搬送や計量ができるストレッチャー型の検定付体重計。
病院・老健施設等の入所者の栄養ケアマネジメントやNST (栄養サポートチーム) 活動での
体重測定におすすめの体重計です。

寝台部高さ調整 高さ540 mm～940 mm

クランクを回すことで、寝台部の高さを約540 mm～940 mmまで無段階に調整ができます。



安全

キャスターータルロック機能

キャスターは、レバーのワンタッチ操作で4輪を
ロックすることができます。

前輪直進固定

4輪フリー

固定 (ブレーキ)



正確

薄型重量センサ

薄型・高性能の重量センサにより、計量台の厚みを薄くすることができ、
センサを計量台の四隅に使用することで、乗る位置にかかわらず、
バラツキがなく、高精度で正確な計量が可能となりました。



便利

風袋2メモリ

着衣などの重量を2つまで設定ができ、設定重量を引いた体重のみの表示が出せます。



プリンタ内蔵

プリンタは、表示器ケースに内蔵されていますので、ケーブル接続や出っ張ってジャマになる事はありません。測定者が体重値をメモする必要がなく、記録が残せます。

2022/11/ 1 12:00 72.9kg	2022/11/ 1 12:00 (N) 67.9kg (T) 5.0kg	2022/11/ 1 12:00 (N) 71.9kg (PT) 1.0kg
----------------------------	---	--

通常測定

風袋引き測定

プリセット風袋引き測定

(N) : 正味量 Net

総量から風袋量を差し引いた正味の質量です。
表示してある体重値は風袋量を差し引いてあります。


(T) : 風袋量 Tare

実際に測定した着衣などの質量です。

(PT) : プリセット風袋 Preset Tare

事前に把握している着衣などの質量を風袋設定した値です。

サイドガード

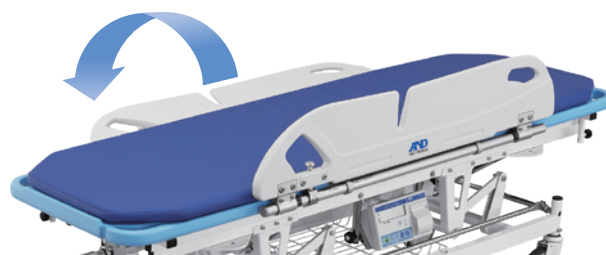

サイドガードをマットと平行になるように倒すことができるので、患者の移乗を安全に行うことができます。さらにオプションのスライディングマットSM-100を利用すれば更に操作性が向上します。

プリンタ内蔵表示器

見やすい角度に調整が可能です。また、電池交換も非常にスムーズ



酸素ボンベ金具

500 L対応 (オプション)



便利な小物入れ用カゴ付き

移送時にご利用いただけます。



オプション



酸素ポンベ金具
AD6051-03 ¥26,000 (税抜)
JANコード 4981046712972



拡張電池ボックス
AD6051-04 ¥40,000 (税抜)
(工場オプション)
JANコード 4981046713764

AD6051-05 ¥37,000 (税抜)
(ユーザーオプション)
JANコード 4981046713917
※お客様での取付をお願いいたします。



スライディングマットSM-100
AS-SM-100 ¥60,000 (税抜)
JANコード 4981046712217



プリンタ用紙 (5巻/箱)
紙幅58 mm 長さ 約30 m
AX-PP147-S ¥5,000 (税抜)
JANコード 4981046711340



ACアダプタ
※付属品と同じ
AX-TB294 ¥4,500 (税抜)
JANコード 4981046305419



付属品用ポーチ
〈本体に付属されています。〉
※オプション販売はございません。



ガートル棒
AD6101-01 ¥6,000 (税抜)
JANコード 4981046712194

仕様

品名	ストレッチャースケール
型名	AD-6051A
精度等級	3級(※ご使用地域をご指定ください。)
承認番号	第D109号
ひょう量	150 kg
目量	100 g
実目量	20 g
最小測定量	2 kg
最大減算風袋量	150 kg
使用温湿度範囲	温度: +5℃～+35℃ 湿度: 85%RH以下(但し結露なきこと)
保存温度範囲	温度: -10℃～+60℃
表示	7セグメント液晶表示 文字高: 22 mm
印刷機能	あり
外部出力	RS-232C 1ch (D-SUB 9P)
外形寸法	1940(W)×632(D)×540～940(H) mm 突起部含まず
計量スペース	1940(W)×553(D) mm
本体質量	約89 kg (ACアダプタ、乾電池含まず)
電源	専用ACアダプタ AX-TB294 : AC100 V、50 Hz-60 Hz、10 VA 単3形アルカリ乾電池: 6個 (別売) ※補助としてご使用ください
乾電池寿命	アルカリ乾電池使用時 連続動作300回以上(乾電池寿命は、周囲の環境や温度により異なります。)
付属品	専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、プリンタ用紙、付属品用ポーチ
標準価格 (税抜)	¥880,000
商品コード	AD6051A
JANコード	4981046701464

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807 m/s ² ～9.803 m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 m/s ² ～9.800 m/s ²
3	宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 m/s ² ～9.798 m/s ²
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都 (八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 m/s ² ～9.796 m/s ²
5	長野県、東京都 (全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県 (薩摩地方に限る)	9.798 m/s ² ～9.794 m/s ²
6	鹿児島県 (薩摩地方を除く)	9.794 m/s ² ～9.790 m/s ²
7	沖縄県	9.792 m/s ² ～9.789 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドデー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年11月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AD6051A-ADJC-07-PR6-23b003GP★