

ストレッチャースケール

AD-6051B

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

治療や栄養管理に便利な
寝たまま測る体重計



- ✓ 検定付き体重計
- ✓ 患者の搬送可能
- ✓ BMI表示付き



ガートル棒、酸素ボンベ金具は、オプションです。
また、酸素ボンベ、減圧弁、輸液バック等はご使用
イメージのために取り付けましたもので、当社では
取扱をしております。

寝た状態で安全に搬送、計量 ストレッチャースケール

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

AD-6051B 定価: ¥880,000 (税抜)

病棟

早期栄養介入
周術期栄養管理に

栄養管理・NST活動



治療や診断を支える
回復のための計測



入院透析

透析室

脳卒中
血栓溶解療法
(t-PA)




救急、SCU、脳外・神経内科

急性期

精度

センサを四隅に配置することで
乗る位置によるバラツキもなく
正確で高精度な計量が可能

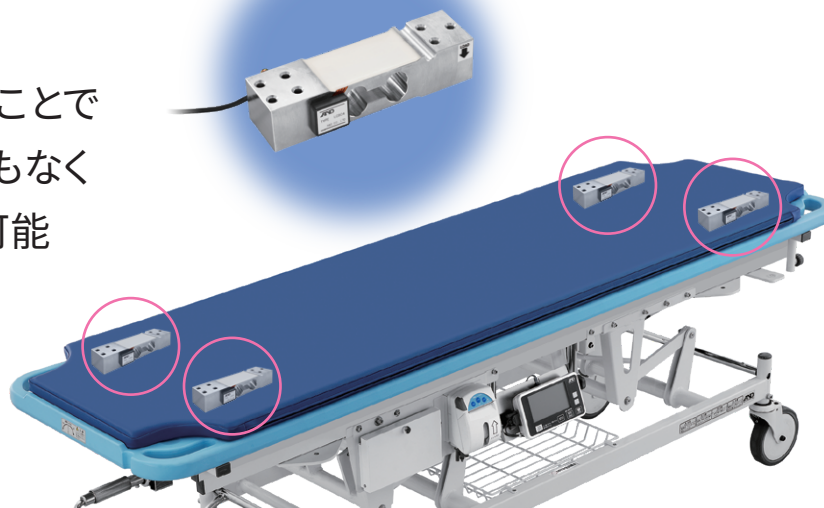

体重計


- ✓ 身長値を入力することにより、BMI表示が可能
- ✓ 土ボタンで着衣の重量設定も簡単に



- ✓ 電池ボックスを標準装備 → 測定回数を大幅改善

AD-6051A: 連続動作300回以上

AD-6051B: 連続動作**800**回以上

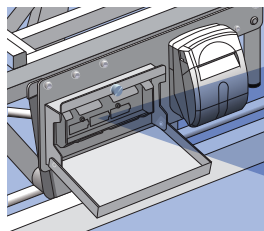

単三



×6本

使用回数/300回


単二



×6本

使用回数/800回

- ✓ 記録に便利なプリンタオプション

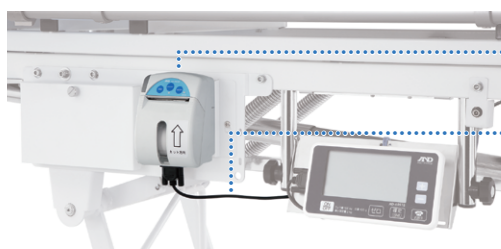

ADプリンタユニット

AD-PR580

接続ケーブル

AX-KO3937-050

※プリンタAD-PR580で印字する場合は専用充電電池をご使用ください。



■ 印字例


ID	2023年12月20日 13時10分
体重	65.9 kg

ID	2023年12月21日 19時20分
体重(N)	64.4 kg
身長	170.0 cm
BMI	22.3
風袋 (PT)	1.0 kg

ストレッチャー

- ✓ 通常のストレッチャーとして患者の搬送も可能

寝台部の高さはクランクを回すことで無段階に調整可能

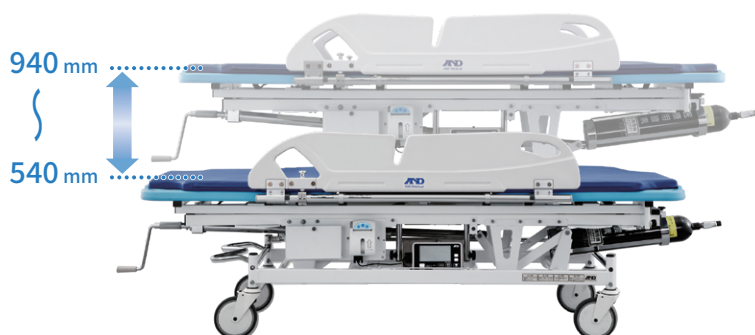

キャストータルロック機能

前輪直進固定.....

4輪フリー.....

固定(ブレーキ).....



便利な小物入れ用カゴ付き

移送時にご利用いただけます。



酸素ボンベ金具(オプション)

500 L対応



ガートル棒(オプション)

輸液をしながら移送が可能




オプション

 酸素ボンベ金具 AD6051-03 ¥26,000 (税抜) JANコード 4981046712972	 スライディングマットSM-100 AS-SM-100 ¥60,000 (税抜) JANコード 4981046712217	 ACアダプタ ※付属品と同じ AX-TB294 ¥4,500 (税抜) JANコード 4981046305419	 ガートル棒 AD6101-01 ¥6,000 (税抜) JANコード 4981046712194
 ADプリンタユニット AD-PR580 ¥55,000 (税抜) JANコード 4981046713603	 プリンタ接続ケーブル AX-K03937-050 ¥5,000 (税抜) JANコード 4981046578943	 プリンタ用紙 (5巻/箱) 紙幅58 mm 長さ約30 m AX-PP147-S ¥5,000 (税抜) JANコード 4981046711340	充電式電池専用充電器 AS-BQ-CC25 ¥8,500 (税抜) JANコード 4981046197397 プリンタ専用充電電池 単2形 1本 (必要数 6本) AS-BK-2MGC ¥4,000 (税抜) JANコード 4981046197670

仕様

品名	ストレッチャースケール
型名	AD-6051B
JANコード	4981046577342
商品コード	AD6051B
精度等級	3級 (※ご使用地域をご指定下さい)
承認番号	第D1418号
ひょう量	150 kg
目量	100 g
最小測定量	2 kg
最大減算風袋量	99.9 kg
表示	7セグメント液晶表示 文字高:23 mm
外部出力	RS-232C 1ch (D-SUB 9P)
外形寸法	1940 (W) × 632 (D) × 540~940 (H) mm 突起含まず
計量スペース	1940 (W) × 553 (D) mm
本体質量	約92 kg (ACアダプタ、乾電池含まず)
電源	専用ACアダプタ 又は単二形電池6本
乾電池寿命	連続動作 (アルカリ乾電池使用時) 80時間以上
付属品	専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、付属品用ポーチ、結束バンド
標準価格 (税抜)	¥880,000

外形寸法図

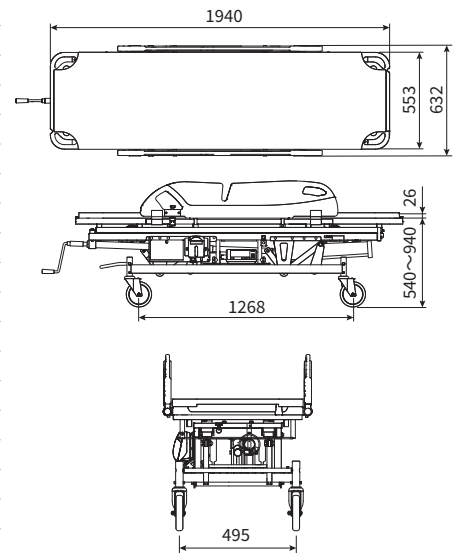

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807 m/s ² ~ 9.803 m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 m/s ² ~ 9.800 m/s ²
3	宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 m/s ² ~ 9.798 m/s ²
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都 (八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 m/s ² ~ 9.796 m/s ²
5	長野県、東京都 (全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県 (薩摩地方に限る)	9.798 m/s ² ~ 9.794 m/s ²
6	鹿児島県 (薩摩地方を除く)	9.794 m/s ² ~ 9.790 m/s ²
7	沖縄県	9.792 m/s ² ~ 9.789 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドティ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター ☒ 購入前相談窓口 ☐ 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間: 月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。