

SmartLift Scale 2

スマートリフトスケール2 AD-6082


寝た状態の患者の体重測定に

安定した測定を実現する本体構造
ストレッチャーの左右バランスに影響されない
重量センサ構造

- ICU
- 病棟
- 透析室
- 脳外
- 循環器
- 整形

・・・などの使用に最適

デュアル表示

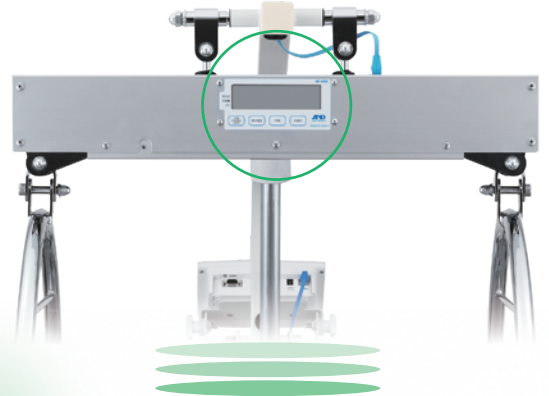

操作者側、介助者側どちらからでも操作や体重値の確認ができる2つの表示器を搭載。スムーズな体重測定を実現できます。【※特許取得】



Scale

大型表示

操作者側の表示器には、より大きな文字で表示

- 7セグメント液晶表示
- メイン表示：文字高 30 mm
- 補助表示：文字高 20 mm

日本語表示

測定状態や、メッセージを日本語でわかりやすく表示

BMI表示機能

患者の身長値を入力すればBMIを自動計算

メモリー機能

過去5回分の測定結果をメモリー

プライバシーモード

介助者側の表示は、プライバシーのため測定値を消すことが可能

余裕の可動範囲

余裕の電動昇降範囲
363 mm～1125 mm
(吊り金具下部)



スムーズな操作性

軽量化された本体重量と、大型キャスターの採用により、本体移動がスムーズ
測定 / 移動時の脚部開閉操作も安全かつスムーズ
ペダルを踏み込みハンドルで、脚の開閉操作ができます。



低床ベッド対応 ダブルキャスター

脚高 60 mm
低床ベッドに対応
また、ダブルキャスターの採用で、エレベータへの搬入搬出時にも、隙間に落ち込む事はありません。



ADプリンタユニット AD-PR580

測定結果の記録に便利なオプションプリンタ。
自動印字のほか、表示器のスイッチ操作により印字が可能です。
※ご使用には、AD-PR580-006プリンタ取付キットと併せてご使用ください。
また、プリンタ用紙は指定の専用紙をご使用ください。印字の品質劣化や、プリンタの故障の原因になります。



AD6082用プリンタ取付キット
AD-PR580-006

プリンタ用紙
AX-PP147-S

外部充電器の取付が可能 AS-CHJ20000020

オプションの外部充電器は、本体への取付も可能です。
不意なバッテリー切れにも素早く交換してご使用いただけます。



**拭ける・洗える・滅菌できる
ストレッチャーシート**

AS-1133016607 ※本体標準付属品
本品は、アルコールによる清拭はもちろん、洗濯機による洗浄。さらにEOGガス滅菌にも対応しています。(※EOG滅菌実施後のエアレーションは十分に行ってください。)



**感染対策、汚れ対策に！
ストレッチャーシートカバー** AX-SS-COVER-50

感染症患者の測定や体液による
汚れが予想される場合に便利な、
ディスプレイシートカバー 50枚入り



仕様

品名	電動昇降リフト式体重計 SmartLift Scale 2	
型名	AD-6082	
ひょう量	180 kg	
目量	100 g	
使用範囲	0 kg~180 kg	
最大風袋量	99.9 kg	
最小風袋量	0.1 kg	
最小表示固定	5.0 kg	
外形寸法	最大時：1081(W)×1415(D)×1831(H) mm 最小時：647(W)×1479(D)×1340(H) mm	
本体質量	64.5 kg (ストレッチャーバー、シート込み)	
電源	充電式バッテリー AC100V充電 (DC24V 2.9Ah)	
電池寿命	昇降回数 約50回/60kg荷重時 (フル充電時) 電池寿命 約400回 (バッテリー50%放電時)	
表示器 (ハンガー側)	7セグメント液晶表示 文字高：23 mm	
表示器 (操作側)	7セグメント液晶表示 メイン表示：文字高30 mm 補助表示：文字高20 mm	
ストレッチャーシート	サイズ	750(W)×1800(D) mm
	素材	ナイロン100%
	備考	次亜塩素酸ナトリウム、アルコール対応、EOGガス滅菌対応、ストレッチャーシートカバー対応
付属品	ストレッチャーバー (2本)、ストレッチャーシート、充電式バッテリー、アクチュエータリモコン、電源コード、取扱説明書、簡易マニュアル、ストレッチャーシートカバー (試用サンプル)	
標準価格 (税抜)	¥1,700,000	
商品コード	AD6082	
JANコード	4981046131728	


※本製品は計量法に規定の取引証明に使用することはできません。

オプション

商品コード	品名	価格 (税抜)	JANコード	
AD-PR580	ADプリンタユニット	¥55,000	4981046713603	※2
AD-PR580-006	AD6082用プリンタ取付キット	¥15,000	4981046131735	※2
AX-PP147-S	プリンタ用紙 5巻入り	¥5,000	4981046711340	
AS-1133016607	ストレッチャーシート	¥35,000	4981046713801	※1
AX-SS-COVER-50	ストレッチャーシートカバー 50枚入り	¥20,000	4981046713931	
AD6081-03	ストレッチャーバー 1本	¥52,000	4981046713993	※1
AS-CHJ20000020	外部バッテリー充電器	¥50,000	4981046713948	
AS-BAJ	充電バッテリー	¥45,000	4981046713818	※1
AS-HB30	アクチュエータ用リモコン	¥35,000	4981046132343	※1
AS-0015827-A	電源コード 3 m	¥8,000	4981046134903	※1

※1 本体標準付属品
※2 プリンタのご使用には、※2の2点が必要です。
※ストレッチャーシートは、消耗品です。破れ、ほつれが有る場合には、交換をお願いいたします。

保守品

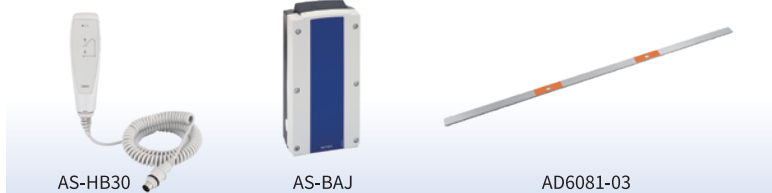

製造販売業者



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129
札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052
名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。