

バリアフリースケール

車イス用 AD-6106R ¥250,000 (税抜)





使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス体重計



バリアフリースケール

AD-6106R 標準型 ¥250,000 (稅扱)

乗降性の良い計量台

- ✔ 秤量 200 kg
- ✓ 可動式のゆるやかなスロープと低い計量台で昇降もスムーズ
- ✓ 安全性を考慮した、エッジを排した丸みのあるデザイン
- ✓ 並んではかるときに便利、両側スロープ

✓ 計量台と表示機の接続は脱着可能なLANタイプのケーブル

万が一の断線時は、市販のLANケーブルで代用可能です ※メーカー検証3 mまで

次の測定者が後ろに並んでいても 測定後、そのまま前へ通り抜けが可能



使いやすい多機能表示器

- ✔ BMI計算機能
- ✓ 車イス引き(風袋引き)機能
- ✔ 外部機器との連携

※接続機器はお問い合わせください。







✓ 立て掛けて保管や移動が可能

※ 保管に関しては取扱説明書をご参照ください。

サーマルプリンタで高速印字

オプションプリンタ:ADプリンタユニット AD-PR580 プリンタ取付キット AD-PR580-008



AD-6106RL 表示機スタンドなし型 ¥198,000 (税抜)



軽量設計

重量:約25 kg →約18 kg ※計量台 従来の強度をそのままに 大幅に軽量化を実現



持ち上げ移動も



✓ 軽くて強い ハニカム (ハチの巣) 構造

移動

大幅な軽量化で運び易さがさらに進化 大型キャスターで3Way走行 ※移動に関しては取扱説明書をご参照ください。

▼表示器と計量台の接続ケーブルは脱着可能で移動時に邪魔しません。





収納ポケット ちょっとした移動に便利



広い通路は通常走行



エレベータや保管室の狭い扉は ヨコ走行でらくらく進入



設置•保管

丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディ 安心感をもって移動や設置が可能です。

- ✔ 移動や設置時の負担を軽減、従来製品比で約3割の軽量化。
- ✔ エッジを極力なくしたデザイン。移動、設置頻度が多くても安心。
- ✓ 立て掛けて置けるので、省スペースで収納可能。


※ 収納時31.4 cm 収納に関しては取扱説明書をご参照ください。





エッジが少ないデザイン

体重計のコーナーやサイドも丸みを持ったデザイン

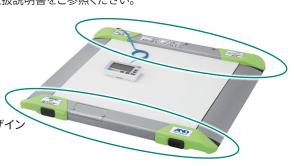

バリアフリースケール AD-6106R

外形寸法図 単位:mm 654 (計測範囲最大) 658.6 (計測範囲) 845 Ø22 961 704 (計測範囲) 0100.5

418

什样

工作水		
販売名	バリアフリースケール	
型名	AD-6106R	AD-6106RL
標準価格(税抜)	¥250,000	¥198,000
精度等級	3級	
承認番号	第D191号	
ひょう量	200 kg	
目量	100 g (∼150 kg) 2	200 g (150~200 kg)
最小測定值	2 kg	
最大減算風袋量	90 kg以下	
使用温湿度範囲	温度:5℃~35℃ 湿度:85%以下(結露なきこと)	
保存温度範囲	−10 °C~60 °C	
メイン表示	7セグメント液晶表示 メイン画面:文字高23 mm	
電源	ACアダプタ (AX-TB294) AC100 V, 50 Hz-60 Hz	
	または単一アルカリ乾電池4本	
乾電池寿命	200時間以上	
外形寸法	845 (W) × 947 (D) × 69~79 (H) mm	
計量部寸法	659 (W) × 704 (D) × 69~79 (H) mm	
本体質量	約18.0 kg	
通信機能	Dsub9 入出力×1 : 標準	
付属品	ACアダプタ(AX-TB294)、識別シール、取扱説明書、保証書	
商品コード	AD6106R	AD6106RL
JANコード	4981046160315	4981046160865

650







NO IMAGE







ACアダプタ

AX-TB294 ¥4,500 (税抜) JANコード: 4981046305419 ※ADプリンタユニットを未装着時のACアダプタです。

ADプリンタユニット AD-PR580 ¥55,000 (税抜) JANコード:4981046713603 ※プリンタの取付には、別途プリンタ取付キット AD-PR580-008が必要です。

プリンタ取付キット AD-PR580-008 ¥15,000 (税抜) JANコード: 4981046160872

AD-PR580用ACアダプタ

※AD-PR580付属品 AS-BLS-120W ¥15,000(税抜) JANコード:4981046713689

AS-BLS-120W用ACコード

※AD-PR580付属品 AS-ACS-120A ¥2,700(税抜) JANコード:4981046713696

プリンタ用紙(5巻/箱)

AX-PP147-S ¥5,000(税抜) JANコード:4981046711340

専用スタンド

AD6106R-01 ¥55,000 (税抜) JANコード:4981046162548

使用地域区分

使用地域(都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
1	北海道	9.803~9.807 m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799~9.804 m/s ²
3	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	
4	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794~9.799 m/s²
(5)	鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

取扱説明書(通信仕様書含む)、製品説明動画はこちら!! -https://www.aandd.co.ip/adhome/products/me/ad6106r.html

上記リンクから、閲覧項目をご選択ください。



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号 TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札 幌 出 張 所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759 仙 台 営 業 所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052 名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769 大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901 広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福 岡 営 業 所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は 🗘 0120-707-188

受付時間:月曜日~金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00~12:00/13:00~17:00)

🛕 安全上のご注意:ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。