

Discover Precision

AND
A&D Medical

業務用体重計

スマートスケール

AD-6209/AD-6210


取引・証明用
検定付

精度等級
3級

安全で使いやすい
かしこい機能満載の
スマートスケール



プリンタとスタンドは別売です

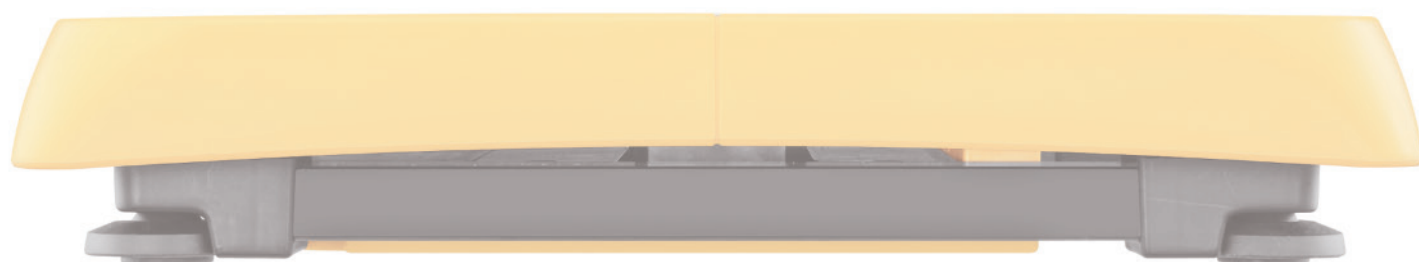

AND 株式会社 **エーアンドディ**


医療機関・健診施設など様々な場所でご使用いただける 検定付き業務用体重計

クラス最薄の68 mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計です。

バリアフリー対応

色弱者にも配慮されたカラーリングや
スイッチのデザイン、表示サイズ。

(弊社ガイドラインによる)

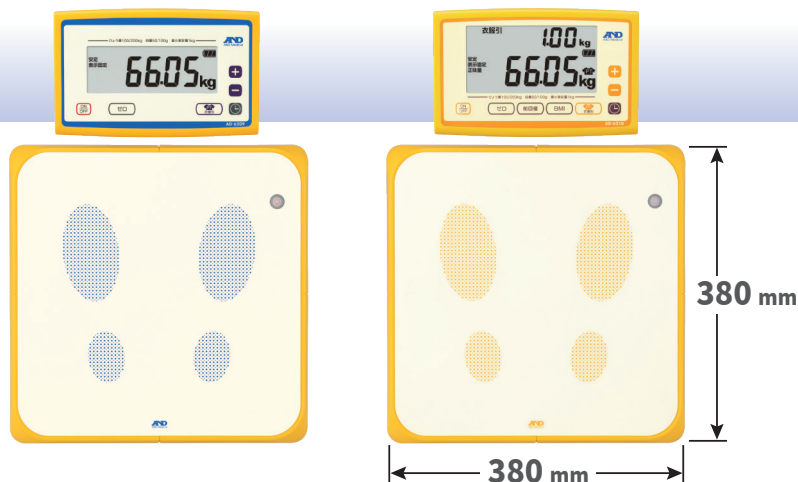

大きな計量台 380 mm×380 mm
薄型 68 mmで安全に測定ができます。


業界初！人検知センサ搭載

測定者が機器に80 cmの距離に近づくとセンサが感知し、
表示が点灯します。



表示器と計量台が分離可能

表示機と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続
移動時には分離することができます。

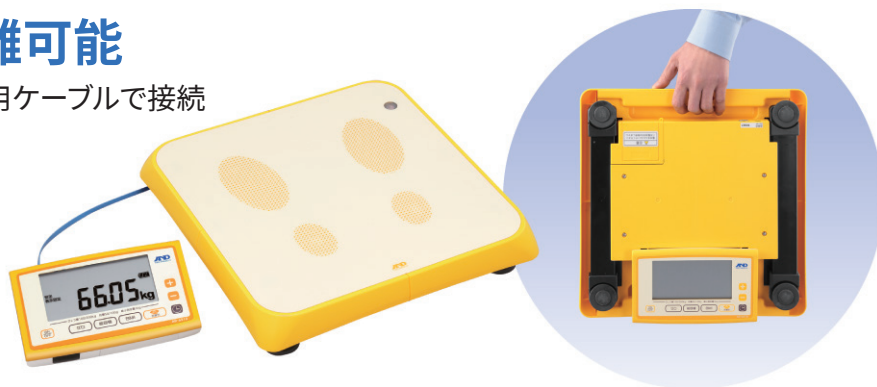

表示器スタンド (オプション) を使用すれば、一体型の体重計に。
使わない時にはスタンドに立て掛けて
収納もできます。



AD-6209

¥60,000 (税抜)

AD-6210

¥65,000 (税抜)

パーソナルプリセット風袋

ひとりひとりにあわせたプリセット風袋値を変化させ、より正確な体重を測定することができます。


わかりやすいボタン表示で、操作も簡単！



ブラインドカバー

他の人から測定値を見られにくくする「ブラインドカバー」をオプションでご用意。健診時のご使用に有用です。

(AX-BLINDCOVER)

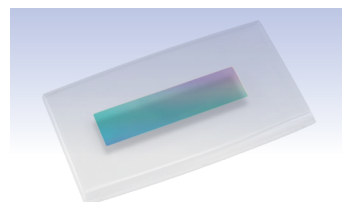

高速プリンタ

〈別売の専用ケーブル (AX-KO3937) が必要です。〉

専用スタンドに取り付けて使用ができます。

※別売のスタンドプリンタ取付台 (AD6210-04) が必要です。

印字例

2020年4月28日 17時10分

体重(N) 66.05kg

風袋(PT) 1.00kg



身長計と連動でBMIを表示 (AD-6210のみ)


弊社身長計 (AD-6400) と専用の接続ケーブル (AX-KO1371-200) で接続すれば、身長体重計になり、BMIを表示することができます。

(手動で身長値の入力にてBMIの表示も可能です。)



全自動血圧計と接続で印字

弊社全自動血圧計 (TM-2657P/TM-2657VP) と接続することで、血圧計のプリンタに印字することができます。

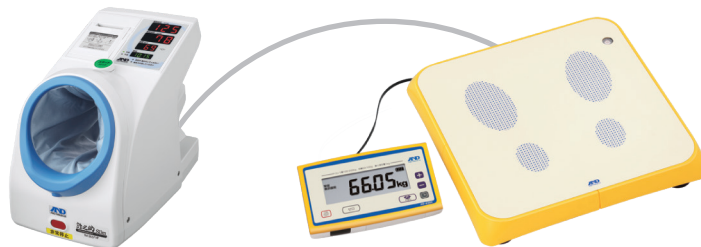

オプション



ACアダプタ
AX-TB266
¥4,500 (税抜)
JANコード：4981046618076
※本体に同梱されているものと同じです



ブラインドカバー
AX-BLINDCOVER
¥3,000 (税抜)
JANコード：4981046713672



AD6209,10 2ch通信ボード
AD6210-03
¥5,000 (税抜)
JANコード：4981046713610



専用スタンド
AD6210-01
¥20,000 (税抜)
JANコード：4981046713658
外形寸法：360×255×780 mm



AD6210-01用プリンタ取付台
AD6210-04
¥2,500 (税抜)
JANコード：4981046713665



ADプリンタユニット
AD-PR580
¥55,000 (税抜)
JANコード：4981046713603
※ご使用時には、RS-232Cケーブル75 cm (AX-KO3937) が必要です。



AD-PR580用ACアダプタ
AS-BLS-120W
¥15,000 (税抜)
JANコード：4981046713689



AX-BLS-120W用ACコード
AS-ACS-120A
¥2,700 (税抜)
JANコード：4981046713696

●はADプリンタユニットの標準付属品です。

仕様

品名	業務用体重計	
型名	AD-6209	AD-6210
精度等級	3級 (※使用地域をご指定ください)	
承認番号	第D127号	
ひょう量	200 kg	
目量	50 g (～100 kg) 100 g (100.1 kg～200 kg)	
外形寸法	計量台：380×380×68 mm 表示器：205×126×60 mm	
質量	約5.8 kg (ACアダプタ、乾電池含まず)	
通信	RS-232C 1 ch	
表示	7セグメント液晶表示 メイン画面：文字高30 mm	7セグメント液晶表示 メイン画面：文字高30 mm 補助画面：文字高20 mm
電源	ACアダプタ (AX-TB266：AC100 V 50 Hz-60 Hz 10 VA) または 単三乾電池×4個 (表示器)	
付属品	ACアダプタ (AX-TB266)、ACアダプタ識別シール、 接続ケーブル2 m、取扱説明書、保証書	
標準価格 (税抜)	¥60,000	¥65,000
商品コード	AD6209	AD6210
JANコード	4981046701280	4981046701297

接続ケーブル 3 m

AX-KO3938
¥3,000 (税抜)
JANコード：4981046713627

接続ケーブル 2 m

AX-KO3946
¥3,000 (税抜)
JANコード：4981046713641

RS-232Cケーブル 75 cm

AX-KO3937
¥5,000 (税抜)
JANコード：4981046713634

使用地域区分

区分	使用地域 (都道府県)	使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.807 m/s ² ～9.803 m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 m/s ² ～9.800 m/s ²
③	山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 m/s ² ～9.798 m/s ²
④	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都 (八丈・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 m/s ² ～9.796 m/s ²
⑤	長野県、東京都 (全域)、神奈川県、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県 (薩摩地方に限る)	9.798 m/s ² ～9.794 m/s ²
⑥	鹿児島県 (薩摩地方を除く)	9.794 m/s ² ～9.790 m/s ²
⑦	沖縄県	9.792 m/s ² ～9.789 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・ディME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

AND株式会社 エー・アンド・ディ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※外觀及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※AD6209-ADJC-03-PR4-20xxGP