

デジタル身長体重計

AD-6351

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

- 軽量・コンパクト収納
- 薄くてのりやすい体重計
- 移動・持ち運びに適したデザイン



巡回健診、学校健診、施設内移動など
あらゆる場所での使用に適しています。
コンパクト設計で、車載移動にも適しています。

デジタル身長体重計

AD-6351 ¥220,000(税抜)

身長測定カーソルを折りたためば、
体重計のみの使用時に、
邪魔にならず便利

※身長測定は手動にてカーソル操作

コンパクト収納！
970 mm

ワイド測定レンジ！
身長測定範囲
88.0 cm～210.0 cm

約73 mm



大型キャスターで移動がらく！



本体重量13 kg以下で、運搬もらく！



※身長測定ポールは、自然に下がる構造です。
使用時は被験者にぶつからないよう注意してください。

身長・体重表示




BMI・体重表示




- 豊富な表示項目を分かりやすく！
- 使用者に分かりやすい日本語表記
- 見やすい大きな2段数値表示
- BMI表示機能
- 衣服重量引き機能
- 日本語表記表示によるお知らせ機能！
- 使用場所に合わせて、表示器の方向も自在！

※表示器は取り外して、テーブル等でも使用できます。

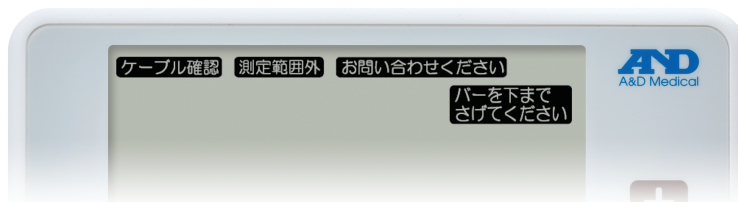

■ 拡張性《データ収集システム》 手書き・手入力の運用をデータ収集の自動化へ

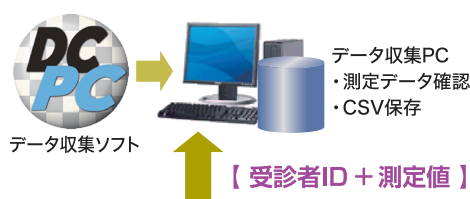

受診者ID

測定値



他社製品の健診測定機器も
接続が可能です



※ 標準接続機種等についてはA&D営業担当へご連絡ください。

デジタル身長体重計

AD-6351

仕様

品 名	デジタル身長体重計	
型 式	AD-6351	
承認番号	第D1323号	
体重測定部	ひょう量	150 kg
	目量	100 g
	精度等級	3級
	最小測定量	2 kg
身長測定部	測定方式	手動測定
	測定範囲	88.0 cm～210.0 cm
	測定単位	1 mm
	測定精度	±2 mm
主な機能	BMI測定機能、実風袋機能、衣服引き機能 (プリセット風袋機能)、オートパワーオフ機能、 時計機能(外部出力)、外部ID入力機能	
外形寸法	計量部	330(W)×330(D) mm
	台全体	330(W)×440(D) mm
身長計収納時高さ	970 mm	
表示器サイズ	180(W)×100(D)×34(H) mm	
質 量	約13 kg	
電 源	ACアダプタ 又は 単3形乾電池×6本	
電池寿命	連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)	
外部出力	RS232C 1ch (D-sub 9P 入出力)	
付属品	ACアダプタ、接続ケーブル2 m、電池ケース、取扱説明書	
標準価格(税抜)	¥220,000	
商品コード	AD6351	
JANコード	4981046701372	

オプション

	品 名	商品コード	価格(税抜)	JANコード
●	ACアダプタ	AX-TB294	¥ 4,500	4981046305419
	ACアダプタ	AX-TB230	¥ 3,000	4981046714426
	ADプリンタユニット	AD-PR580	¥55,000	4981046713603
	RS-232Cケーブル 2 m	AX-KO1371-200	¥10,000	4981046713566
	RS-232Cケーブル 75 cm	AX-KO3937	¥ 5,000	4981046713634
●	手元確定スイッチ AD-SW600	AD-A104	¥ 3,500	4981046712255
	接続ケーブル 2 m	AX-KO3946	¥ 3,000	4981046713641
●	接続ケーブル 3 m	AX-KO3938	¥ 3,000	4981046713627

●印は標準付属品

ADプリンタユニット AD-PR580



※使用には、RS-232Cケーブルの75 cm(AX-KO3937)もしくは、2 m(AX-KO1371-200)が必要です。
※プリンタ専用のACアダプタは付属しています。

手元確定スイッチ AD-SW600



使用地域区分

使用地域(都道府県)		使用地域の表記 重力加速度の範囲
1	北海道	9.807 ~ 9.803 m/s ²
2	青森県、岩手県、宮城県、秋田県	9.804 ~ 9.800 m/s ²
3	山形県、福島県、茨城県、新潟県	9.802 ~ 9.798 m/s ²
4	栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈・小笠原を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県	9.800 ~ 9.796 m/s ²
5	長野県、東京都(全域)、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.798 ~ 9.794 m/s ²
6	鹿児島県(薩摩地方を除く)	9.794 ~ 9.790 m/s ²
7	沖縄県	9.792 ~ 9.789 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドデー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年12月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AD6351-ADJC-10-PR7-23c002GP★