

# マルチ周波数体組成計

## 体成分分析装置 / 業務用体組成計



Made in Japan

取引・証明用  
検定付

精度等級  
3級

### AD-6552-MC-780

管理医療機器 医療機器認証番号:301AFBZX00031A03

¥1,300,000 (税別)

6周波数測定



ダークネイビー

管理医療機器

体液量評価

フェーズアングル

筋肉量左右バランス

SMI

アスリート指数

内臓脂肪レベル

体型判定

### MC-780A-N

¥700,000 (税別)

3周波数測定



ホワイト

管理医療機器

体液量評価

フェーズアングル

筋肉量左右バランス

SMI

アスリート指数

内臓脂肪レベル

体型判定



ダークグレー

#### アスリートモード搭載

日々のトレーニングで一般成人と結果が異なる傾向のアスリートの皆さまに、専用の計算式で結果を算出します

#### 【アスリートの定義】

- いずれかに該当する場合、推奨しています
- ✓ 12時間/週以上のトレーニングを行っている
  - ✓ 体育会に所属し競技会等を目指している
  - ✓ プロスポーツ選手
  - ✓ ボディービルダーのように筋肉量が多くなるようなトレーニングを行っている

# 部位別に体組成を詳細分析


# ひと目でわかる測定結果

体重では分からない  
身体組成の可視化

筋トレの成果

ボディイメージの確認

隠れ肥満

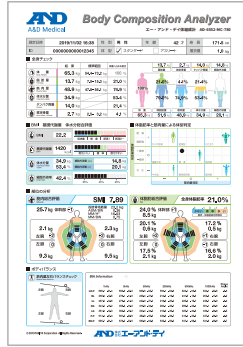


◀ A4レポートにて出力  
(画像はAD-6552-MC-780)

製品の詳細はこちら  
(A&Dホームページ)



## 見やすいレベル判定評価

【体型判定】 (AD-6552-MC-780/MC-780A-N)

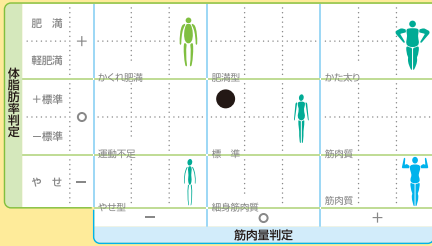

【内臓脂肪レベル】 (UFT-MC-780)

● 腹腔内(内臓のまわり) についた脂肪をレベル表示




【アスリート指数】 (UFT-MC-780)

● 測定者の体組成がどの程度プロスポーツ選手などのアスリートに近いかを数値化して表示





【体液量評価】 (AD-6552-MC-780)

● 体水分を細胞外液量(ECW)と細胞内液量(ICW)に分けて表示

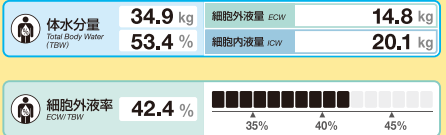

## 四肢の体組成を分析

【筋肉/体脂肪総合評価】 (AD-6552-MC-780/UFT-MC-780)

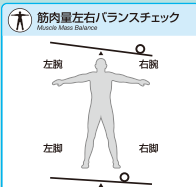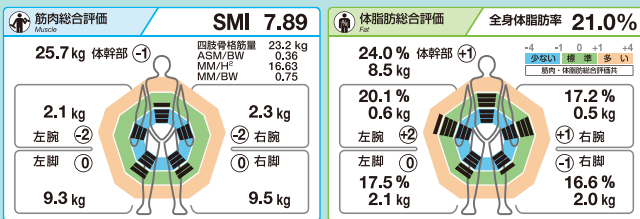

- 部位別に評価を可視化
- 部位別：体幹/左腕/右腕/左脚/右脚
- 筋肉の左右バランスもチェック
- SMI/四肢骨格筋量も表示

【Phase Angleを表示】 (AD-6552-MC-780/UFT-MC-780)


● BIA Informationに記載

	5kHz	50kHz	250kHz	Phase Angle			
H-L	656.2	-31.1	574.3	-65.2	513.2	-69.2	-6.5
RL	262.3	-12.9	221.2	-24.8	203.5	-18.3	-6.2
LL	261.3	-12.8	226.2	-25.6	202.0	-21.2	-6.5
RH	355.3	-17.1	309.7	-38.5	277.6	-50.9	-7.1
LH	363.9	-16.6	320.0	-36.9	290.1	-48.3	-6.6
L-L	523.5	-25.5	454.4	-49.2	408.8	-37.0	-6.2
	648.6	-31.7	559.0	-66.1	502.2	-72.2	-6.7

主に筋密度を反映  
筋肉の質や栄養評価など  
最近注目の評価項目

Phase Angle とは？

電気抵抗を水分と細胞膜の成分に分け、その比を角度で表した評価指標

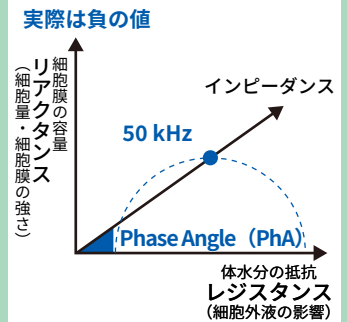

## 身体組成を分かり易く

### 最新高精度の「4C法」アルゴリズムを採用



品目コード	タイプ	色	医療機器	定価(税別)
AD6552	ポール	ダークネイビー	○	¥1,300,000
UFT-MC-780WP	ポール	ホワイト	×	¥700,000
UFT-MC-780GP	ポール	ダークグレー	×	¥700,000
UFT-MC-780W	ポータブル	ホワイト	×	¥700,000
UFT-MC-780G	ポータブル	ダークグレー	×	¥700,000

製造業者 株式会社タニタ秋田

製造販売業者

**AND株式会社 エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129  
札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759  
仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052  
名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769  
大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901  
広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058  
福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2024年2月現在のものです。  
※本カタログは事業者向けです。 \*UFT-MC-780-A-ADJT-01-AD02-242000