

データ収集アダプタ Health Data Interface AD-6904A

医療・健康機器の データ収集自動化へ

シリアル通信機器の測定データを低コストにシステム連携

- ✓ 受診者IDと測定値を紐づけてパソコンへ送信し、データを収集
- ✓ 付属の専用ソフトで【ID+測定値】をCSVファイルに生成し、上位システムと連携
- ✓ 血圧計、身長体重計の他、各種測定機器と接続し、健診現場での利活用が可能



A&D身長計付き体組成計



A&D血圧計



A&D業務用体重計




視力計




眼圧計




心電計

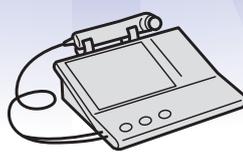

肺機能計

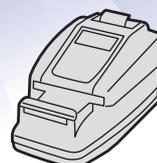

尿分析器

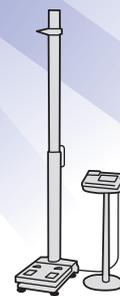

体組成計
(身長体重計)



聴力計

健診施設様へのご提案


こんなことでお困りの方に・・・

- 入力、転記ミスを防止したい!!
確認作業の時間を効率化したい!!
- 入力作業の手間を省力化、健診業務の効率化を実現したい!!
- 今までのデータ連携提案が高コストだったため、導入を実現できなかった!!
- 場所が狭くて測定データ取り込み用PCの設置スペースに困っている!! ... など

データ収集アダプタ Health Data Interface AD-6904A



院内健診向け

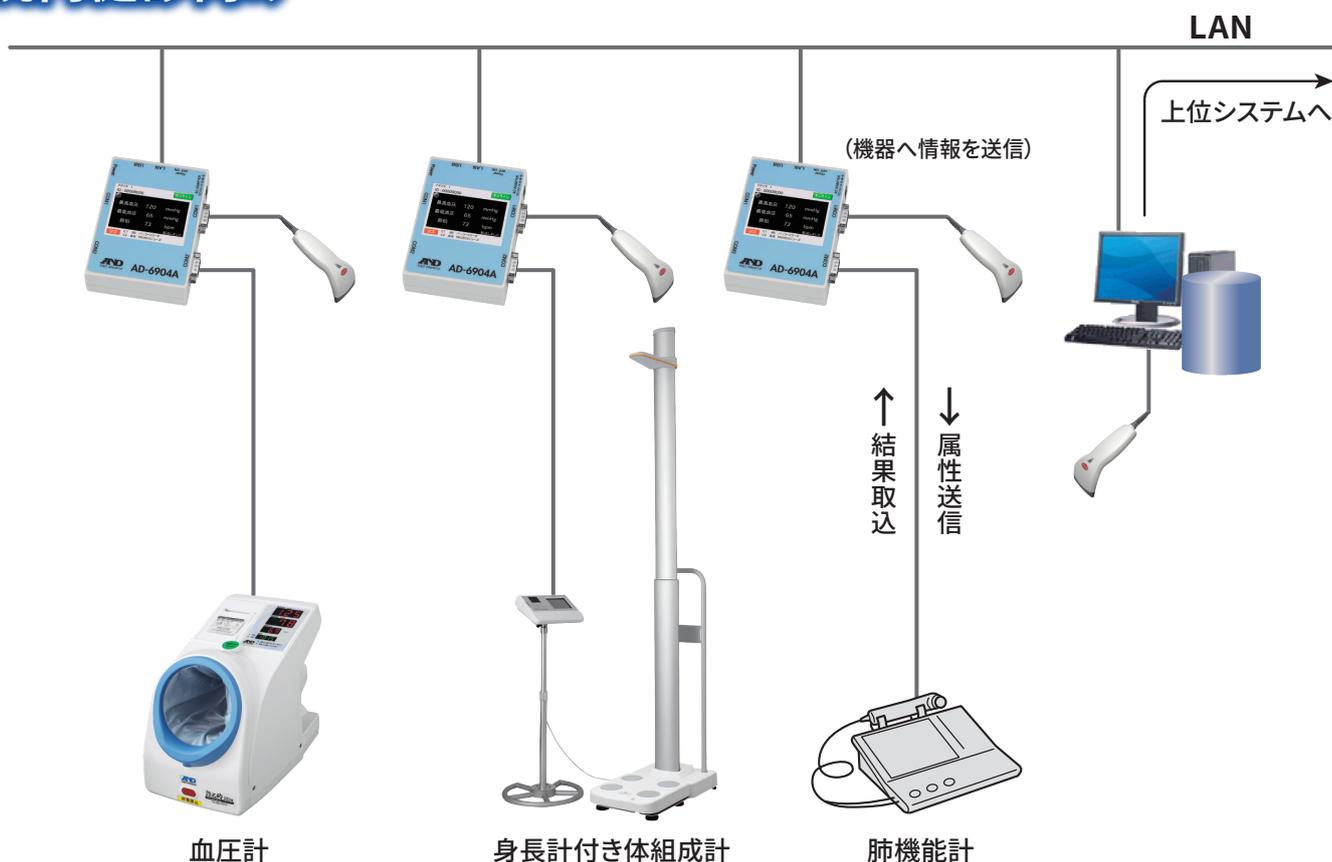

スマホの方はこちらから

接続機種・台数などの入力で、概算費用が分かります。
簡単お見積もりフォーマットは、こちら!!

<https://www.aandd.co.jp/products/medical/no-me/me-sofwares/ad6904a/>

上記リンクから、「概算見積もりお申込みへ」をクリックしてください。



仕様

品名	データ収集アダプタ AD-6904A
型名	AD-6904A
商品コード	AD6904A
外形寸法	約90 mm (W) × 34 mm (D) × 124 mm (H) 突起部を除く
質量	約260 g
電源	ACアダプタ AC100 V 50 Hz～60 Hz
表示	バックライト付きTFTカラータッチパネル液晶 (3.5インチサイズ、320×240dot) 青色LED×1電源、緑色LED×2データ通信確認用
本体メモリ	測定データバックアップ最大100データ (1日1ファイルで最大100日分まで)
通信機能	【シリアル通信】 ポート数：2 インターフェース：RS-232C、EIA-574規格準拠 (COM2のみ) COM1はID認証機器接続専用 コネクタ：D-SUB9M 【ネットワーク】 ポート数：1 インターフェース：100BASE-TX規格準拠
データ収集ソフト 動作環境	Microsoft Windows 10以降
接続機器	【ID認証機器等】 バーコードリーダ (AX-BCR-RS232C) オプション：カードリーダ 【測定機器】 シリアル通信機能を有するもの 血圧計、身長体重計、各種体重計 視力計、眼圧計、聴力計、肺機能計、心電計、腹囲計 尿分析器、身長計付き体組成計等
標準価格 (税別)	¥200,000
JANコード	4981046136877

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

標準付属品

- ACアダプタ
- 通信ケーブル 3 m
(Dsub9F-Dsub9F、クロス)
- データ収集ソフト
- 取扱説明書

周辺機器

接続ケーブル

(Dsub9F-Dsub9F、クロス)
AX-KO1371-200
¥10,000 (税抜)
JANコード：4981046713566

USBコンバータケーブル
(データ収集PC用)

AX-USB-9P
¥10,000 (税抜)
JANコード：4981046612920

バーコードリーダ

AX-BCR-RS232C
¥20,000 (税抜)
JANコード：4981046004770

専用バーコードリーダ

AX-BCR-USB
¥20,000 (税抜)
JANコード：4981046579155

バーコードリーダ用ACアダプタ

AS-PS5V-A50M
¥15,000 (税抜)
JANコード：4981046135153

※仕様は予告なく変更となる場合があります。

システム開発ご担当者様へのご提案

- A&Dでは、システム連携に必要な情報をSDKサイトにて無償開示しています。
- システム連携のためのCSV仕様書や、接続機器やケーブル等の情報開示についてはA&Dホームページから申し込みが可能です。
詳細は、下記をご参照ください。

上位連携仕様書、接続機種、サンプルファイルなど連携に必要な情報は、
A&DホームページからSDKのお申込みでダウンロード可能です。

「A&D SDK申し込み」で検索!!
「通信機能付健康機器向けSDKお申し込みフォーマットへ」
をクリックしてください。

A&D SDK申し込み



スマホの方はこちらから



定期点検サービス

あんど 安心サポートone

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドデイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。