

Discover Precision

A&D
A&D Medical

DIGITAL TAPE MEASURE Bluetooth®

ミリオンデジタル®/ラウンド

DTM-20R Bluetooth®無線通信に対応



腹囲測定に最適なメジャー

- 周囲長測定の専用モデル
- 目盛とデジタル表示のダブルで確認
- メジャー先端形状は周囲測定に最適化
- 着衣測定時の補正值設定可能
- 見やすいデジタル表示
- 巻尺の目盛精度は繊維製巻尺JIS1級相当
- 光センサ(フォトリフレクタ)で目盛を読み取り
- 使いやすい小型・軽量ケース
- 測定長は最大2メートル
- 消耗した巻尺は交換可能(有料にて修理対応となります)
- 測定結果をBluetooth®でパソコン等に送信

表示部

電源スイッチ


電池消耗マーク

単位表示

データスイッチ



測定方法

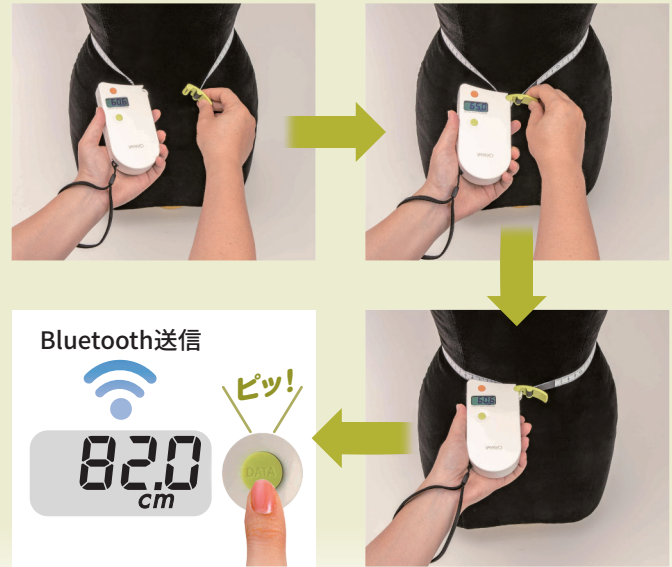

仕様

販売名	ミリオンデジタルラウンド
型名	DTM-20R
測定形式	光センサ(フォトリフレクタ)式/直読目盛付き
測定範囲(周長)	周囲長200 cmまで
最小測定単位	デジタル、直読目盛共に1 mm
表示単位	mm、cm 切り替え式(送信はcm単位、小数点以下1桁)
測定精度	目盛精度: センサ読み取り目盛・直読目盛共にJIS1級相当 デジタル計測精度: ±1 mm
測定速度	巻尺引き出しスピード: 毎秒2 m以下
送信方法・規格	Bluetooth Ver2.1+EDR Class2 プロファイルSPP 通信速度: 9,600 bps/フロー制御: RTS/CTS/スタートビット: 1 bit/ データビット: 8 bit/パリティビット: Non/ストップビット: 1 bit ※ 通常のシリアル通信と同じように表示の数値をそのまま相手のターミナルに出力します
通信フォーマット	PIN: 0000/電文7 byte (数値は先頭スペースとドットを含む5 byte、終端2 byte)
電源	単4形乾電池2本、または単4形充電電池2本
電池寿命	電池寿命待機時間72時間、連続動作時間7時間(アルカリ乾電池使用時)
オートパワーオフ	90分(解除モード付)
使用温度範囲	0℃～50℃
保管温度範囲	-10℃～+50℃
形状寸法	69(W)×26(D)×125(H) mm
重量	155 g(乾電池含む)
構成材料	巻尺: PVC+グラスファイバー/引手: ABS/ケース: ABS/他電子部品
付属品	単4形アルカリ乾電池2本/取扱説明書(保証書付き)/ハンドストラップ
商品コード	AS-DTM-20R
JANコード	4957111581040
標準価格(税抜)	¥98,000

※ BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です

製造元

ヤマヨ測定機株式会社
URL: <https://www.yamayoko.co.jp>
〒120-0015 東京都足立区足立2-23-13
TEL 03(3849)6511 FAX 03(3849)6515

販売元

AND株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL 03-5391-6127(直) FAX 03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL 011-251-2753(代) FAX 011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL 022-211-8051(代) FAX 022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL 052-726-8763(直) FAX 052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL 06-7668-3904(直) FAX 06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL 082-233-0611(代) FAX 082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL 092-441-6715(代) FAX 092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

※ 取扱説明書をよく読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*DTM-20R-ADJC-01-PR1-20104GP