

# 健診用眼科機器

## 自動視力計 NV-350

届出番号 23B1X00023000136  
標準価格 ¥648,000 (税抜)

- 被検者が近づくと、自動的に測定を開始
- 音声ガイドに従いレバーを操作するだけで、簡単にセルフチェックが可能
- 4ヶ国語対応の音声ガイドで、外国の方にも対応可能
- 独自の光学設計により瞳孔間距離の調整が不要
- 外部通信用 RS-232C 接続ポートを装備し、自動測定終了と同時に測定データを出力可能



タッチパネル式  
コントローラーで  
簡単設定



## ノンコンタクトトノメータ NT-1

管理医療機器 特定保守管理医療機器  
認証番号 304AABZX00066000  
標準価格 ¥2,800,000 (税抜)

- あごを載せるだけで測定スタート
- 患者様に優しいエア吐
- 9ヶ国語の音声アナウンスで、検査の進行をガイド



多様な  
測定スタイル



### Auto Start オートスタート

あごを載せるだけで  
測定スタート。あご台の高さ  
調整も自動でおこないます。

多言語音声アナウンス<sup>※1</sup>

### オートアライメント & トラッキング

両眼の位置を検出し、  
アライメントを自動で  
おこないます。

多言語音声アナウンス<sup>※1</sup>

セーフティ機能<sup>※2</sup>

### オートショット

アライメントが完了すると、  
自動で測定をおこないます。  
APC 機能<sup>※3</sup>  
(Automatic Puff Control)

多言語音声アナウンス<sup>※1</sup>

セーフティ機能<sup>※2</sup>

### 片眼オート切り替え

片眼測定終了後、  
自動で反対の  
測定眼に移動します。

### オートプリント & エクスポート

印刷・転送まで自動で  
おこないます。

多言語音声アナウンス<sup>※1</sup>

(※1) 9ヶ国語の中から選択可能です。(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、中国語、韓国語)

(※2) 眼とノズルが接触しないように制御し、音でもお知らせします。万が一触れてしまった場合にはすぐに測定部が退避します。

(※3) 空気圧自動停止機能により余分なエアを抑え、初回吐出圧を低減させています。また、2回目以降は初回測定結果から、より適切な吐出圧制御をおこないます。


# オート無散瞳眼底カメラ AFC-330

管理医療機器 特定保守管理医療機器  
 認証番号 223AABZX00104000  
 標準価格 ¥3,850,000 (税抜)

- 3D オートトラッキングやオートフォーカスなど、「5つのオート」で簡単撮影
- 低光量フラッシュにより縮瞳を抑えることができ、連続撮影が可能
- 撮影時のシャッター音を50% (当社従来モデル比) 低減させ、不要なまばたきを抑えることが可能


### 小瞳孔撮影モード

・瞳孔計Φ3.3 mmの撮影が可能  
 (従来モデルのAFC-230/210はΦ3.7 mm)

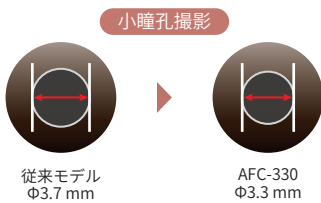

### 検査アシスト

・前眼部観察サブ画面に表示され、必要な瞳孔径をリアルタイムで確認しながら撮影できます。

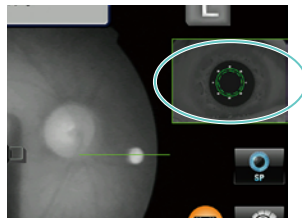

## 仕様

| 品番        | AS-NV-350 (*)           | AS-NT-1 (*)                               | AS-AFC-330              |
|-----------|-------------------------|---|-------------------------|
| 一般的名称     | 特殊視力検査装置                | 眼圧計                                       | 眼底カメラ                   |
| 販売名       | 自動視力計 NV-350            | ノンコンタクトトノメータ NT-1                         | オート無散瞳眼底カメラ AFC-330     |
| インターフェイス  | RS-232C                 | RS-232C, USB, LAN, 無線LAN                  | —                       |
| 本体質量      | 7 kg                    | 20 kg                                     | 29 kg                   |
| 届出番号/認証番号 | 23B1X00023000136        | 304AABZX00066000                          | 223AABZX00104000        |
| 医療機器の分類   | 一般医療器                   | 管理医療機器 特定保守管理医療機器                         |                         |
| 電源        | AC100 V 50/60 Hz 40 VA  | AC100 V ~ 240 V ± 10 %<br>50/60 Hz 100 VA | AC100 V 50/60 Hz 150 VA |
| 外形寸法      | 220(W)×410(H)×340(D) mm | 305(W)×493(H)×492(D) mm                   | 316(W)×579(H)×518(D) mm |
| 標準価格(税抜)  | ¥648,000                | ¥2,800,000                                | ¥3,850,000              |
| 製造販売業者    | 株式会社ニデック                |   |                         |

(\*)NV-350、NT-1はデータ収集アダプタ AD-6904Aと接続できます。

## 関連製品

| 型名         | 品名                      | 標準価格(税抜) | 品目コード         |
|------------|-------------------------|----------|---------------|
| OT-450     | OT-450 電動光学台            | ¥165,000 | AS-OT-450     |
| OT-600BF   | OT-600BF 電動光学台(車いす対応)   | ¥275,000 | AS-OT-600BF   |
| NV-350CASE | キャリングケース NV-350用        | ¥50,000  | AS-NV-350CASE |
| LE CABLE   | LE通信ケーブル3 m (9P-9P)     | ¥2,400   | AS-LECABLE    |
| OPIF-15    | OPIF-15 9p-9p 通信ケーブル5 m | ¥8,000   | AS-OPIF-15    |
| TP-58      | プリンタ用紙 (入数: 3)          | ¥2,100   | AS-TP-58      |
| AD-6904A   | データ収集アダプタ               | ¥200,000 | AD-6904A      |



製造販売業者

**AND株式会社 エーアンドデー**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
 TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
 外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年11月現在のものです。  
 ※本カタログは事業者向けです。 \*健診用眼科機器-ADJC-01-AD01-23b00