

Thermo Phrase

サーモフレーズ



- 測定ボタンを押して額に近づけるだけ
- 接触しないので衛生的
- 額の表面温度を腋下温度に換算して表示
- 測定結果をバイブレーションでお知らせ
- バックライトで暗がりでも読み取り可能
- 消毒可能（薬剤 8 種類で耐久試験済）※
※メーカー評価方法による
- Bluetooth® 通信機能搭載
- 日本製




つかいかた


1 電源を入れて、
測定ボタンを押す




2 額に垂直に
ゆっくり近づける

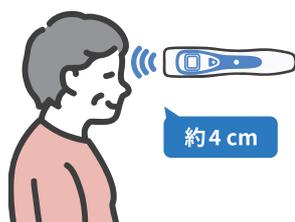

3 一定距離で
自動測定

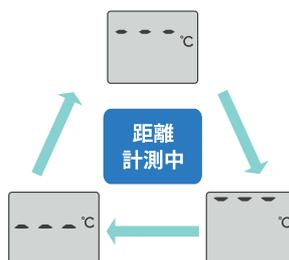


4 バイブレーション
でお知らせ

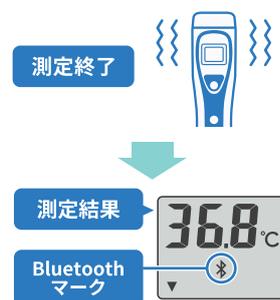

スマートフォンと無料アプリでかんたん健康管理



MT-550BT

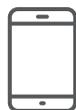

スマートフォン



データベース

日本精密測器株式会社のアプリ HealStyleとの連携が可能です。
通信仕様書の提供をご希望の場合は、右記のURL (A&D SDK) よりご依頼ください。




iPhone・Android 対応アプリ

NISSEI HealStyle



画面表示例

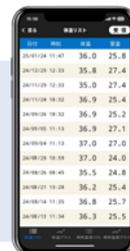

Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

仕様

型名	AS-MT-550BT	
販売名	サーモフレーズ MT-550	
医療機器認証番号	302AFBZX00106000	
医療機器分類	管理医療機器	
表示方式/体温測定部位	腋下温度(補正温度)/額	
測定範囲	体温	32.0℃～43.0℃
	物体温度	0～100.0℃
	室温	10.0℃～40.0℃
測定精度	体温※1	39.1℃～43.0℃: ±0.3℃以内 / 36.0℃～39.0℃: ±0.2℃以内 34.0℃～35.9℃: ±0.3℃以内 / 32.0℃～33.9℃: ±0.4℃以内
	物体温度	10.0℃～40.0℃: ±2.0℃以内、それ以外は ±2.0℃以内または ±4% のどちらか大きい値
	室温	±2.0℃
最小表示単位	0.1℃	
電源	単4形アルカリ乾電池 1本 (DC1.5V 0.09W)	
電池寿命	約4,000回(弊社測定条件による)	
使用環境	温度: 10℃～40℃、相対湿度: 15%RH～90%RH(結露なきこと)	
輸送・保管環境	温度: -20℃～50℃、相対湿度: 95%RH以下(結露なきこと)	
本体寸法/質量	176.4(W)×39.2(H)×26.1(D) mm / 約74.3g(付属品を含まない)	
梱包寸法/質量	185(W)×60(H)×50(D) mm / 約124g	
電撃保護	内部電源機器: BF装着部	
防水性能	IP57(機器の正常な動作や安全性を阻害するような粉塵の浸入・一時的な水没に対する保護。※2)	
付属品	単4形アルカリ乾電池 1本、取扱説明書、注意書	
製造販売業者	日本精密測器株式会社	
標準価格(税抜)	¥18,000	

※1 黒体炉を実測測定した場合
※2 水深1mの常温の水道水に本品を静かに沈めて、30分放置後に機器が正常に動作する。

AND 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間: 月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年5月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AS-MT550BT-ADJC-01-AD01-25500