

全自動血圧計


TM-2655 標準型・TM-2655
プリンタ内蔵・TM-2655P

左右どちらの腕でも測定できる
設置幅をとらないスリム型



スリム型・・・

・・・左右測定

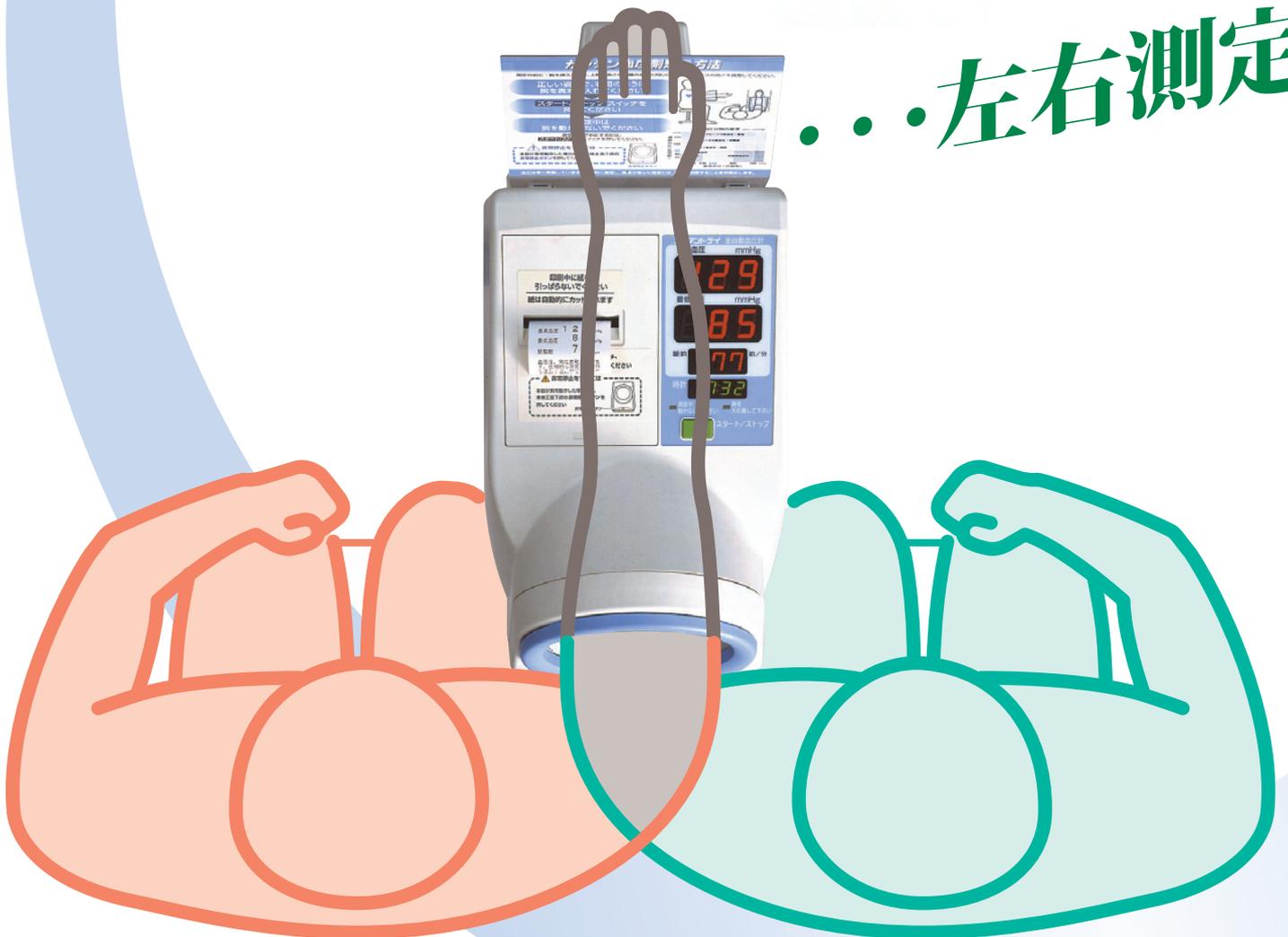

信頼の高精度オシロメトリック方式

健常者から高血圧者まで、安心して測定できる、オシロメトリック方式を採用

ワンタッチ操作の全自動

腕を入れ、スタートスイッチを押すだけで、加圧・測定・排気がすべて自動

自然な姿勢で腕がラクに奥まで入れられ
正確な測定ができるニューフォルム



写真の専用架台は別売、椅子は市販品です。

全自動血圧計


医療機器承認番号 21100BZZ00541000
特定保守 管理医療機器

用途により選べる2タイプ


TM-2655 標準型 ¥290,000(税抜き)

TM-2655P プリンタ内蔵 ¥320,000(税抜き)

左右どちらの腕でも測定できる
デュアル設計

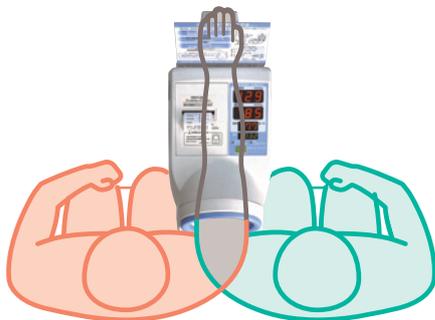

壁際につけられ、カウンターにも置ける
設置スペースをとらないスリム設計

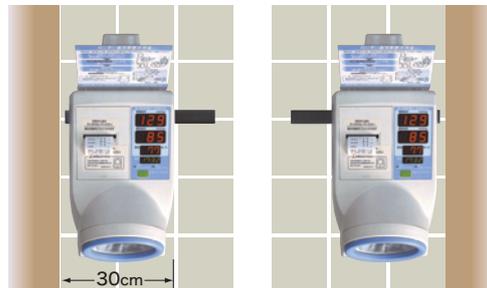

車イスのままで一人でも測定ができる
バリアフリー設計



※ 車イスの種類や、乗車の方の姿勢、状態により、測定できない場合があります。

自然な姿勢で正確測定



腕を深く入れようとする
と、体が斜めに向き、前傾して、
不自然に力が入った状態に
なります。

TM-2655



おなかの出た方でもムリなく
自然体で腕を深く入れられ
正確な測定ができます。

オートカッター

紙づまりが無く、風で飛ばない一点付けカット

プリント印字は7パターン

高速印字

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 最低血圧 脈拍数
110 75 80
[mmHg] [bpm]

3行印字

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 **111** mmHg
最低血圧 **76** mmHg
脈拍数 **79** bpm

コメント印字

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 **111** mmHg
最低血圧 **75** mmHg
脈拍数 **79** bpm
血圧は、常に変動しています。定期的に測定して記録しましょう。自分で判断せず医師と相談しましょう。


高速WHO分類印字

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 最低血圧 脈拍数
149 96 80
[mmHg] [bpm]
あなたの血圧値は、
[グレード1高血圧]です。
(WHO:1999)

グラフ印字

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 **110** mmHg
最低血圧 **77** mmHg
脈拍数 **80** bpm

脈拍の変化

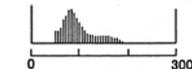

血圧は、常に変動しています。定期的に測定して記録しましょう。自分で判断せず医師と相談しましょう。

テーブル印字

2013/ 3/ 8 10:38
[mmHg] [bpm]
No. TIME SYS DIA PUL
00001 13:25 109 74 80
00002 13:26 111 75 80
00003 13:27 113 75 79
00004 13:28 113 76 79
00005 13:29 110 76 80
00006 13:30 110 76 79

3行WHO分類印字

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 **111** mmHg
最低血圧 **78** mmHg
脈拍数 **79** bpm
あなたの血圧値は、
[至適血圧]です。
(WHO:1999)



人感知センサー

本器の前に人が来るとセンサーが感知し、表示が点灯する省エネ設計 (TM-2655Pに搭載)

安心の非常停止ボタン

万が一のために、腕帯の締めつけを解除する安全機構

IHB検知 (Irregular Heart Beat: 不規則脈)

脈間隔をチェックして不規則な脈を検知
(血圧値の信頼性が高められます)

拡張端子 (RS232C) 2ch

コンピュータ、カードリーダ、バーコードリーダ等と接続、データの管理や自動化が可能

TM-2655Pのプリンタで 体重計の測定値を印字

A&D製の体重計、全自動身長体重計の測定値を別売の出力端子、ケーブルの接続によりTM-2655Pのプリンタで印字ができます。

例：ベッドサイドスケールと接続



TM-2655P

ベッドサイドスケール
AD-6121A

2013/ 3/ 8 10:38
最高血圧 **111** mmHg
最低血圧 **76** mmHg
脈拍数 **79** bpm

2013/ 3/ 8 10:38
体重 **65.3**kg

印字例

ビットマップ印字

オリジナルのマーク、絵、メッセージを印字できます。

(制作については、担当セールスにお問い合わせください。別途費用が必要となります。)

オリジナル印字例

IHB検知マーク

2013/ 4/13 16:21
最高血圧 最低血圧 脈拍数
116 80 91
[mmHg] [bpm]
A&D
A&D Company, Limited
A&D ENGINEERING, INC.
A&D INSTRUMENTS GmbH
A&D MERCURY PTY. LTD.

各種印字の使用回数(目安)

- ・プリンタ用紙1巻長さ30m
- ・高速印字 789回、3行印字 681回、コメント印字 461回、高速WHO分類印字 555回、グラフ印字 319回、3行WHO分類印字 500回

IHB検知印字 (Irregular Heart Beat: 不規則脈)

測定中に脈間隔が平均から大きくズレた場合や、体動があった時にIHBマークを印字します。

仕様

| | |
|---------|---|
| 測定方式 | オシロメトリック方式 |
| 表示範囲 | 圧力:0~300mmHg 脈拍:30~200拍/分 |
| 精度 | 圧力:±3mmHg 脈拍:±5% |
| 印字機能 | サーマルプリント方式 紙幅58mm |
| 時計機能 | 時刻表示、時・分、自動カレンダー機能付 |
| 加圧方式 | エアポンプによる自動加圧 |
| 減圧方式 | メカ排気弁による自動減圧 |
| 急速排気方式 | 電磁弁による自動急速排気 |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約70VA |
| 外形寸法 | 245(W)×322(H)×390(D)mm (腕のせ台取付で138mm増) |
| 質量 | 約9kg |
| JANコード | TM-2655 : 4981046700030 TM-2655P : 4981046700023 |

医療機器承認番号 21100BZZ00541000


特定保守 管理医療機器

販売名:全自動血圧計TM-265

一般的名称:医用電子血圧計(JMDNコード:16173010)

架台 TM9325

- 脚は左右つけかえができ、壁際ギリギリにつけられます。
- 前脚は、測定に邪魔にならないフラットな脚になっています。

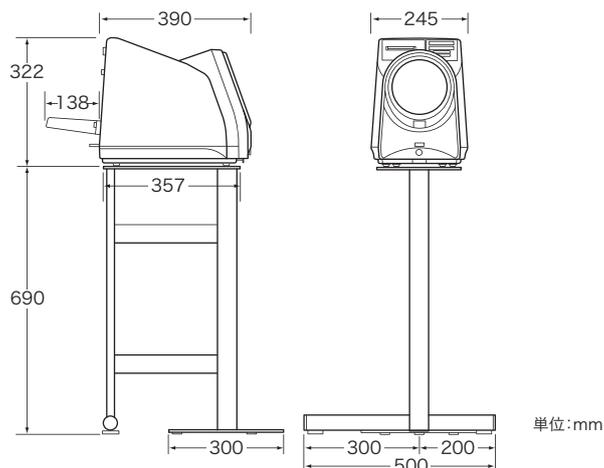

オプション



専用架台

¥38,000 (税抜き)
商品コード:TM9325
JANコード:4981046711609



ガスバネ椅子 (固定足)

¥16,000 (税抜き)
商品コード:TM-STA001
JANコード:4981046712729



内布

¥10,000 (税抜き)
商品コード:AX-133003442-S
JANコード:4981046711418
入数 5枚



プリンタ用紙

¥5,000 (税抜き)
商品コード:AX-PP147-S
JANコード:4981046711340
入数 5巻



RS232Cケーブル

¥8,000 (税抜き)
商品コード:AX-KO1150
JANコード:4981046711883



RS232Cケーブル (DOS-V用)

¥8,000 (税抜き)
商品コード:AX-KO1869
JANコード:4981046711890



フットスイッチ

¥12,000 (税抜き)
商品コード:AX-SW135
JANコード:4981046712125



通信ケーブル

¥8,000 (税抜き)
商品コード:AX-KO3246
JANコード:4981046711913

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(直) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者:株式会社エー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434
製造業者:研精工業株式会社

<http://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。*TM2655-ADJC-05-PR3-13a10