


全自動血圧計
TM-2656VPW

Technology You Can Trust

A&D
A&D Medical

診之助

Shinnosuke

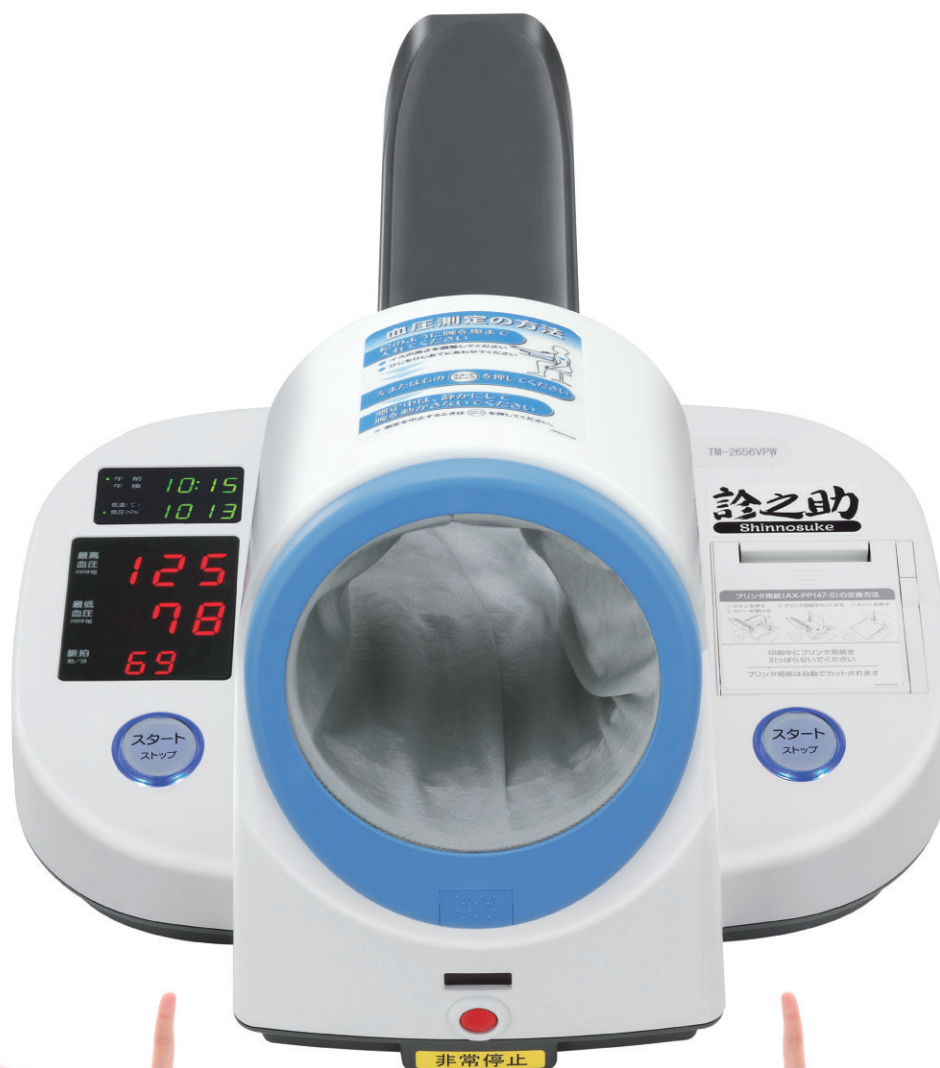

より正確な血圧測定のために・・・
いくつかのこだわりを“かたち”に

賢い
Smart

拡張性
Scalable

優しい
Soft



正確な血圧測定で、“診”断を“助”ける


計測器メーカーが創る“高性能・高耐久性”を実現

業界初! 診之助だけ
※当社、調査による

気圧・気温計搭載

血圧は、常に変動しています。
体調の変化は、自然界の影響も多く受けています。
その中でも、急激な気温、気圧の変化は、脳卒中や、心筋梗塞を引き起こす要因としても報告されています。
TM-2656VPWには、気温計、気圧計を搭載し、血圧測定結果と一緒にプリントアウトできます。
「心筋梗塞・脳卒中予報」 注意すべき自然環境変化もアドバイスいたします。

(監修:広島県医師会・心筋梗塞予報委員会)

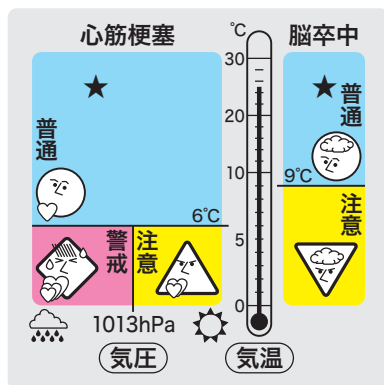

★: 現在 気温・気圧 <監修> 広島県医師会 心筋梗塞予報委員会

※ 気温・気圧グラフ印字「心筋梗塞・脳卒中予報」について
広島県における心筋梗塞、脳卒中の発症例と気象条件の関係を調査研究した文献をもとに、本機周辺の現在気温、現在気圧とのグラフを次の条件で印字します。本予報(条件)について他県すべてにおいて該当するものではありません。

心筋梗塞(警戒域): 一日の平均気温6°C未満・平均気圧1013hPa 未満
心筋梗塞(注意域): 一日の平均気温6°C未満・平均気圧1013hPa 以上
脳卒中(注意域): 一日の平均気温9°C未満
[文献] 松村誠: 広島医学57巻5号(2004年5月)「心筋梗塞予報」
松村誠: 第92回日本循環器学会中国・四国合同地方会「心筋梗塞・脳卒中予報」

表示反転モード
(健診モード)



通常モード



表示反転モード



左右測定に適した
デュアルスタートスイッチ

「血圧測定へのこだわり」

■ 操作音声ガイダンス

■ 測定中脈拍同期音

■ IHB機能 ※ Irregular Heart Beat: 不規則脈

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎを監視しています。

脈間隔は、血圧とのかかわりが強く、脈の揺らぎによって、血圧が変動し、本来の血圧値がつかめない場合があります。脈の揺らぎは、ストレス・運動不足・疲労などの生理的な要因で起こるものから、心臓病や自律神経、甲状腺の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。ほとんどの方は、毎日数回は発生しています。

※ 測定中の脈間隔の平均から±25%以上差のある脈をIHBと判定します。




ノーマル印字



豊富な印字パターン

心筋梗塞・脳卒中予報印字

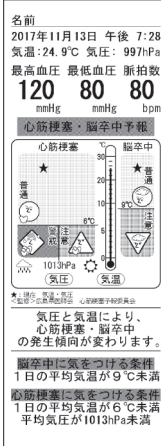


ガイドライン印字



平均血圧印字




血圧脈波印字

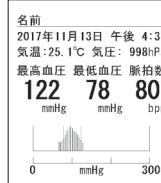

ノーマル印字



使用集計印字

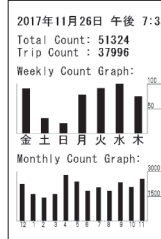

■ ビットマップイメージの取り込みも簡単

オプションの「外部入出力ユニットUSB (TM2656-02)」を利用してUSBメモリで取り込みが可能。



■ 架台の特長 TM-ST500

専用架台を合わせてデザインしました。

正確に測定するために...

- 血圧測定時の腕の高さおよび角度の調整が可能。
- 左右のどちらの腕でも測定が可能。
- 車椅子でも測定しやすいデザイン。

上へ5°、下へ10°の傾き



左へ60°、右へ60°の回転

抗菌仕様(カフ内布)

仕様

型名	TM-2656VPW
測定方式	オシロメトリック法
圧力検出	静電容量式圧力センサー
表示範囲	圧力:0~300mmHg 脈拍:30~200拍/分
精度	圧力:±3mmHg 脈拍:±5%
表示方法	LED
印字機能	サーマルプリンタ方式 紙幅58mm(専用紙)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	60VA
外形寸法	424(W)×304(H)×360(D)mm
重量	約7.5Kg
気温表示	0~50℃
気圧表示	700~1060hPa
IHBマーク	LEDおよび印字にてお知らせ
音声案内	操作案内
脈検知音	測定中、脈拍検知にて同期音発生
人検知センサ	省電力状態より、人検知にてスタンバイ状態
盗難防止	Kensingtonセキュリティスロット付
付属品	説明パネル、電源ケーブル、プリンタ用紙、接地アダプタ、カフ内布(本体取付済)、スクリベット、腕載せ台、添付文書、取扱説明書
一般的名称	医用電子血圧計
販売名	全自動血圧計 TM-2656シリーズ
JMDNコード	16173010
認証番号	221AHBZX00019000
医療機器の分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
電撃保護形式	クラスI
電撃に対する 保護の程度	NIBP:B形装着部
EMC適合	IEC60601-1-2:2007
JIS規格	JIS T 1115:2005
JANコード	4981046701440
商品コード	TM2656VPW-JC
標準価格	¥370,000(税抜)

オプション・消耗品

No.	品名	商品コード	JANコード	標準価格
①	可動式専用架台	TM-ST500	4981046712712	¥39,500(税抜)
②	ガスバネ椅子(固定足)	TM-STA001	4981046712729	¥16,000(税抜)
③	プリンタ用紙(5巻入)	AX-PP147-S	4981046711340	¥ 5,000(税抜)
④	カフ内布	AS-134000550-S	4981046713009	¥ 3,500(税抜)
⑤	外部入出力ユニットRS	TM2656-01	4981046712736	¥46,000(税抜)
⑥	外部入出力ユニットUSB	TM2656-02	4981046712743	¥47,000(税抜)
⑦	フットスイッチ	AX-SW135	4981046712125	¥12,000(税抜)
⑧	電源ケーブル	AX-KO115	4981046712941	¥ 2,500(税抜)
⑨	RS232Cケーブル	AX-KO1869	4981046711890	¥ 8,000(税抜)



① 可動式専用架台




② ガスバネ椅子(固定足)



③ プリンタ用紙(5巻入り)



④ カフ内布

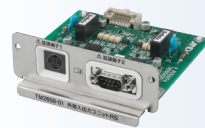

⑤ 外部入出力ユニットRS



⑥ 外部入出力ユニットUSB



⑦ フットスイッチ



⑧ 電源ケーブル



⑨ RS232Cケーブル

血圧計データの通信に関するお問い合わせは
ME機器相談センターまでお問い合わせください

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
製造販売業者:株式会社エー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外觀及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*TM2656-ADJC-08-PR7-18102GP