

全自動血圧計
TM-2657

Discover Precision

A&D
A&D Medical

診之助 Slim

Shinnosuke



省スペース! かんたん操作!

基本に忠実な腕帯(カフ)構造で、自動測定!

病院外来・病棟・透析、クリニック、薬局、スポーツ施設、公共機関、
健診、企業健康管理など、幅広い場所でご使用いただけます。



A&D 株式会社 **エーアンドデー**

全自動血圧計

医療機器認証番号226AHBZX00016000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

診之助 Slim
Shinnosuke

- TM-2657 標準型 ¥298,000 (税抜)
TM-2657P プリンタ内蔵 ¥320,000 (税抜)
TM-2657VP 音声ガイド・プリンタ内蔵 ¥350,000 (税抜)

軽量・コンパクトを追求!


本体の幅、奥行き、高さ共、さらにスリム化。(従来品比較)
軽量・コンパクトで、設置場所をとりません。

自然な姿勢で測定可能!


腕を深く入れられ、無理なく自然な姿勢で測定ができます。
また、“くちばし”形状の腕帯リングで、腕への負担を軽減します。



左右どちらの腕でも測定できる デュアル設計

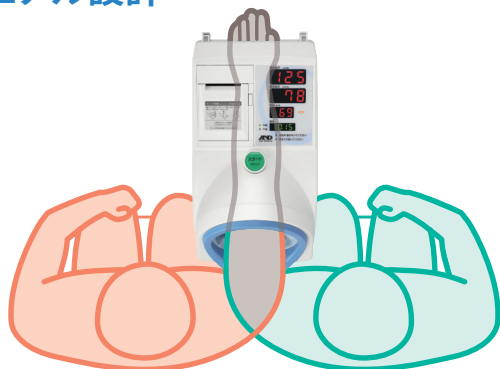

壁際につけられ、カウンターにも置ける 設置スペースをとらないスリム設計

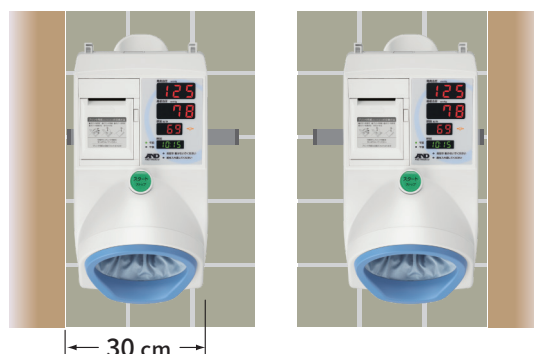

車イスのままでも一人で測定ができる バリアフリー設計



簡単測定! どなたでも簡単に測定


- スタート/ストップスイッチを中央に配置
- 測定終了を音でお知らせします (選べる測定終了音)



IHB機能 ※ Irregular Heart Beat : 不規則脈

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎをお知らせします。

脈間隔は、血圧とのかかわりが強く、脈の揺らぎによって、血圧が変動し、本来の血圧値がつかめない場合があります。脈の揺らぎは、ストレス・運動不足・疲労などの生理的な要因で起こるものから、心臓病や自律神経、甲状腺の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。ほとんどの方は、毎日数回は発生しています。

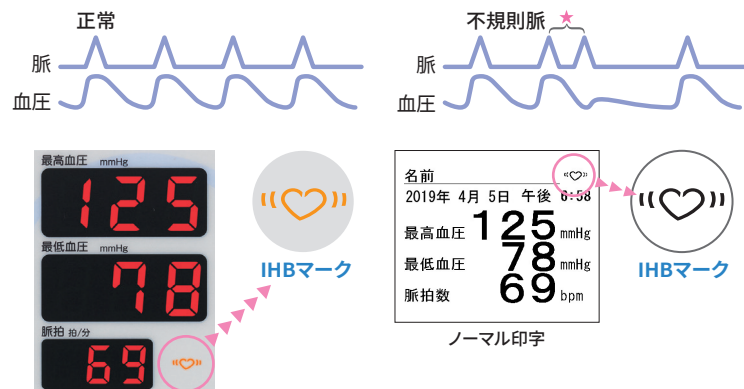

安心の非常停止スイッチ

測定中にももしも気分が悪くなったような場合に、非常停止スイッチを押せば、すべての機能が緊急停止し、腕帯の締め付けを解除します。

拡張端子 (RS232C) 1ch

コンピュータ、カードリーダー、バーコードリーダー等と接続、データの管理や自動化が可能です。

また、工場オプションにより2ch (TM2657-01)、Bluetooth®通信 (TM2657-05、TM2657-06) も可能になります。



※ Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, INC. の登録商標です。

Printer

複数回測定機能 ※ TM-2657VP のみ

ガイドライン推奨の複数回血圧測定機能
2回または3回血圧測定を実施し、
平均値を表示・出力します。

音声とLED表示で血圧測定をガイドします。

複数回測定結果は、平均値以外に
都度測定の結果も印字されます。



2回平均印字

名前	
2020年 4月 9日 午前 1:54	
2回平均測定	
最高血圧	130 mmHg
最低血圧	77 mmHg
脈拍数	75 bpm
SYS [mmHg]	DIA [mmHg] PUL [bpm]
① 135 73 76	
② 126 81 75	


3回平均印字

名前	
2020年 1月 13日 午前 10:33	
3回平均測定	
最高血圧	115 mmHg
最低血圧	62 mmHg
脈拍数	71 bpm
SYS [mmHg]	DIA [mmHg] PUL [bpm]
① 124 63 69	
② 109 63 67	
③ 112 60 76	
SYS [mmHg]	DIA [mmHg] PUL [bpm]
①-② 117 63 68	
①-③ 118 62 73	
②-③ 111 62 72	

TM-2657P/2657VPのプリンタで測定値を印字


A&D製の体重計、身長計の測定値を別売の出力端子ケーブルの接続により、TM-2657P/2657VPのプリンタで印字ができます。

例：デジタル身長体重計と接続

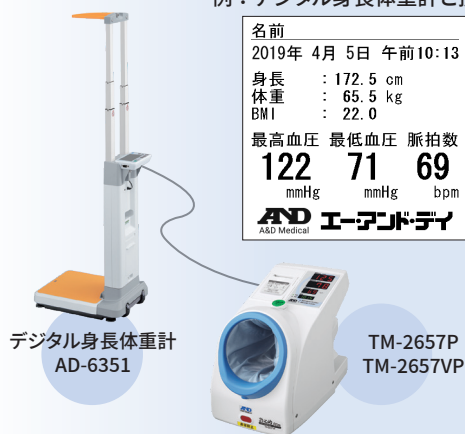


その他印字パターン例

ガイドライン印字

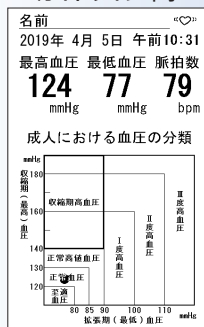

グラフ&コメント印字

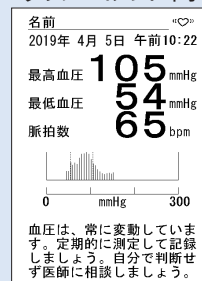

高速印字

名前	
2019年 4月 5日 午前 10:05	
最高血圧	125 mmHg
最低血圧	71 mmHg
脈拍数	68 bpm

テーブル印字


2019年 4月 5日 午前 10:07	
No.	TIME SYS DIA PUL
00001	10:07 119 69 67
00002	10:09 125 75 68
00003	10:12 117 72 67
00004	10:14 125 83 69
00005	10:15 112 67 68
00006	10:17 118 69 70

スマホアプリで読み取り…QR印字

血圧、体重、体温等のバイタルサインを管理できる
スマホアプリ「A&D Connect Smart」では、
QR印字出力をアプリに取り込むことができます。



※ App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
※ Google Play、Google Playロゴは、Google LLC の商標です。

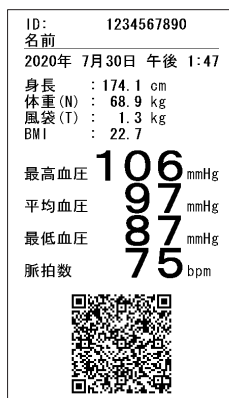


仕様

型名	TM-2657VP	TM-2657P	TM-2657
一般の名称	医用電子血圧計		
販売名	全自動血圧計 TM-2657シリーズ		
測定方式	オシロメトリック法		
圧力検出	静電容量式圧力センサー		
表示範囲	圧力：0 mmHg～299 mmHg 脈拍：30 拍/分～200 拍/分		
精度	圧力：±3 mmHg 脈拍：±5 %		
表示方法	LED		
印字機能	サーマルプリント方式 紙幅58 mm (専用紙)	—	
IHBマーク	表示、印字	表示のみ	
音声案内	操作案内	—	—
脈検知音	測定中の脈検知により同期音発生	—	—
測定終了音	選択可	—	—
外部入出力	RS-232C準拠 1 ch (工場オプションにて1 ch増設可能)		
電源	AC100 V-240 V 50 Hz-60 Hz		
消費電力	50 VA-80 VA		
外形寸法	241 (W) × 324 (H) × 390 (D) mm (突起部含まず)		
本体質量	約5.5 kg		
認証番号	226AHBZX00016000		
医療機器の分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器		
電撃保護形式	クラス I		
電撃に対する保護の程度	NIBP：B形装着部		
EMD適合	IEC60601-1-2：2014		
RoHS	指令対応		
付属品	説明パネル、電源コード、取扱説明書、添付文書、プリンタ用紙、カフ内布 (本体取付済)	プリンタ用紙以外は左記同	
JANコード	4981046701495	4981046701501	4981046701518
商品コード	TM2657VP-JC	TM2657P-JC	TM2657-JC
標準価格 (税抜)	¥350,000	¥320,000	¥298,000

■ 拡張性《データ収集システム》

手書き・手入力の運用をデータ収集の自動化へ

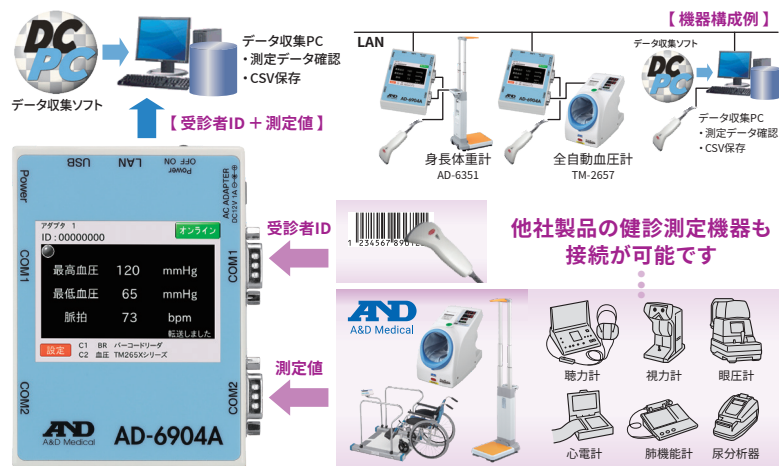

オプション / 別売品



■ 架台

¥38,000 (税抜)
商品コード：TM-ST520
JANコード：4981046714433



■ ガスバネ椅子 (固定足)

¥16,000 (税抜)
商品コード：TM-STA001
JANコード：4981046712729



■ プリンタ用紙

¥5,000 (税抜)
商品コード：AX-PP147-S
JANコード：4981046711340
入数：5巻



■ カフ内布

¥3,500 (税抜)
商品コード：AX-133003753-S
JANコード：4981046130448



■ TM2657用キャリングケース

¥35,000 (税抜)
商品コード：TM2657-10
JANコード：4981046714099

■ 電源ケーブル

¥2,500 (税抜)
商品コード：AX-KO115
JANコード：4981046712941

■ 外部入出力ユニット



商品コード	TM2657-01	TM2657-05	TM2657-06
標準価格	¥30,000 (税抜)	¥40,000 (税抜)	¥40,000 (税抜)
JANコード	4981046714129	4981046714136	4981046135634
工場オプション	専用コードSA899	専用コードSA900	お問い合わせください
RS232C	○	○	○
Mini-DIN	○	×	×
Bluetooth	×	○(HDP)	○(SPP)

定期点検サービス

あんど 安心サポートone いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ 〒364-8585埼玉県本市朝日1-243

<https://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
※ 本カタログは事業者向けです。 * TM2657-ADJC-12-PR9-214026GP