



# Swan mini



看護業務に最適  
携帯に便利な  
手のひらサイズ

上腕式で超軽量

血圧計本体 約 **73g**

腕帯・乾電池込みで 約 **260g**

経済的な超低消費電力

単3形アルカリ乾電池1本で約6,000回測定

血圧値の信頼性を高める

不規則脈(IHB)検知 **"♡"**

安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用

シリコン製のゴム球で送気も楽に



## 血圧値の信頼性を高める 不規則脈(IHB)検知




血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎを監視しています。  
脈間隔は、血圧とのかかわりが強く、脈の揺らぎによっては血圧も変動、本来の血圧がつかめない場合があります。脈の揺らぎは、ストレス・運動不足・疲労などの生理的な要因で起こるものから、心臓病や自律神経、甲状腺の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。ほとんどの方は、毎日数回は発生しています。

※ 測定中の脈間隔の平均から±25%以上差のある脈をIHBと判定します。

## 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)

ラテックスアレルギーに対応の肌に優しい素材を使用

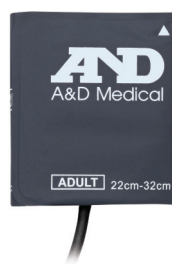

適応腕周 22~32cm

### 主な仕様

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| モデル名     | UA-704CR                                  |
| 測定方式     | オシロメトリック方式                                |
| 表示       | 液晶デジタル方式                                  |
| 測定範囲     | 圧力 0~280mmHg 脈拍 40~180拍/分                 |
| 精度       | 圧力 ±3mmHg 脈拍数 読取り数値の±5%                   |
| 加圧方式     | ゴム球による手動加圧方式                              |
| 減圧       | 定降圧自動排気弁方式                                |
| 排気       | 排気スイッチによる手動急速排気方式                         |
| 電源       | 単3形乾電池 1本                                 |
| 電池寿命     | アルカリ乾電池使用時 約6,000回                        |
| 本体寸法     | 100(W)×31(H)×51(D)mm                      |
| 本体質量     | 約73g(電池除く)                                |
| 付属品      | アダルトカフ、単3形乾電池(モニター用)、<br>収納ケース、取扱説明書、添付文書 |
| 一般的名称    | 手動式電子血圧計                                  |
| 販売名      | エー・アンド・デイ デジタル血圧計 UA-704                  |
| 医療機器の分類  | 管理医療機器                                    |
| 認証番号     | 219AHBZX00017000                          |
| 商品コード    | UA-704A-JC3                               |
| JANコード   | 4981046701457                             |
| 標準価格(税抜) | ¥11,000                                   |

### オプション



アダルトカフ 22-32cm  
シングルホース付

¥1,800(税抜)

商品コード: UM-CUF-KSA-JC1

JANコード: 4981046714143



シリコンゴム球ユニット

¥1,600(税抜)

商品コード: AX-BULBASSY-JC4

JANコード: 4981046714150

### 定期点検サービス

あんど 安心サポートone いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。  
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

### ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

**0120-707-188**

受付時間: 月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

販売元

**AND** 株式会社 エー・アンド・デイ

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※UA704CR-ADJC-01-PR1-15500