

医用電子血圧計

UM-211

MERCURY
FREE

「医用電子血圧計 UM-211」は・・・
病院やクリニックの外来、病棟、介護施設など
医療現場でのご使用に最適な電子血圧計です。



小さなボディに豊富な機能 医療用電子血圧計

✓ 高耐久設計

加圧ポンプ、カフは業務利用に適した高耐久タイプを使用しています。

✓ 腕の太さに合わせて、カフの交換が可能

成人から幼児まで、幅広い患者の測定に対応。
標準付属のAカフの他、4種類のサイズに対応しています。



LLカフ



LAカフ



Aカフ



SAカフ



SSカフ

※ 適応腕周は裏面のオプション覧をご確認ください。

✓ バッテリー駆動

バッテリー駆動で約300回の測定が可能。ランニングコストが軽減し、
電池交換の手間が省けます。
もちろんACアダプタを使用し、充電しながら使用いただけます。

✓ 計量・コンパクト

本体重量550gと軽量コンパクトな設計で、持ち運びに便利な大型
ハンドルや、アクセサリポケット(カフポケット)を装備しています。
設置床面積12×14cmのコンパクト設計、机の上に
置いても邪魔にならないサイズです。

✓ スタンドタイプに

オプションの血圧計用架台(UM-ST002)に
装着すれば、外来室等でのご使用や移動しな
がらの血圧測定に便利です。

血圧計用架台装着時



MERCURY
FREE

2013年に国連主導で採択された「水俣条約」は水銀血圧計の段階的な廃止を明記しています。
「地球にやさしく、人体に安全なMercury-free(脱水銀)社会を一日でも早く実現したい」
そんな私たちの想いをこのロゴマークに込めました。



✓ 時計表示、室温表示

待機画面では、時計表示のほか、室温表示ができます。

※ 充電中は、室温表示されません。



✓ バックライト付
大型液晶ディスプレイ

大型液晶で見やすい!

✓ 99回メモリ

測定結果データは99回分本体にメモリされます。



✓ IHB機能

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎをお知らせします。



✓ 聴診モード搭載

オシロメトリック法による自動測定の外、**聴診モード**を搭載しています。



仕様

販売名	医用電子血圧計 UM-211
型名	UM-211
測定方式	自動モード：オシロメトリック法 聴診モード：聴診法
測定範囲	圧力：0 mmHg～299 mmHg 最高血圧：60 mmHg～279 mmHg 最低血圧：40 mmHg～200 mmHg 脈拍：40 拍～200 拍/分
測定精度	圧力：±3 mmHg 脈拍：読み取り数値の±5%
温度精度	±2.5 °C (+5 °C～+40 °C)
電源	専用バッテリーパック 3.6V UM-211-20-JC (ニッケル水素充電電池) またはACアダプタ AX-TB268-JC
測定回数	電池駆動時約300回 (圧力値180 mmHg 室温23 °C)
メモリ	99データ
使用環境	+5 °C～+40 °C/10 %RH～85 %RH (結露無きこと) 800 hPa～1060 hPa
輸送/保存環境	-20 °C～+60 °C/10 %RH～95 %RH (結露無きこと) 700 hPa～1060 hPa
本体寸法	約120 (W) × 200 (H) × 140 (D) mm
本体重量	約550 g (専用バッテリーパック除く)
標準付属品	Aカフ、専用バッテリーパック (UM-211-20-JC)、ACアダプタ (AX-TB268-JC)、 ACアダプタケーブル (AX-KO1885)、添付文書、取扱説明書
種別	機械器具18血圧検査または脈波検査用器具
一般的名称	医用電子血圧計
JMDNコード	16173010
認証番号	228AHBZX00008000
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード	4981046306263
商品コード	UM-211C-JC11
標準価格 (税抜)	¥25,800


※ 本製品はEMC規格 (IEC60601-1-2:2014) に適合しています。
※ 本製品はJIS T 1115 : 2018に適合しています。

オプション

品名	適応腕周	商品コード	標準価格 (税抜)	JANコード
LLカフ	41 cm～50 cm	UM-LLRS4K1KJC	¥4,000	4981046306485
LAカフ	31 cm～45 cm	UM-LARS4K1KJC	¥2,700	4981046306508
Aカフ	22 cm～32 cm	UM-AURS4K1KJC	¥2,000	4981046306522
SAカフ	16 cm～24 cm	UM-SARS4K1KJC	¥2,200	4981046306546
SSカフ	12 cm～17 cm	UM-SSRS4K1KJC	¥2,200	4981046306560
ACアダプタ		AX-TB268-JC	¥5,000	4981046131667
ACアダプタケーブル		AX-KO1885	¥600	4981046712019
専用バッテリーパック		UM-211-20-JC	¥5,000	4981046131650
架台		UM-ST002	¥18,000	4981046149983



架台取付け時寸法 (mm)

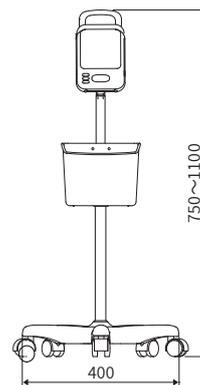

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

製造販売業者



本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間：月～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00