

# 高精度かつ透析室の様々なニーズに お応えできるスケールベッド


## デジタル スケールベッド

### WAKシリーズ

取引・証明用  
検定付精度等級  
3級

変化量 10 g  
見やすいバックライト液晶

▶ 選べるデザイン ▶ 省スペース対応 ▶ システム連携 (オプション)

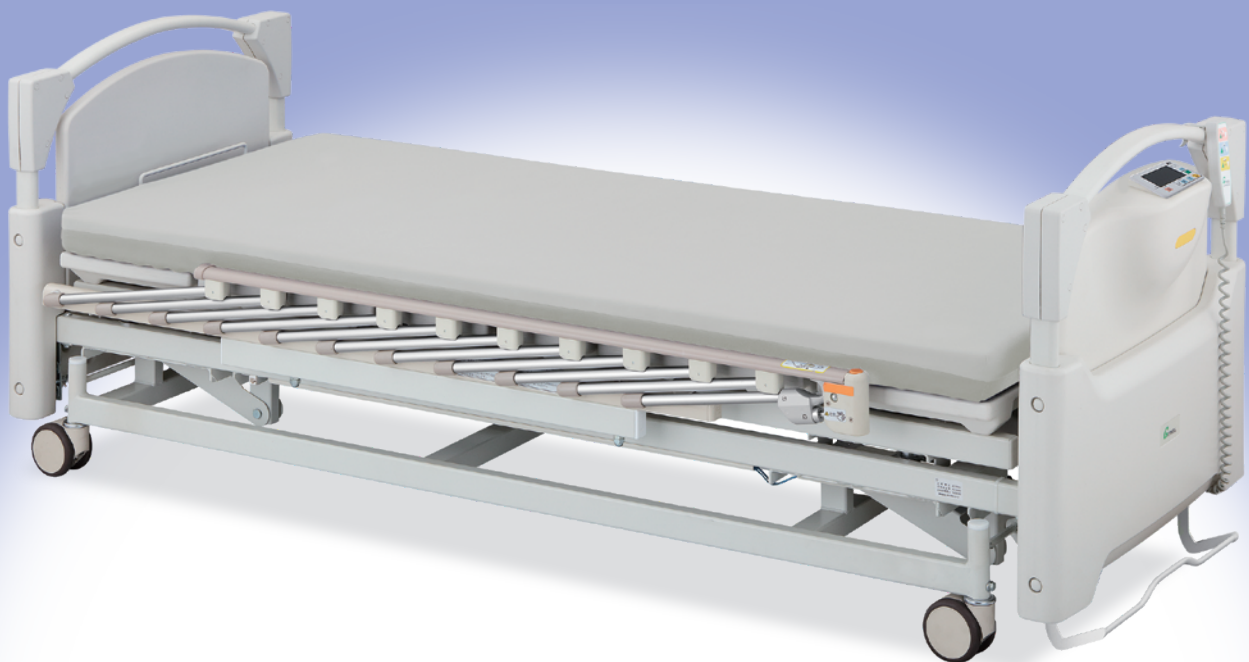

Nタイプ

落ち着いた室内空間を演出  
High grade & Hospitalityを追求したHタイプ・新登場



複数台のスケールベッドの体重管理が可能に

LAN接続で外来から入院患者まで体重管理

LAN接続オプション + 透析業務支援システム

システム接続図



イーサネットコンバータ  
WAK-820シリーズ用  
オープン価格  
商品コード:AZT-AC01

見やすい表示器


- 白と黒の見やすいコントラスト、バックライト付き
- 選べる変化量モードと体重値比較標準モード



選べるベッド幅

【マット幅】

WAK820 : 800 mm  
WAK720 : 700 mm

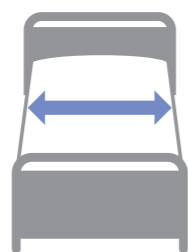

※全幅は仕様により変わります  
省スペースな幅狭タイプ

選べるボードデザイン

Hタイプ Nタイプ Kタイプ



病室に合った  
デザイン選択

ローボード  
オプション

各ボードに対応

例：Kタイプ  
フットケアに便利

選べる表示モード

運用に応じて変化量と体重値比較を選択可能



アラーム機能

体重変化量が設定値を超えた場合、ブザー音でお知らせします  
(消音スイッチ付き)



高精度「10 g」変化量


わずかな変化も見逃さない  
10 gの変化量



×10枚

ベッド機構部


3モーター電動ベッド  
WAKシリーズ

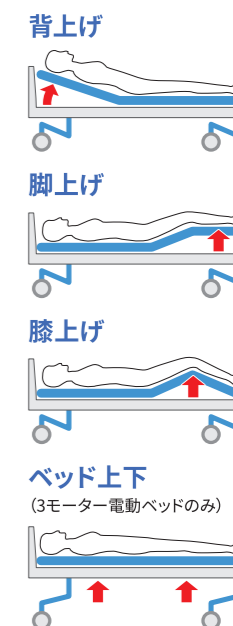

機種別機能一覧表

型名	集中ロック (工場オプション TCR-010)	G ベッド幅	A 全幅			B ボード幅	C 全高	D 全長	E 寝台部高さ (ベッド部-床面)	F 足元側高さ (ボード-床面)	H 背上げ角度	I 脚上げ角度	質量
			差し込み式	格納式	折り畳み式								
WAK-820-H	×	760		888	906	800	818~1091	2198	462~735	818~1091	0~78度	0~45度	133 kg
WAK-820-N							842~1115	2181		842~1115			134 kg
WAK-820-K							807~1080	2206		807~1080			136 kg
WAK-720-H	×	672	794		846	800	818~1091	2198	435~708	818~1091	0~78度	0~45度	133 kg
WAK-720-N							842~1115	2181		842~1115			134 kg
WAK-720-K							803~1076	2206		803~1076			136 kg
WAK-820-H	○	760		888	906	800	791~1064	2198	435~708	791~1064	0~78度	0~45度	154 kg
WAK-820-N							815~1088	2195		815~1088			155 kg
WAK-820-K							780~1053	2206		780~1053			157 kg
WAK-720-H	○	672	794		846	800	791~1064	2198	435~708	791~1064	0~78度	0~45度	154 kg
WAK-720-N							815~1088	2195		815~1088			155 kg
WAK-720-K							780~1053	2206		780~1053			157 kg

外形寸法図

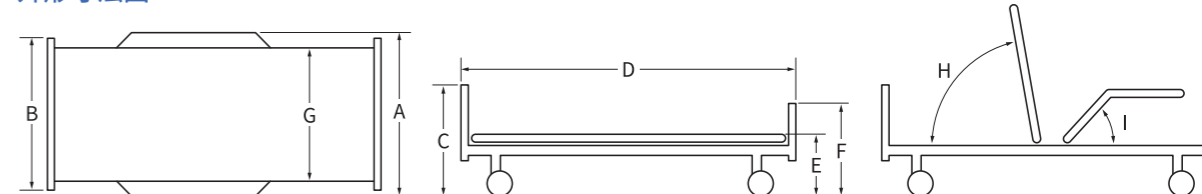

仕様

ひょう量	150 kg
目量	100 g
最小表示量	2.0 kg
体重変化量 測定範囲	-9.99 kg~+9.99 kg
体重変化量	10 g
アラーム設定範囲	0.01~9.99 kg (最小表示10 g)
アラーム出力	ブザー音
電源	AC100 V、消費電力100 W (最大)

製造業者 株式会社タチエスH&P




Nタイプ


オプション




キャスター集中ロック  
(工場オプション) TCR-010  
オープン価格  
商品コード UFT-TCR-010  
JANコード 4981046713108

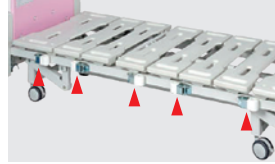


格納式サイドガードホルダー  
5×2 (工場オプション) SGF-050  
オープン価格  
商品コード UFT-SGF-050  
JANコード 4981046713115

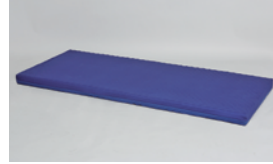


マットレス  
UTM-80190  
オープン価格  
商品コード UFT-UTM-80190  
JANコード 4981046712804

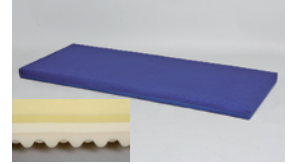

低反発マットレス  
UTM-80190T  
オープン価格  
商品コード UFT-UTM-80190T  
JANコード 4981046713290

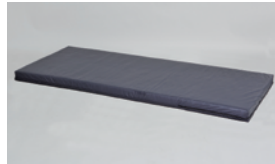

防水マットレス  
UTM-80190B  
オープン価格  
商品コード UFT-UTM-80190B  
JANコード 4981046713283

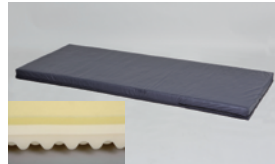

防水低反発マットレス  
UTM-80190BT  
オープン価格  
商品コード UFT-UTM-80190BT  
JANコード 4981046713306



サイドガードEタイプ 1本  
SGJ-980  
オープン価格  
商品コード UFT-SGJ-980  
JANコード 4981046713832



折り畳み式サイドガード  
(2台1組) SGM-232J  
オープン価格  
商品コード UFT-SGM-232J  
JANコード 4981046712811



油圧式サイドテーブル  
PB-4090  
オープン価格  
商品コード UFT-PB-4090  
JANコード 4981046713337



油圧式オーバーテーブル  
PB2-445120  
オープン価格  
商品コード UFT-PB2-445120  
JANコード 4981046713313



固定式記録台(ベッド装着用)  
MKS-3080  
オープン価格  
商品コード UFT-MKS-3080  
JANコード 4981046713191



折り畳み式サイドガード  
セパレート(2台1組) SGM-723JJ  
オープン価格  
商品コード UFT-SGM-723JJ  
JANコード 4981046200905

使用地域区分

使用地域 (都道府県)	使用地域区分別 重力加速度の範囲
① 北海道	9.803 m/s <sup>2</sup> ~9.807 m/s <sup>2</sup>
② 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799 m/s <sup>2</sup> ~9.804 m/s <sup>2</sup>
③ 福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796 m/s <sup>2</sup> ~9.801 m/s <sup>2</sup>
④ 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)	9.794 m/s <sup>2</sup> ~9.799 m/s <sup>2</sup>
⑤ 鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789 m/s <sup>2</sup> ~9.794 m/s <sup>2</sup>

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

製造販売業者

**AND 株式会社 エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

**⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。**