


# AD-1676 卓上風防 (M) を使用する場合の補足説明書

「除振台 (AD-1671)」と別売の「卓上風防 (M) (AD-1676)」と併用する場合の補足説明です。

## 外観図 (除振台に卓上風防 (M) を設置した時の推奨位置)

- ※1 卓上風防 (M) の設置位置は、天秤表示部先端より 20 mm 程度を推奨します。
- ※2 卓上風防 (M) と除振台を併用した場合、後方に 65 mm 程度の間隔ができますが、性能上問題はありません。

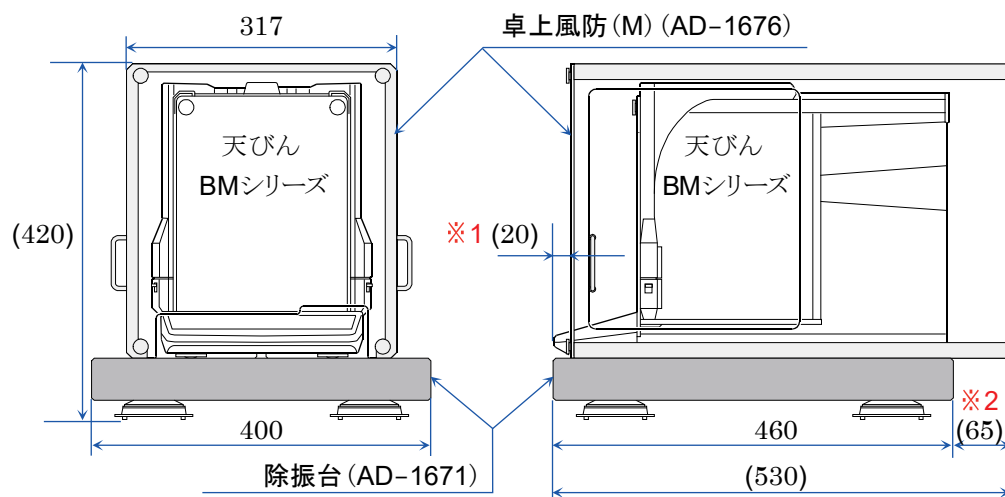

1WMPD4004488

**AND** 株式会社 **エー・アンド・デイ**


Refer to another side for English

# Supplement Description for Using AD-1676 Tabletop Breeze Break (M)

Supplement description to place the AD-1676 tabletop breeze break (M) of option on the AD-1671 anti-vibration table.

## The Recommended Position to Place the tabletop breeze break (M) on the anti-vibration table

- ※1 We recommend approximately 20 mm distance between the front edge of the balance and the front panel of the tabletop breeze break (M).
- ※2 When the tabletop breeze break (M) is placed on the anti-vibration table, even if approximately 65 mm space between the rear side of the balance and rear panel of the tabletop breeze break (M) becomes, it doesn't influence for the performance.

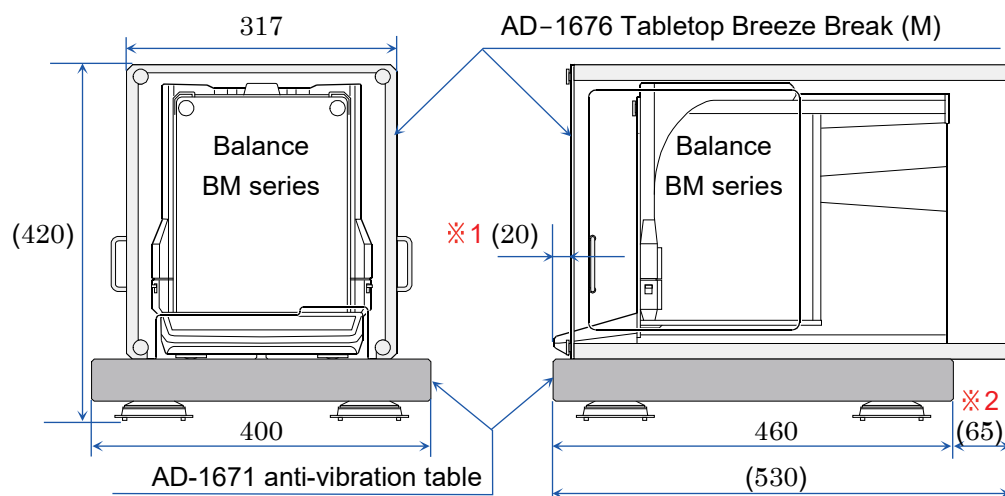

**A&D**  
A&D Company, Ltd.

日本語版は反対側を見てください。