

エーアンドデイ


電子天びん BA シリーズ梱包方法

最小表示 0.01 mg BA-225 の例

○BA225 梱包方法と内容物



①計量部を袋に入れ、内箱の底に収納する。

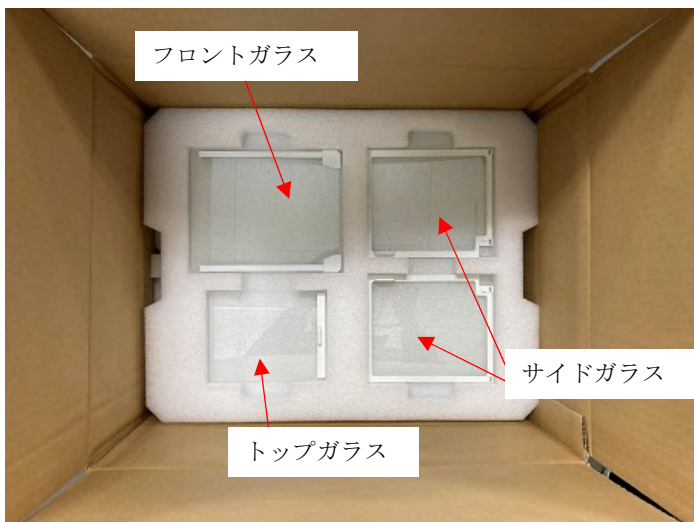

②左図のようにガラスを収納し、  
風防及び計量部の上に載せる。

○BA225 梱包方法と内容物

③下図のように部品を収納し、ガラス類の上に載せる。



④天板を載せて、  
QSG (セグメント) を置く。  
その後、封をする。

○BA225 梱包方法と内容物



- ⑤外箱の底の四つ角の緩衝材に合わせて、内箱を置く。  
更に、上四つ角に合わせて緩衝材をはめる。  
その後、封をする。