
目次

1. WinCT-AD4212D とは
2. 必要なシステム
3. セットアップ手順
4. 接続方法
5. 起動方法
6. アンインストール
7. 使用許諾契約

1. WinCT-AD4212D とは

本ソフトウェアは、エー・アンド・デイ製電子天びん AD-4212D シリーズの計量値の表示、ボタンによる天びんの操作、内部設定の変更をパソコン（以降 PC）で行うことができます。

以下に「WinCT-AD4212D」のセットアップの方法について記述します。

2. 必要なシステム

2-1. PC

対応 OS Microsoft Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista（日本語版）

RS-232C インタフェースがある、または USB-シリアルコンバータにより、COM ポートが増設されているもの。

- * PC に COM ポートが無い場合、アクセサリの USB コンバータ・ケーブルセットを使用することで PC に COM ポートを増設できます。

2-2. 電子天びん

エー・アンド・デイ製天びん AD-4212D シリーズ。


3. セットアップ手順

3-1. 準備


- 1) WinCT-AD4212D セットアップの前に、万が一に備えて PC の重要なデータをバックアップしておいてください。
- 2) 全てのアプリケーションを終了させてください。

3-2. WinCT-AD4212D のインストール

- 1) Setup-AD4212D.msi を実行してください。

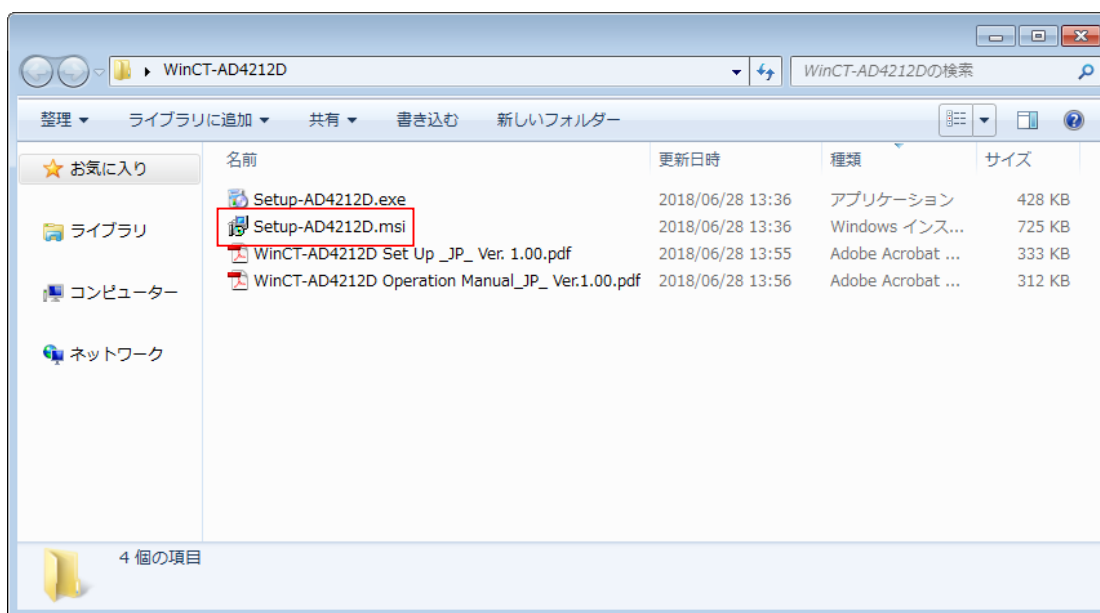

- 2) 画面の指示にしたがってインストールしてください。

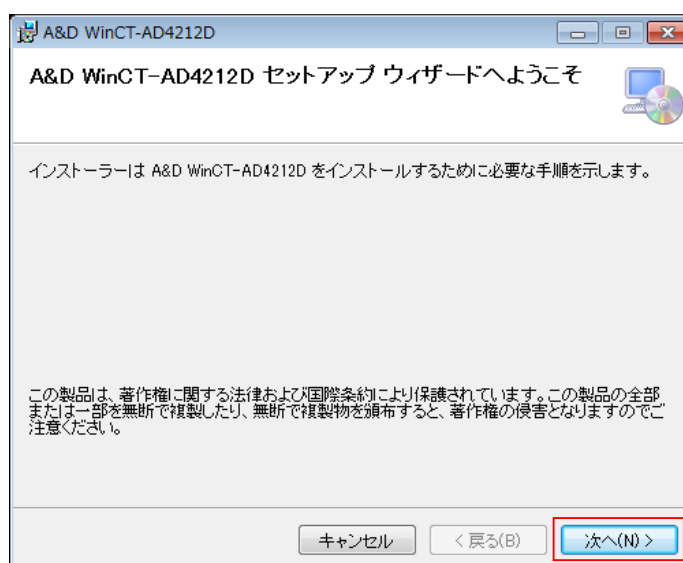

4. 接続方法

4-1. 天びんと PC の接続


1) PC に RS-232C インタフェースがある場合

AD-4212D シリーズに付属している表示器用 RS-232C ケーブル①を使用して、AD-4212D 本体背面の外部表示器用 RS-232C 出力コネクタ②と、PC の RS-232C インタフェースを接続してください。

2) PC に RS-232C インタフェースがない場合


AD-4212D シリーズに付属している表示器用 RS-232C ケーブル①と、別売品の AX-USB-9P USB コンバータ・ケーブルセット③（ドライバのインストールが必要です）を使用して、天びんの外部表示器出力 RS-232C コネクタと PC の USB インタフェースを接続してください。

注意) PC/PLC 用 RS-232C 出力コネクタ④と PC を接続した場合、本ソフトウェアは正しく動作しません。

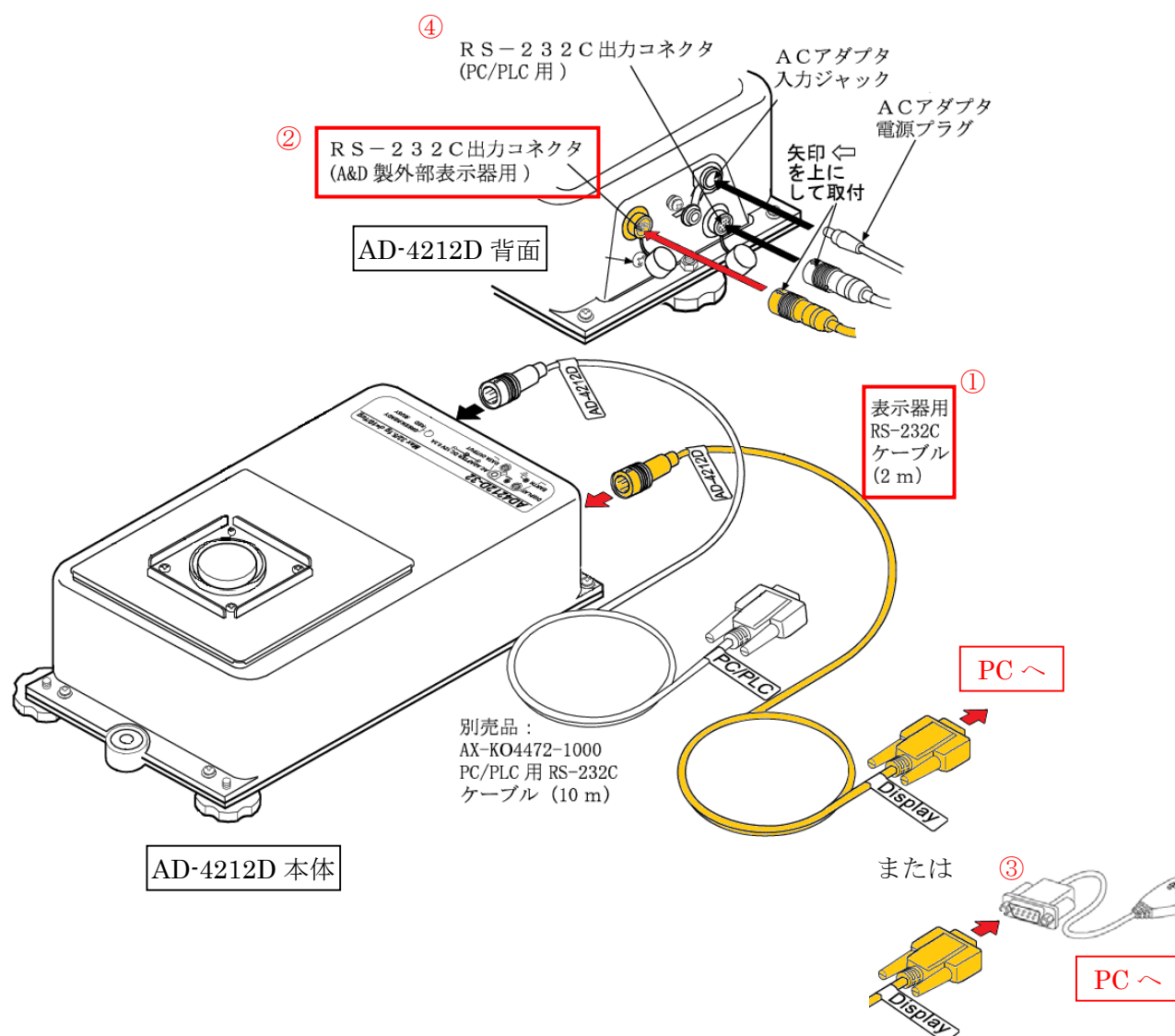

5. 起動方法

「スタート」→「すべてのプログラム」→「A&D WinCT-AD4212D」の中にある「WinCT-AD4212D」をクリックしてください。なお、デスクトップ上にある、WinCT-AD4212D のアイコンをダブルクリックしても起動できます。

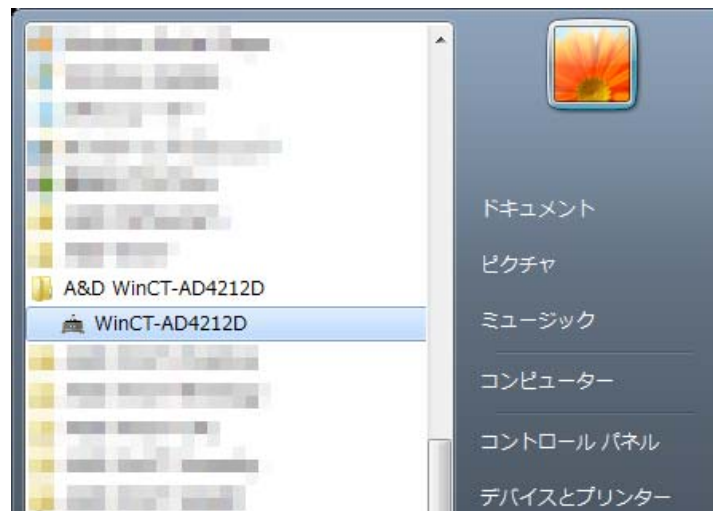


「WinCT-AD4212D」の使用方法は、オペレーション・マニュアル（インストールフォルダ「A&D WinCT-AD4212D」の中にある「WinCT-AD4212D Operation Manual_JP_Ver. ***」）をお読みください。

- * AD-4212D シリーズ以外の天びん、または他社製天びんと接続した場合、本ソフトウェアでの動作は保証いたしません。
- * PC 本体に関しては各メーカーにお問い合わせください。

6. アンインストール

アンインストールは「コントロールパネル」の「プログラムと機能」で「A&D WinCT-AD4212D」を指定してアンインストールしてください。

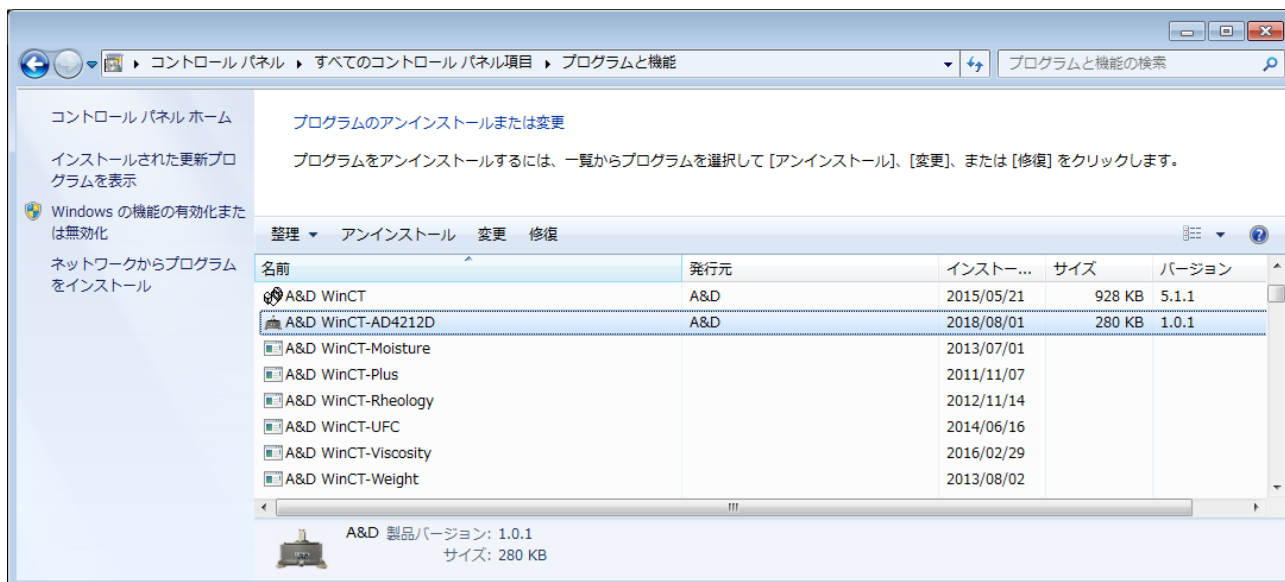

7. 使用許諾契約

- ・「WinCT - AD4212D」を弊社に無断で複製する事は禁じます。
 - ・「WinCT - AD4212D」は予告なく仕様を変更することがあります。
 - ・「WinCT - AD4212D」の著作権は、(株)エー・アンド・デイにあります。
 - ・「WinCT - AD4212D」はエー・アンド・デイ製電子天びんから PC へのデータ転送に使用します。
 - ・「WinCT - AD4212D」は、天びんと接続する PC のハードディスクまたはその他記憶装置に限りインストールして使用できます。
 - ・(株)エー・アンド・デイは「WinCT-AD4212D」または「WinCT-AD4212D Operation Manual_JP_ Ver. ***」の欠陥により発生する直接、間接、特別または必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があるとは告知された場合でも一切の責任を負いません。また、第三者からなされる権利の主張に対する責任も負いません。
- 同時にソフトウェアやデータの損失の責任を一切負いません。

Microsoft、Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または、商標 です。

2018 年 7 月 4 日

(株) エー・アンド・デイ